

För olika ärrtyper  
Gel platta av Silikon  
Lätt vidhäftande  
Kan användas upp till 28 dagar

 **smith&nephew**

**Cica-Care**



## Produktbeskrivning

### UNDERSIDA

- Gel platta av Silikon
- Lätt vidhäftande
- Låg genomsläpplighet för vattenånga
- Mjuk

### ÖVERSIDA

- Förstärkt silikonmembran – Ej vidhäftande
- Osteril
- Två storlekar - 15 x 12 cm, 6 x 12 cm



### Indikationer

- Röda och upphöjda hypertrofiska och kelloidär
- Terapeutisk behandling av nya och gamla ärr
- Förebyggande behandling av hypertrofisk och kelloid ärrbildning



### Olika ärr typer

Översträckta ärr



Insjunkna ärr



Röda och upphöjda hypertrofiska och kelloida ärr




Utbuktande ärr



### Behandlings Schema

Bygg upp behandlingstiden tills 24 timmar nås

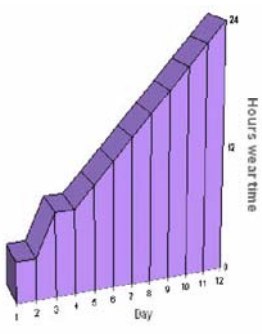

### Tvätta och Återanvändning

- Klipp ut önskad bit för att täcka behandlingsområdet
- Efter varje behandling skall CICA-CARE tvättas i varmt tvålsvatten (Ej tvål innehållande kräm)
- Tvätta och torka huden efter varje behandling
- Låt CICA-CARE lufttorka mellan behandlingarna.
- Re-applicera därefter gelremsan
- Om vidhäftningen avtar kan en lös lindning användas
- Varje bit kan användas upp till 28 dagar



### Resultatbild Cica-Care



Varu nr.	Storlek	Antal
66250704	6 x 12 cm	1 st
66250706	15 x 12 cm	1 st
66250707	15 x 12 cm	10 st

Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige

Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

[www.smith-nephew.se](http://www.smith-nephew.se)