


Højpermeabel film¹

Absorberende hydrocellulær skum²

Ikke-hæftende³ sårkontaktlag

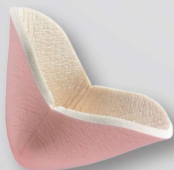

 smith&nephew
ALLEVYN[◇]
Non-Adhesive

ALLEVYN[®] Non-Adhesive bygger på en unik trelagsteknologi med en højabsorberende hydrocellulær skum² placeret mellem en åndbar topfilm¹ og et ikke-hæftende sårkontaktlag³ der kombinerer patientkomfort⁴ med effektiv væskehåndtering^{1,2}.

- Højermeabel topfilm¹ der hjælper med at minimere risikoen for maceration af såret og huden omkring⁵
- Ikke-hæftende sårkontaktlag³ gør bandagen velegnet til sart og skrøbelig hud^{3,4} inklusive patienter med epidermolysis bullosa⁵
- Blød og behagelig for patienten⁴ og kan tilpasses svært bandagerbare områder^{2,4}
- Særlig 'kop' formet hælbandage
- Bredt produktsortiment, med bandager der kan klippes til, for at passe til kroppens former
- Velegnet til anvendelse under kompressionsbandage⁷
- Let at applicere og at fjerne²
- Tracheostomi bandage udviklet absorption omkring tracheostomier og drænsteder

Indikationer

Overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, dybe sår, som f. eks. tryksår, bensår og diabetiske fodsår, inficerede sår, maligne sår, kirurgiske sår, første- og andengradsforbrændinger, donorsteder, ildelugtende sår og epidermolysis bullosa sår.

Applicering

Rens såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Vælg en passende bandagestørrelse. Klargør og rens huden omkring såret og fjern overskydende fugt. Fjern eventuelt hår, for at sikre at bandagen slutter tæt til huden.

Fjern ALLEVYN Non-Adhesive bandagen fra inderemballagen med ren teknik, og applicer den hvide side mod såret. Sørg for god kontakt til huden omkring såret og fiksér kanterne med sekundær bandage (f. eks. OPSITE[®] Flexifix eller OPSITE[®] Flexifix Gentle film eller fiksering).

Når bandagen bruges under kompression, skal den klippes til, så den passer til sårets størrelse uden at overlape den omgivende hud. ALLEVYN Non-Adhesive kan klippes til, så den passer til svært bandagerbare områder - anvend altid ren teknik.

Hvis bandagen er blevet klippet til, skal det sikres, at blotlagte skumområder dækkes med en passende filmbandage. Pas på ikke at dække hele bandagen.

Bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen, og ved brug på inficerede sår, skal ALLEVYN Non-Adhesive inspiceres i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Bandagen kan blive siddende på såret i op til 7 dage, afhængig af sårets og hudens tilstand eller indtil eksudat er synligt og nærmer sig 1,5 cm fra bandagens kant, alt efter hvad der indtræffer først.

Bandager i det sakrale område kan blive siddende i op til 5 dage, og grundet øget risiko for kontamination og infektion i dette område, bør såret og bandagens tilhæftning inspiceres hyppigt og i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Beslutningen om bandageskift er en klinisk vurdering, med hensynstagen til lokale retningslinjer.

Referencer

1. Smith & Nephew data on file report: Comparison of the permeability of ALLEVYN Non-Adhesive standard and new ALLEVYN Non-Adhesive written by David Foster and Anna Rial, Feb 2006. 2. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community, Kurring PA *et al.*, (1994). Br J Nurs 3(20) 1049-1053. 3. A randomised comparative pilot study to evaluate ALLEVYN hydrocellular dressings and Sorbsan Calcium alginate dressings in the treatment of diabetic foot ulcers, Baker NR, Creevy J. Presented at the 6th Annual Symposium on Advanced Wound Care, San Diego, California, 1993. 4. Clinical evaluation report ref: CE/022/ANA - A prospective user evaluation on the effect of process changes tot eh manufacture of ALLEVYN Non-Adhesive wound dressings. Samantha Hartwell, November 2006. 5. The clinical and physical properties of ALLEVYN Non-Adhesive dressings and the moist wound environment. 6. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010. 7. Smith & Nephew data on file 0512009.

Forholdsregler

ALLEVYN Non-Adhesive må ikke anvendes med oxiderende midler som hypokloritopløsninger (f. eks. EUSOL) eller brintoverilte, da disse kan nedbryde bandagens absorberende polyuretankomponent. Opstår rødme eller lokal hudreaktion, skal anvendelse af produktet ophøre. ALLEVYN Heel må ikke anvendes som trykaflastende bandage alene uden brug af trykaflastende foranstaltning. ALLEVYN Non-Adhesive er et engangsprodukt. Anvendes samme produkt på mere end en patient, kan krydskontaminering eller infektion opstå. Åbning af bandagens inderemballage vil kompromittere produktets sterilitet, hvorfor en ubrugt bandage i en åbnet emballage ikke må gemmes til brug på et senere tidspunkt.

Fjernelse af bandagen

ALLEVYN Non-Adhesive fjernes ved at tage den sekundære fiksering af og løfte bandagen fra såret.



Produktsortiment

Varenummer	Størrelse	Antal pr. æske
66007643	5cm x 5cm	10
66007637	10cm x 10cm	10
66007335	10cm x 20cm	10
66000093	15cm x 15cm	10
66007638	20cm x 20cm	10
66000663	40cm x 70cm	2
66007630	Heel 10,5cm x 13,5cm	5
66007640	Tracheostomy 9cm x 9cm	10

ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.°

Wound Management
Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.com
sn.dk@smith-nephew.com

°Varemærke tilhørende Smith & Nephew
™Alle varemærker godkendt
© Smith & Nephew August 2014
14-01870-DK

