

Højpermeabel film<sup>1</sup>

Absorberende hydrocellulær skum

Sårkontaktlag med silikoneklæb



 smith&nephew

**ALLEVYN<sup>®</sup>**

Gentle Border

ALLEVYN<sup>°</sup> Gentle Border håndterer væske via en unik trelagsteknologi der absorberer, tilbageholder og slipper overskydede væske igennem og opretholder en optimal fugtbalance,<sup>1,2</sup> der understøtter sårhelingen.<sup>3,4</sup> ALLEVYN Gentle Border bandagens vigtigste egenskaber er:

- Fremragende formbarhed til kroppens former, der hjælper med at sikre patientkomfort<sup>4</sup>
- Blød silikoneklæb der minimerer traume og og smerte ved bandageskift – ideel til patienter med sart hud<sup>4,6</sup>
- Væsketæt bandage der tillader patienten at tage brusebad med bandagen på<sup>7</sup>
- Topfilm med effektiv barriere mod væske og bakterier – minimerer risiko for kontamination<sup>8</sup>
- Let at applicere og fjerne<sup>4,6</sup> – kan løftes og re-appliceres uden at miste klæbeevnen<sup>6</sup>
- Bredt produktsortiment med forskellige former og størrelser der nemt tilpasser sig kroppens svært bandagerbare områder<sup>6</sup>
- ALLEVYN Gentle Border Heel har trykafastende egenskaber ved anvendelse sammen med trykafastende foranstaltning.

## Indikationer

Overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte, væskende sår, overfladiske eller dybe sår, f. eks. tryksår, diabetiske sår, bensår, ildelugtende sår, inficerede sår, maligne sår, kirurgiske sår, donorsteder, hudrifter og første- og andengradsforbrændinger.

## Applicering

Rens såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Vælg en passende bandagestørrelse.

Klargør og rens huden omkring såret og fjern overskydende fugt. Fjern eventuelt hår, for at sikre at bandagen slutter tæt til huden. Fjern den ene beskyttelsesfilm fra ALLEVYN Gentle Border og applicér den hæftende side på såret. Fjern den anden beskyttelsesfilm og udglat bandagen over såret uden at strække den og undgå at bandagen folder. Skumpuden skal dække hele sårets overflade. Bandagen kan løftes og re-appliceres uden at miste sin klæbeevne.

ALLEVYN Gentle Border kan klippes til, så den passer på svært bandagerbare områder, som hæl og albue. Anvend altid ren teknik når bandagen klippes til.

Hvis bandagen er blevet klippet til, skal det sikres, at blotlagte skumområder dækkes med en passende filmbandage. Pas på ikke at dække hele bandagen.

## Produktsortiment

Varenummer	Størrelse	Antal pr. æske
66800269	7,5cm x 7,5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800272	12,5cm x 12,5cm	10
66800975	15cm x 15cm	10
66800273	17,5cm x 17,5cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800959	17,1cm x 17,9cm Multisite	10
66800897	16,8cm x 17,1cm Sacral small	6
66801031	21,6cm x 23cm Sacral Large	10
66800506	23cm x 23,2cm Heel	5

## ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.<sup>°</sup>

Wound Management  
Smith & Nephew A/S  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

www.smith-nephew.com  
sn.dk@smith-nephew.com

<sup>°</sup>Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
<sup>TM</sup>Alle varemærker godkendt  
© Smith & Nephew August 2014  
14-01871-DK



T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

## Bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen, og ved brug på inficerede sår skal ALLEVYN Gentle Border bandagen inspiceres i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Bandagen kan blive siddende i op til 7 dage, afhængig af sårets og den omgivende huds tilstand, eller indtil eksudat er synligt og nærmer sig 1,5 cm fra bandagens kant, alt efter hvad der indtræffer først. Der skal også tages hensyn til lokale kliniske retningslinjer. Bandager i det sakrale område, kan blive siddende i op til 5 dage, og grundet øget risiko for kontamination og infektion i dette område, bør såret og bandagens tilhæftning inspiceres hyppigt. Beslutningen om bandageskift er en klinisk vurdering, med hensynstagen til lokale retningslinjer.

## Fjernelse af bandagen

ALLEVYN Gentle Border fjernes ved at løfte det ene hjørne af bandagen og langsomt trække den tilbage, indtil bandagen er helt fjernet fra såret. Sakralbandager skal fjernes fra den øverste kant og ned mod den sakrale del for at mindske risikoen for fækal kontamination.

## Forholdsregler

ALLEVYN Gentle Border må ikke anvendes med oxiderende midler som hypokloritopløsninger (f. eks. EUSOL) eller brintoverilte, da disse kan nedbryde bandagens absorberende polyuretankomponent. Opstår rødme eller lokal hudreaktion, bør behandling ophøre. ALLEVYN Gentle Border er et engangsprodukt. ALLEVYN Gentle Border Heel må ikke bruges som trykafastende bandage, uden brug af trykafastende hjælpemidler.



## Referencer

1. Data on file ref DS/09/013/R2. ALLEVYN Gentle Border Dressing Physical Properties. Daubney L. May 2009.
2. Smith & Nephew Wound Management Data on File report ref. 0711080. Absorption properties of ALLEVYN Gentle Border. Tompkins L. November 2007.
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Gentle Border dressing and the moist wound environment. Myers D, November 2007.
4. Hurd T *et al.*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5. No 3.
5. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference OR-DOF/007.
6. Data on file: OR-DOF/001.
7. Data on file: OR-DOF/011.
8. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.
9. Technical Justification AGB006.

Se med  
friske øjne  
på vores  
bandage.  
Det har vi  
gjort.

En alsidig bandage,  
som passer til  
en lang række sårtyper  
og giver et optimalt  
fugtigt sårhelingsmiljø.<sup>1-3</sup>

[www.smith-nephew.com/allevyn](http://www.smith-nephew.com/allevyn)


 **smith&nephew**

**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
**GENTLE BORDER**

Skumbandage



Supporting healthcare professionals

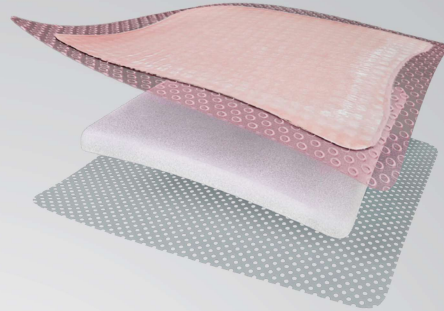

Med et nyt sårkontaktag giver  
ALLEVYN Gentle Border-bandager:



- 35 % signifikant forbedring af hastigheden for væskeoptagelse, inklusiv viskøst eksudat (*in vitro*)<sup>4</sup>
- 20 % stigning i kantens åndbarhed<sup>5</sup>

ALLEVYN Gentle Border bevarer:



- Bandagens evne til at blive siddende, så bandageskift kan udføres 2 gange om ugen<sup>1</sup>
- Bandagens minimale risiko for traume på såret og den omgivende hud<sup>1,2</sup>



Med et bredt udvalg af bandagestørrelser og -former er ALLEVYN bandagerne designet til at tilpasse sig kroppen<sup>6-8</sup> for at øge patientens komfort<sup>1</sup>, mens bandagen er påsat. **Bandagen kan også klippes til!**<sup>9\*</sup>



S&N varenr.		Bandagestr.	Antal/Æske
66800269		7,5 cm x 7,5 cm	10
66800270		10 cm x 10 cm	10
66800900		10 cm x 20 cm	10
66800264		10 cm x 25 cm	10
66800265		10 cm x 30 cm	10
66800272		12,5 cm x 12,5 cm	10
66800975		15 cm x 15 cm	10
66800273		17,5 cm x 17,5 cm	10
66800506	Hæl	23 cm x 23,2 cm	5
66800898	Sacrum, lille	16,8 cm x 17,1 cm	10
66801031	Sacrum, stor	21,6 cm x 23 cm	10
66800959	Multisite	17,1 cm x 17,9 cm	10



**Hvordan kan ALLEVYN Gentle Border hjælpe dig med at skabe bedre resultater i sårbehandlingen?**  
**Se på det med friske øjne.**

Wound Management  
Smith & Nephew A/S  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.dk  
sn.dk@smith-nephew.com

\*Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
™Alle varemærker er godkendt  
© Smith & Nephew februar 2018  
18-02147-DK

Supporting healthcare professionals for over 150 years

\*Hvis bandagen klippes, vil det kompromittere dens egenskaber som antibakteriel barriere. Brug altid en aseptisk teknik. Kontrollér, at eventuelle blottagte områder af skummet dækkes med en passende filmbandage, og sørg for, at hele bandagen ikke dækkes til.

Referencer: 1. T. Hurd, L. Gregory, A. Jones, and S. Brown, "A multi-centre, in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border", Wounds UK, vol. 5, pp. 32-44, 2009. 2. K. Vowden, K. Harding, N. S. Moilemen, K. Drysdale, and C. Mistry, "An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing" in the management of exuding chronic and acute wounds", præsenteret ved EWMA, Bruxelles 2011. 3. A. Horner "ALLEVYN Gentle Border and Optimal Wound Healing" Sept 2017. 4. Smith & Nephew Data on File: DS/17/012/R ALLEVYN Gentle Border & ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Fluid Uptake (Cylinder) Statistical Evaluation 5. Smith & Nephew Data on File: DS/17/544/R Moisture Vapour Permeability Testing of ALLEVYN Gentle Border Gen 1 and ALLEVYN Gentle Border Gen 2. 6. RD/17/103 - Technical comparison of ALLEVYN Gentle Border and ALLEVYN Life to assess the impact of a wound contact layer change. 7. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-09 An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. 8. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-10 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. 9. Smith & Nephew Data on File DS/14/318/R - Cutting of Allevyn Variants.