

MIC-KEY* CONTINUOUS FEED EXTENSION SET WITH ENFit® CONNECTORS

SECUR-LOK® Right
Angle Connector


2 Port "Y" ENFit®
Connectors and Clamp

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Single Patient Use Only.

Warning: For enteral nutrition and/or medication (Rx) only.

The MIC-KEY® Extension Sets with ENFit® Connectors are intended to connect to the MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube, Enteral Feeding Syringes with ENFit® Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit® Connectors.

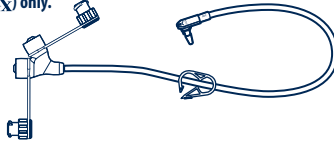

Nonsterile	Not made with natural rubber latex	Product is NOT made with DEHP as a plasticizer
Rx Only	Caution	Consult instructions for use
		REF 0141-12 0141-24

Distributed in the USA by Halyard Sales, LLC, Alpharetta, GA 30004
In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com

Halyard Health, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA

Halyard Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium

Sponsored in Australia by Halyard Australia Pty Limited; 52 Alfred Street, Milsoms Point, NSW 2061

製造販売元 ハリヤード・ヘルスケア・インク 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc., or its affiliates. © 2015 HYH. All rights reserved.


2017-11-27

15-H2-117-0-00 / 70208893



www.mic-key.com

- (FR) Prolongateur d'alimentation continue MIC-KEY® avec connecteurs ENFit®, connecteur à angle droit SECUR-LOK® et connecteurs ENFit® en «Y» à 2 orifices et clamp - Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. - Ce produit n'est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant. - Rx Only: Sur ordonnance uniquement : aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance. - Destiné à un seul patient. - **⚠ Avertissement : Pour alimentation et/ou administration de médicaments (Rx) par voie entérale uniquement.** - Les prolongateurs MIC-KEY® avec connecteurs ENFit® sont prévus pour se connecter sur la sonde d'alimentation gastrostomique extra-plate MIC-KEY®, les seringues d'alimentation entérale avec connecteurs ENFit® et les sachets d'administration d'alimentation avec connecteurs ENFit®.
- (DE) MIC-KEY® Verlängerungsset für die kontinuierliche Ernährung mit ENFit® Verbindungsstücken, mit SECUR-LOK® rechtwinkligem Verbindungsstück und 2 Port-„Y“-ENFit® Verbindungsstücken und Klemme - Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. - Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt. - Rx Only: Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. - Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. - **⚠ Warnung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Verabreichung von Medikamenten (Rx).** - Die MIC-KEY® Verlängerungssets mit ENFit® Verbindungsstücken sind zum Anschluss an MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomie-Ernährungs sonden, enterale Ernährungsspritzen mit ENFit® Verbindungsstücken und Ernährungsbeutel mit ENFit® Verbindungsstücken gedacht.
- (BG) MIC-KEY® комплект удължител за непрекъснато хранене с ENFit® конектори, SECUR-LOK® конектор под прав ъгъл и Y-образни конектори ENFit® с два порта и клампа - При производството не е използван латекс от естествен каучук. - Този продукт не съдържа DEHP (ди(2-етилхексил) фталат) като пластификатор. - Rx Only: Само Rx: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар. - За употреба само от един пациент. - **⚠ Предупреждение: само за ентéralно хранене и/или прилагане на медикаменти (Rx).** - Комплектът удължители MIC-KEY® с ENFit® конектори са предназначени за свързване към нископрофилни гастростомни хранителни сонди MIC-KEY®, спринцовки за ентéralно хранене с ENFit® конектори и торбички за изкуствено хранене с ENFit® конектори.
- (ES) Juego de extensión para alimentación continua MIC-KEY® con Conectores ENFit®, Conector de ángulo recto SECUR-LOK®, Conectores bifurcados de dos puertos ENFit® y pinza. - No fabricado con látex de goma natural. - El producto no está fabricado con DEHP como plastificador. - Rx Only: Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa. - Uso indicado: para un solo paciente. - **⚠ Advertencia: Sólo para alimentación enteral y/o medicamentos recetados (Rx).** - Los Juegos de extensión MIC-KEY® con Conectores ENFit® están hechos para conectar con el tubo de alimentación por gastrostomía de perfil plano MIC-KEY®, las Jeringas para alimentación enteral con Conectores ENFit® y las Bolsas para administrar alimento con Conectores ENFit®.
- (CS) Prodlužovací souprava MIC-KEY® na nepřetržité podávání výživy s konektory ENFit®, pravohálmým konektorem SECUR-LOK®, a 2 otvory tvaru „Y“ na konektory a svorku - Vyrobeno bez přírodního gumového latexu. - Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátorem. - Rx Only: Pouze na předpis: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis. - Pouze pro použití u jediného pacienta. - **⚠ Varování: Pouze pro enteralní výživu a/nebo léky (Rx).** - Prodlužovací soupravy MIC-KEY® s konektory ENFit® jsou určeny pro spojení s nízkoprofilovou gastrostomickou výživovací trubicí MIC-KEY®, enteralními výživovými sáčkami s konektory ENFit® a sáčky na podávání výživy s konektory ENFit®.

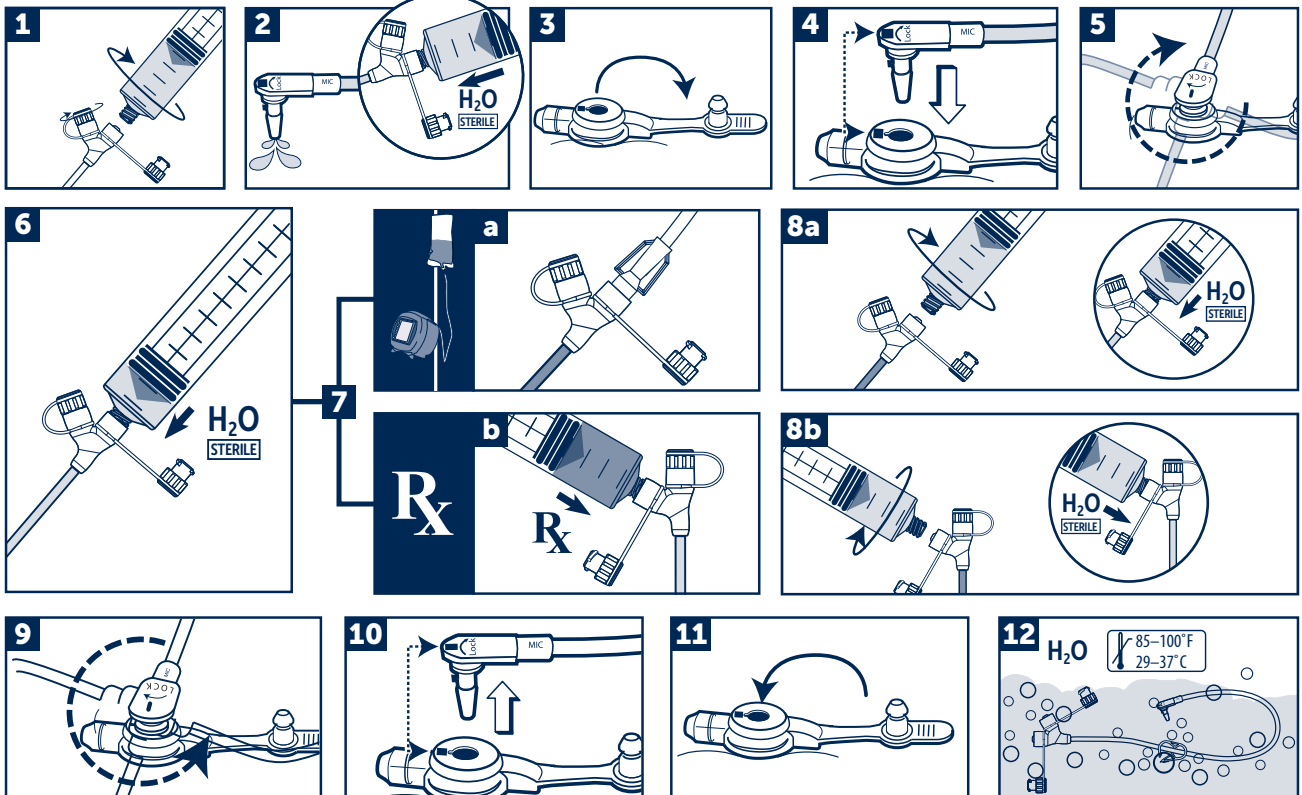

- DA** MIC-KEY* kontinuerl ernæringsindgivelsesforlænger med ENFit* fittings, SECUR-LOK* vinkelstuds, strømte med ENFit* fittings og klemme. - Ikke fremstillet af naturgummilætek. - Ikke fremstillet med DEHP blodgrøningsmiddel. - Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordning af en læge. - Kun beregnet til brug på én patient. - **⚠ Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og lægemiddelindgivelse (Rx).** - MIC-KEY* forlængere med ENFit* fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY* gastrostomiernæringssonder med lav profil, enteralnæringsprøjter med ENFit* fittings og ernæringsposer med ENFit* fittings.
- ET** MIC-KEY* pidevala toitmise pikenduskomplekt ENFit* konektorite, SECUR-LOK* täisnurkse konektor ja 2 avaga „Y“ kujuliste ENFit* konektorite ning klambriga - Ei ole valmistatud looduslikust kummilätekisist. - Toote valmistamisel ei ole plastifikaatorina kasutatud DEHP-d. - Rx Only: Ainult Rx: USA föderaalasenduse lubavad seda seadet müüa ainult arstidel või arsti korraldusel. - Kasutamiseks ainult ühel patsiendil. - **⚠ Hoiatus: ainult enteraalsete toitmiseks ja/või ravimi manustamiseks (Rx).** - ENFit* konektoritega MIC-KEY* pikenduskomplektid on mõeldud MIC-KEY* madala profiiliga gastrostoomia toitmise, ENFit* konektoritega enteraalsete toitmise süstalde ja ENFit* konektoritega toidu manustamiseks kottide ühendamiseks.
- EL** Σετ προέκτασης συνεχούς σίτισης MIC-KEY* με συνδέσμους ENFit*, σύνδεσμο ορθής γωνίας SECUR-LOK*, εξάρτημα 2 θύρων σχήματος «Y» με συνδέσμους ENFit* και σφιγκτήρα - Δεν παρασκευάζεται με φυσικό ελαστικό λάτεξ. - Το προϊόν ΔΕΝ κατασκευάζεται με χρήση φθαλκίου ολατών (DEHP) ως πλαστικοποιητή. - Rx Only: Μόνο με συνταγή ιατρού: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (HFA) περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού. - Για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. - **⚠ Προειδοποίηση: Αποκλειστικά για εντερική σίτιση και/ή χορήγηση φαρμάκων (Rx).** - Τα Σετ προέκτασης MIC-KEY* με συνδέσμους ENFit* προορίζονται για σύνδεση με τον Σωλήνα σίτισης μέσω gastrostομίας χαμηλού προφίλ MIC-KEY*, τις Σφίγγες εντερικής σίτισης με συνδέσμους ENFit*, και τους Αερίους χορήγησης σίτισης με συνδέσμους ENFit*.
- IT** Set di estensione per alimentazione continua MIC-KEY* con connettori ENFit*, connettore ad angolo retto SECUR-LOK* e connettori ENFit* con raccordo a "Y" a 2 porte e morsetto - Non fabbricato in lattice di gomma naturale. - Questo prodotto non è realizzato con DEHP come plastificante. - Rx Only: Solo dietro prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici e dietro prescrizione di un medico. - Da usarsi esclusivamente su un singolo paziente. - **⚠ Avvertenza - Esclusivamente per la somministrazione di nutrizione e/o farmaci per via enterale (Rx).** - I set di estensione MIC-KEY* con connettori ENFit* si collegano al tubo MIC-KEY* a basso profilo per alimentazione tramite gastrostomia, alle siringhe per nutrizione enterale con connettori ENFit* e alle sacche di alimentazione con connettori ENFit*.
- LV** MIC-KEY* ilgstošas barošanas pagarinājuma komplekts ar ENFit* savienotājiem, SECUR-LOK* taisnleņķa savienotāju un 2 portu "Y" ENFit* skavu - Nav izgatavots no dabīgās gummijas lateksa. - Izstrādājums nav izgatavots ar DEHP kā plastifikatoru. - Rx Only: Tikai ar ārsta recepti: ASV federālās likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. - Lietot tikai vienam pacientam. - **⚠ Brīdinājums: Tikai enterālai barošanai un/vai receptu zāļu ievadei (Rx).** - MIC-KEY* pagarinājuma komplekti ar ENFit* savienotājiem ir paredzēti savienojumam ar MIC-KEY* kompakto gastrostomijas barošanas zondi, enterālās barošanas šļircēm ar ENFit* savienotājiem, un barošanas maisījumiem ar ENFit* savienotājiem.
- LT** MIC-KEY* ilginamasis pastovaus maitinimo priedas su ENFit* jungtimis, stačiakampe SECUR-LOK* jungtimi, ENFit* dviskakiu Y adapteriu ir spausťuku - Pagaminta be natūraliojo kaučiuko latekso. - Gaminyis pagamintas nenaudojant plastiklio DEHP. - Rx Only: Receptinis prietaisas – federaliniai (JAV) įstatymai numato, kad šį įtaisą galima panaudoti tik gydymojiui arba juo nurodymu. - Naudoiti tik vienam ligoniui. - **⚠ Įspėjimas! Tik enterinei mitybai ir (ar) vaistams (Rx).** - MIC-KEY* ilginamieji priedai su ENFit* jungtimis yra skirti prijungti prie MIC-KEY* kompaktiškų gastrostominio maitinimo zondų, enterinio maitinimo švirkštų su ENFit* jungtimis ir lašinio maitinimo maišų su ENFit* jungtimis.
- HU** MIC-KEY* folyamatos adagolóhószabzbitó-készlet ENFit* csatlakozóval, SECUR-LOK* jobb bokacsatlakozóval, valamint 2 portos „Y” ENFit* csatlakozóval és szorítóval - Nem tartalmazás latexgumiból készült. - A termék nem tartalmaz DEHP (di-(2-ethylhexil)-ftalát) lágyítószert. - Rx Only: Kizárólag orvosi rendelvényre: Ez (Amerikai Egyesült Államok) szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető. - Egyszer használatos. - **⚠ Figyelem: Csak belső táplálásra és/vagy gyógyászteradagolásra (Rx).** - Az ENFit* csatlakozóval ellátott MIC-KEY* hószabzbitó-készlet csatlakozható a MIC-KEY* alacsony profílu gastrostómiai adagolószondához, az enterális tápláláshoz használt, ENFit* csatlakozóval ellátott feskendőhöz és az ENFit* csatlakozóval ellátott adagolószákhoz.
- NL** MIC-KEY* verlengset voor continuvoeding met ENFit*-verbindingstukken, SECUR-LOK* haaks verbindingstuk en ENFit*-verbindingstukken met 2-poorts Y-stuk en klem - Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. - Het product is niet vervaardigd met DEHP als weekmaker. - Rx Only: Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar: Volgens de federale wetgeving (van de Verenigde Staten) mag dit medische hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. - Uitsluitend voor gebruik bij een enkele patiënt. - **⚠ Waarschuwing: uitsluitend voor enterale voeding en/of medicatie (Rx).** - De MIC-KEY*-verlengsets met ENFit*-verbindingstukken dienen aangesloten te worden op de MIC-KEY*-voedingssonde met laag profiel voor gastrostomie, enterale voedingspuiten met ENFit*-verbindingstukken en toedieningszakken van de voedingsoplossing met ENFit*-verbindingstukken.
- NO** MIC-KEY* kontinuerlig mateutvidelsessett med ENFit* koblinger, SECUR-LOK* rettvinglet kobling og 2-port Port "Y" ENFit* koblinger og klemme - Ikke laget med naturgummilætek. - Produktet er ikke produsert med DEHP som plastiseringsmiddel. - Rx Only: Fås kun på resept: Amerikansk føderal lov begrenser dette apparatet til salg til eller på ordre fra lege. - Kun for engangsbruk. - **⚠ Advarsel: Kun for enteral næring og medisiner (Rx).** - MIC-KEY* utvidelsessett med ENFit* koblinger er beregnet for å kobles til MIC-KEY* lavprofil materer, enterale matesprøyter med ENFit* koblinger og næringsadministreringsposer med ENFit* koblinger.
- PL** Zestaw przedłużający MIC-KEY* do żywienia ciągłego ze złączem ENFit*, złączem SECUR-LOK* pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit* oraz zaciskiem - Wyprodukowano bez lateksu naturalnego. - Produkt nie jest wytwarzany z użyciem DEHP jako środka uplastyczniającego. - Rx Only: Wyłącznie na receptę: Zgodnie z prawem federalnym (w USA) urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie. - Do użytku tylko u jednego pacjenta. - **⚠ Ostrzeżenie: Wyłącznie do żywienia dojelitowego oraz/lub podawania leków (Rx).** - Zestawy przedłużające MIC-KEY* ze złączami ENFit* przeznaczone są do niskoprofilowych zgłębników gastrostomijnych MIC-KEY*, strzykawek do żywienia dojelitowego z złączami ENFit* i worków wypełnionych preparatem żywieniowym ze złączem ENFit*.

- PT** Conjunto de extensão para alimentação contínua MIC-KEY* com conectores ENFit*, conector em ângulo recto SECUR-LOK* e 2 conectores ENFit* com dois orifícios em "Y" e pinça - Não são feitas com látex de borracha natural. - Este produto não é fabricado com di-ethylhexil ftalato (DEHP) como plastificante. - Rx Only: Apenas sob receita médica: A lei federal (E.U.A.) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico. - Apenas para utilização única. - **⚠ Advertência: para alimentação e/ou administração de medicamentos (Rx) apenas por via entérica.** - Os conjuntos de extensão MIC-KEY* com conectores ENFit* destinam-se a ligar ao tubo para alimentação/gastrostomia pouco visível MIC-KEY*, às seringas para alimentação por via entérica com conectores ENFit* e aos sacos para administração de alimentos com conectores ENFit*.
- RO** Set prelungitor MIC-KEY* pentru alimentare continuă, cu conectori ENFit*, conector în unghi drept SECUR-LOK* și adaptor în Y cu 2 porturi ENFit* și demă - Nu este produs din latex din cauciuc natural. - Acest produs nu conține DEHP ca plastifiant. - Rx Only: Doar Rx: Conform legii federale S.U.A., acest dispozitiv poate fi vândut numai de către un medic sau la ordinaie acestuia. - A se utiliza numai la un singur pacient. - **⚠ Avertizare: Numai pentru alimentare și/sau medicație enterică (Rx).** - Seturile prelungitoare MIC-KEY* cu conectori ENFit* sunt destinate conectării la tubul simplu de alimentare gastrostomică MIC-KEY*, seringile de alimentare enterală cu conectori ENFit* și pungile de alimentare cu conectori ENFit*.
- RU** Удлинительный набор для непрерывного ввода питания MIC-KEY* с резьбами ENFit*, прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и 2 "Y"-образными каналами ENFit* и зажимом - При изготовлении не использовался натуральный латекс. - Изделие не содержит диэтилгексилфталата (DEHP) в качестве пластификатора. - Rx Only: Отпускается только по предписанию врача. Согласно федеральному законодательству США, данное устройство подлежит продаже только врачам или по их заказу. - Предназначено для использования только у одного пациента. - **⚠ Предостережения: Предназначено только для введения составов для парентерального питания и лекарственных средств (Rx).** - Удлинительные наборы MIC-KEY* с резьбами ENFit* предназначены для соединения с низкопрофильной гастростомической питательной трубкой MIC-KEY*, шприцами для парентерального питания с резьбами ENFit*, а также с пакетами для ввода питания с резьбами ENFit*.
- SK** Predlžovacia súprava MIC-KEY* na nepretržité podávanie výživy s konektormi ENFit*, pravouhlým konektorom SECUR-LOK* a 2 otvormi tvaru „Y” na konektory a svorku - Vyrobené bez prírodného gumového latexu. - Produkt nie je vyrobený s DEHP ako plastifikátorom. - Rx Only: Len na predpis: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto nástroja na lekárov alebo na jeho predpis. - Len na použitie u jediného pacienta. - **⚠ Varovanie: Len pre enterálnu výživu a/alebo lieky (Rx).** - Predlžovacia súprava MIC-KEY* s konektormi ENFit* sú určené na spojenie s nízkoprofilovou gastrostómičnou výživovou trubicou MIC-KEY*, enterálnymi výživovými striekačkami s konektormi ENFit* a vrecami na podávanie výživy s konektormi ENFit*.
- SL** MIC-KEY* podaljšek za neprekinjeno hranjenje z ENFit* konektorji, s SECUR-LOK* pravokotnim konektorjem in konektorji z dvema priključkoma „Y” ENFit* sponkami - Ni narejeno iz kavčuka iz naravnega lateksa. - Izdelku ni dodan DEHP za mehčalec. - Rx Only: Samo na recept: Zvezni (ZDA) zakon predpisuje, da sme ta pripomoček prodati samo zdravnik oz. se ga lahko prodaja samo po naročilu zdravnika. - Za uporabo na samo enem bolniku. - **⚠ Opozorilo: Samo za enteralno hranjenje in/ali dajanje zdravil (Rx).** - MIC-KEY* podaljški z ENFit* konektorji so namenjeni povezavi z MIC-KEY* gastrostomsko cevko za hranjenje z nizkim profilom, enteralnimi brizgalkami za hranjenje z ENFit* konektorji in vrečkami za dovajanje hrane z ENFit* konektorji.
- FI** Jatkuvaan ruokinnan MIC-KEY*-jatkosarja, jossa on ENFit*-liittimet, SECUR-LOK*-suorakulmailiitin ja 2-porttinen ENFit*-Y-liitin ja puristin - Ei valmistettu luonnonkumilätekisistä. - Tuotetta ei ole valmistettu käyttämällä DEHP:tä pehmittimenä. - Rx Only: Ainoastaan reseptillä: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärintoimesta tai määrääkästä. - Potilasohjainten. - **⚠ Varoitus: Vain enteraalista ruokintaa tai lääkitystä (Rx) varten.** - MIC-KEY*-jatkosarjat, joissa on ENFit*-liittimet, on tarkoitettu liitettäväksi suoraaviin: matalaprofiilinen MIC-KEY*-maha-vännenruokintaletkille, enteraaliset ruokintaruokut, joissa on ENFit*-liittimet, ja ruokintapussit, joissa on ENFit*-liittimet.
- SV** MIC-KEY* förlängningsset för kontinuerlig matning, med ENFit*-kopplingar, SECUR-LOK* rättvinkelpkoppling och Y-port med 2 ENFit*-kopplingar samt klämma - Ej tillverkad med naturgummilætek. - Denna produkt är INTE tillverkad med DEHP som plastmjukgörare. - Rx Only: Endast på förskrivning av läkare: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. - Endast för användning till en patient. - **⚠ Varning! Endast för enteral näringstillförel och/eller (Rx) medicinerin.** - MIC-KEY* förlängningsset med ENFit*-kopplingar är avsedda att anslutas till MIC-KEY* gastrostomisond i lågprofil, sondsprutor för enteral näringstillförel med ENFit*-kopplingar, samt sondmatningspåsar med ENFit*-kopplingar.
- TR** MIC-KEY* ENFit* Konektörli Sürekli Besleme Uzmanla Seti, SECUR-LOK* Dik Açılı Konektör ve 2 Port "Y" ENFit* Konektör ve Kelepe - Doğal kauçuk lateksen yapılmamıştır. - Bu ürün plastikleştirici olarak DEHP kullanılarak üretilmemiştir. - Rx Only: Yalnızca Reçete ile: Federal (A.B.D) kanunları bu cihazın bizzat hekim tarafından veya hekim talimatı üzerine satışını yasaklamaktadır. - Sadece Tek Hastalık Kullanım İçindir. - **⚠ Uyarı: Sadece enteral besleme ve/veya ilaç (Rx) için.** (Rx) için. ENFit* Konektörli Uzmanla setleri MIC-KEY* ENFit* Konektörli Düşük Profil Gastrostomi Besleme Borusu, Enteral Besleme Şırıngaları ve ENFit* Konektörli Besleme Uygulama Çantaları ile bağlanmış üzere tasarlanmıştır.
- JA** MIC-KEY*連続栄養補給エクステンションセット (ENFit*コネクター、SECUR-LOK*直角コネクター、2ポートY ENFit*コネクターとクランプ付き) - 天然ゴムラテックス製ではありません。 - 製品の可塑剤にDEHPを使用していません。 - Rx Only: 処方による使用のみ(米国) 米国連邦法では、本装置の販売先は医師自身あるいは医師の指示を受けた者に限られています。 - 再使用禁止。 - 再使用禁止。 - **⚠ 警告: 経腸栄養剤/薬剤専用 (Rx).** - MIC-KEY*エクステンションセット (ENFit*コネクター付き)は、MIC-KEY*ロープロファイル胃瘻栄養補給チューブ、経腸栄養補給シリンジ (ENFit*コネクター付き)、栄養補給投与バッグ (ENFit*コネクター付き)と接続するために使用されます。
- KO** MIC-KEY* 연속 급식 연장 세트, ENFit* 커넥터, SECUR-LOK* 직각 커넥터, 2개 Port "Y" ENFit* 커넥터 및 클램프 포함 - 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음. - 가스제로서 DEHP로 제품을 제조하지 않았습니다. - Rx Only: 처방 전용: 미국 연방법에 따라 이 장치는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라 판매할 수 있습니다. - 한 명의 환자에게만 사용하십시오. - **⚠ 경고: 경장 영양 및/또는 의료용 (Rx)에 한함.** - ENFit* 커넥터가 포함된 MIC-KEY* 연장 세트는 MIC-KEY* 소형 위루 급식 튜브, ENFit* 커넥터가 포함된 경장 급식 튜브, ENFit* 커넥터가 포함된 급식 투여 백에 연결하기 위한 제품입니다.