

90.1118/6 (April 2021)

(EN)

TR201 DESCRIPTION OF DEVICE & CONTENTS

Trio Elite® Sting free medical adhesive remover spray (50ml)

INTENDED USE:

Removal of adhesives, dressings and appliances from skin.

INSTRUCTION FOR USE:

1. Spray around the edge of the adhesive and wait a few seconds.
2. Gently peel adhesive away from the skin using additional spray to ease removal if necessary.

INFORMATION:

Dries in a few seconds.
Sprays at any angle.

CAUTION:

- Avoid direct use on wound beds.
- If in doubt, patch test a small area prior to use.
- Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
- Avoid inhalation.
- For external use only.

WARNINGS:

Use only as directed. Pressurised container: may burst if heated.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children.

EXTREMELY FLAMMABLE

SERIOUS INCIDENT REPORTING
Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

SAFE DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose in the toilet. Dispose of product according to national or local laws

(IT)

TR201 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E CONTENUTI

Trio Elite® Spray non irritante per il retrait d'adhésifs médicaux (50 ml)

USAGE PRÉVU :

Retrait des adhésifs, pansements et appareillages de la peau.

MODE D'EMPLOI :

1. Vaporiser la solution autour du bord de l'adhésif et patienter quelques secondes.
2. Retirer doucement l'adhésif de la peau. Pour faciliter le retrait, effectuer de nouvelles vaporisations si nécessaire.

INFORMATIONS :

Seche en quelques secondes.
Vaporise sous n'importe quel angle.

ATTENTION :

- Ne pas appliquer directement sur le lit de la plaie.
- En cas de doute, effectuer un test cutané sur une petite surface de la peau avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cessez toute utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Ne pas inhaler.
- Pour usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS :

Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi. Réceptif sous pression peut exposer en cas d'exposition à la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après utilisation. Tenir à l'écart de la lumière du soleil.

Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Tenir hors de la portée des enfants.

EXTREMEMENT INFLAMMABLE

SIGMALEMENT D'INCIDENT GRAVE

La survenance de tout incident grave lié à l'appareil doit être signalée au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INSTRUCTIONS POUR ÉLIMINER LE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne jetez pas le produit dans les toilettes. Éliminez-le selon les règles nationales ou locales.

(DE)

TR201 ARTIKELBESCHREIBUNG UND INHALT

Trio Elite® Reifreies Spray zum Entfernen von medizinischen Klebstoffen von Stomaversorgungen oder Wundverbänden (50 ml)

VERWENDUNGSZWECK:

Leichteres Entfernen der Kleberreste von Verbänden oder anderen Halbmaterien auf gesunder Haut.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Das Spray um die zu lösende Versorgung aufsprühen und trocknen in wenigen Sekunden, daher keine Beeinträchtigung der Hautkraft der neuen Versorgung.
2. Vorsicht: vorsichtig von der Haut abziehen, evtl. Vorgang wiederholen.

PRODUKTINFORMATION:

Trocknet in wenigen Sekunden, daher keine Beeinträchtigung der Hautkraft der neuen Versorgung.
Lässt sich aus jedem Winkel aufsprühen.

VORSICHT:

- Nur zur äußerlichen Anwendung. Kontakt mit Wunden vermeiden, sowie mit Augen und Schleimhäuten.
- Bei Hautirritationen die Anwendung abbrechen und medizinisches Fachpersonal absprechen.
- In Zweifelsfällen vor der Anwendung an kleinen Hautbereich testen.

ACHTUNG:

Nur nach Vorschrift verwenden. Hochentzündlich. Bei kalter Luft unter Druck kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C Grad schützen. Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HOCHENTZÜNDLICH

MELDUNG SCHWERER STÖRUNGEN

Im Falle einer schweren Störung, die im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, sollte diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG

Nicht in der Toilette entsorgen. Entsorgung des Produktes (gemäß nationaler oder lokaler Gesetze)

(FR)

TR201 DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET CONTENU

Trio Elite® Spray sans irritation pour le retrait d'adhésifs médicaux (50 ml)

USAGE PRÉVU :

Retrait des adhésifs, pansements et appareillages de la peau.

MODE D'EMPLOI :

1. Vaporiser la solution autour du bord de l'adhésif et patienter quelques secondes.
2. Retirer doucement l'adhésif de la peau. Pour faciliter le retrait, effectuer de nouvelles vaporisations si nécessaire.

INFORMATIONS :

Seche en quelques secondes.
Vaporise sous n'importe quel angle.

ATTENTION :

- Ne pas appliquer directement sur le lit de la plaie.
- En cas de doute, effectuer un test cutané sur une petite surface de la peau avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cessez toute utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Ne pas inhaler.
- Pour usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS :

Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi. Réceptif sous pression peut exposer en cas d'exposition à la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après utilisation. Tenir à l'écart de la lumière du soleil.


EXTREMEMENT INFLAMMABLE

SIGMALEMENT D'INCIDENT GRAVE

La survenance de tout incident grave lié à l'appareil doit être signalée au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INSTRUCTIONS POUR ÉLIMINER LE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne jetez pas le produit dans les toilettes. Éliminez-le selon les règles nationales ou locales.

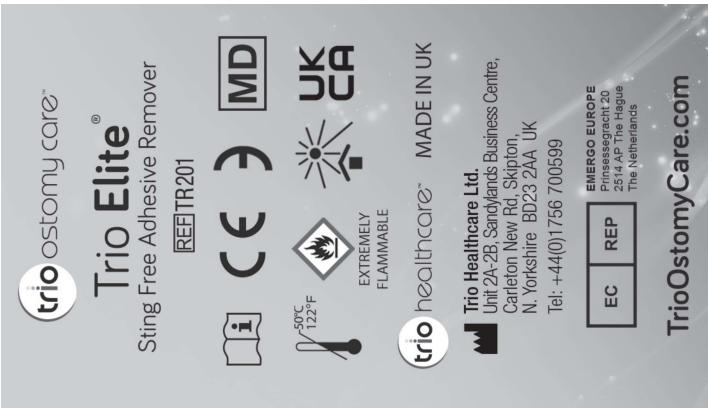

(IT)

TR201 DESCRIZIONE DISPOSITIVO E CONTENUTI

Trio Elite® Spray per la rimozione indolore di cerotti ad uso medico (50ml)

DESTINAZIONE D'USO:

Rimozione di cerotti, medicazioni e apparecchiature dalla cute.

ISTRUZIONI D'USO:

1. Spruzzare lungo il bordo del cerotto e attendere alcuni secondi.
2. Rimuovere delicatamente il cerotto dalla cute e, se necessario, spruzzare nuovamente del prodotto per semplificare l'operazione.

INFORMAZIONI:

Asciuga in pochi secondi.
Getto omnidirezionale.

ATTENZIONE:

- Evitare l'uso diretto sul sito della ferita.
- In caso di dubbi, effettuare un test su una porzione tissutale ristretta prima dell'uso.
- In caso di irritazione cutanea, sospendere l'uso e consultare un medico.
- Evitare l'inhalazione del prodotto.
- Solo per uso esterno.

AVVERTENZE:

Utilizzare soltanto secondo le istruzioni fornite. Recipiente sotto pressione: rischio di esplosione se surriscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di ignizione. Non fumare. Non permettere né bruciare, né essere dopo l'uso. Proteggere dagli raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ESTREMAMENTE INFLAMMABILE

SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI SERI

Qualsiasi evento serio che si sia verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO

Non gettare nel water. Smaltire il prodotto conformemente alle norme nazionali e locali

(NL)

TR201 PRODUCTBESCHRIJVING & INHOUD

Trio Elite® Niet prikkelende spray voor het verwijderen van medische kleefmiddelen (50ml)

BEDOEG GEBRUIK:

Kleefmiddelen, stoma-opvangmateriaal en afwende wondverbanden van de huid verwijderen.

GEBRUIKSaanwijzing:

1. Spuit de druppel op het stoma-opvangmateriaal of wondverband.
2. Spuit recht een aantal seconden toe de druppel droogt.

Isaai het materiaal verwijding los van de huid.

INFORMATIE:

Droogt in een aantal seconden.

Spuut vanuit elke hoek, ook ondersteboven.

LET OP:

- Gebruik niet rechtstreeks op het wondbed.
- Test eerst een klein gebied in geval van twijfel.
- Als huidirritatie optreedt, stop het gebruik en raadpleeg een medisch professional.
- Niet inademen.
- Alleen geschikt voor uiterlijk gebruik.

WAARSCHUWINGEN:

Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Spuitbus onder druk kan barsten bij verhitting. Bewaar uit de buurt van hitte.

hete oppervlakken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet dooroeren of verbanden, zelfs niet na gebruik. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

EXTREEM ONTVLAMBAAAR

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patient gewoont is.

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE VERWUJDERING

Niet in het toilet gooien. Verwijder het product volgens de nationale of plaatselijke wetgeving.

(EN)

TR201 URUNTAMIME (ÇERİDİ)

Trio Elite® "Yakmayan medikal yapışkan çıkartıcı spray (50ml)

KULLANIM AMACI:

Yapışkanları, pansumanların ve gereçlerin ciltten çıkartılması.

KULLANIM TALİMLERİ:

1. "Yapışkanlı ürünün kenarının çevresine piskürünüz ve birkaç saniye bekleyiniz.
2. "Yapışkan gereçlerinizi kolay çıkartılması için ilave spray kullanarak hafifçe ayırarak ciltten sökünüz.

BİLGİ:

Birkaç saniye içerisinde kurur.

Her açıdan puskürtme yapabilmektedir.

DIKKAT:

- Yara yatağına doğrudan uygulamayınız.
- Süphenez varsa, kullanımdan önce küçük bir alanda ürünü test ediniz.
- Ciltte hassasiyet oluşmasa dırundunda, kullanımda son vemiş ve sağlık çalıřabınma dıngınız.
- Doğrudan solunumayınız.
- Yalnızca harici kullanımı çındır.

UYARLAR:

Yalnızca talimatlarına uygun biçimde kullanınız. İlammas halinde basınçlı kutu patlayabilir. İla, sıcak yüzeyler, kavlom ve ağık alek ile diğer ateşleme kaynağından uzak tutunuz. Sıgara içmeyiniz. Kullanım sonrasında dahi dđmeyiniz veya yakmayınız. Güneş ışığından koruyunuz. 50 °C' y aşan ılılara mauz brakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

SON DEFECE YANCIDIR

İçerik: Siloxanes

SV**BESEKRIVNING AV PRODUKT OCH INNEHÅLL**

Trio Elite® spray 50 ml – smärtfri hållortning, silikon (silbana)

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Arlagsande av bandage, förband och hållamnen från hud.

ANVÄNDNINGSGRÄNSNINGAR:

1. Spraya mellan hud och bandage/förband och vänta några sekunder.
2. Ta försiktigt bort bandage/förbandet från huden, applicera mer spray om nödvändigt.

INFORMATION:

Tvätta på några sekunder.
Spraya från vilken vinkel som helst.

Ö OBSERVERA:

- Undvik direkt användning på övrigt.
- Om du är osäker, testa på ett litet område före användning.
- Om du använder uppomman, ställ använd och konsultera sjukvårdspersonal.
- Undvik tvättning.
- Endast för utvärtes bruk.

VARNING:

Använd bara enligt anvisningar. Beklädnade under tryck, kan upplösa sig upprepning. Förvara skyddat från värme, fukt, ytor, gnister, öppen eld och andra antändningskällor. Förhindra inlättelse av beläggning förbruden, för inlättelse i beläggning och eld. Om du upptäcker en eller flera av varningarna, Skydda mot solfukt. Utsätt inte för temperaturer som överstiger 50°C. Förvaras tätloppet för barn.

EXTREMT BRANDFÄRLIG**RAPPORTERING AV ALLVARIGA TILLBUD**

Alla allvariga tillbud som tillfaller i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

ANVISNINGAR FÖR SÄKER KASSERING

Kasta inte i toaletten. Kassera produkten i enlighet med nationella eller lokala lagar.

CZ**POPIS PŘÍPRAVKU A OBSAHU**

Trio Elite® Nezářijící odtěratelná zdravotních adheziv v spreji (50 ml)

ÚČEL POUŽITÍ:

Odstřanění neřijící, kyvná i přilnavých zdravotních pomůcek z pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Použijte pouze na kůli, kde je adheziv a vyčkejte několik vteřin.
2. Jemně skrupte adhezivum z pokožky. Znovu použijte, pokud je třeba opřadit odstřanění.

INFORMACE:

Zašne během několika vteřin.
Sprej stříká v jakémkoli úhlu.

VAROVÁNÍ:

- Vyměte se přímému kontaktu přípravku se spodními orgány.
- Pokud si neje jistě reakci, otestujte přípravek před použitím na malém kusu pokožky.
- Při podráždění pokožky přenechte používání přípravku a poradte se s lékařem.
- Nevyčulujte.
- Pouze k vnějším použití.

UPozORNĚNÍ:

Používejte pouze v souladu s návodem. Nádobka poot tlakem při zahřátí může dojít k výbuchu. Zaměřte kontakt s zářím, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými ohněm a dalšími zdrojmi vznícení. Neřijte. Prázdnou nádobu nepožijte a nevhazte do ohně. Chraňte před sluncem. Nevytvářejte teplotu nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EXTREMNĚ HORLIVĚ**OZNAMENÍ ZVÁZNĚ NEZÁDOUCÍ PŘÍRODY**

Každý závažný incident, ku kterému došlo v souvislosti s daným prostředkem, by měl být hlášen výrobu a příslušnému orgánu členského státu, v němž je výrobce či jeho po pacient ncazen

POKYNY PRO BEZPEČNOU LKVIDACI

Neplánujte ho zřadit. Výrobek likvidujte v souladu s národními nebo místními zákony.

IND**BESKRIVELSE AV ENHETEN OG INNHOLDET**

Trio Elite® smertefri spray for fjerning af medicinsk lim (50ml)

BRUKSOMRÅDE:

Til fjerning af klæbemiddel, stompose, og bandesjter fra huden.

BRUGSANVISNING:

1. Spray rundt kanten af bandages/plåte og vent noen sekunder.
2. Trekk bandasen/platen forsiktig av huden. Påler mer spray hvis det er nødvendig for å gjøre det enda å fjerne klæbemiddelet.

INFORMASJON:

Tvätt på noen sekunder.
Kan sprøytes fra alle vinkler.

FORSIKTIG:

- Unngå direkte bruk på øye.
- Er du i tvil, kan du teste på et lite område før bruk.
- Skulle hudirritasjon oppstå, slutt å bruke og ta kontakt med helsepersonell.
- Unngå inhalering.
- Kun til utværes bruk.

ADVARSEL:

Stel kun brukes i henhold til anvisningene. Trykbeholdere kan eksplodere ved oppheving. Stel holdes unna varmekilder, varme overflater, gnister, ild og andre antenningskilder. Forhind forbudt. Unngå å sitte på eller brenne boksen, selv etter bruk. Stel beskyttes mot sollys. Unngå å utsette for temperaturer over 50°C. Oppbevares ilttettgjenglig for barn.

EXTREMT BRANDFÆRLIG**RAPPORTERING AV ALLVORLIG HENDELSE**

Enhver alvorlig hendelse som har lmet sted i forbindelse med apparatet skal rapporteres til produsenten og kompetente myndigheter i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

INSTRUKSJONER FOR SÆKER AVHENDING

Stel ikke kastes i toalettet. Produktet skal anbrendes i henhold til national eller lokal lovgivning

SK**POPIS VÝROBKU A OBSAHU**

Trio Elite® Nezářijící odtěratelná zdravotních adheziv v spreji (50 ml)

ÚČEL POUŽITÍ:

Odstřanění nářijící, kyvná i přilnavých zdravotních pomůcek z pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Použijte pouze na kůli, kde je adheziv a počkejte několik sekund.
2. Jemně skrupte adhezivum z pokožky. Znovu použijte, pokud je třeba opřadit odstřanění.

INFORMACE:

Zašne přes několikých sekund.
Sprej stříká v kterémkoli úhlu.

VAROVÁNÍ:

- Vyměte si přímému kontaktu přípra ku so spodními orgány.
- Pokud si ne je stě reakci, otestujte přípravek před použitím na malém kusu pokožky.
- Při podráždění pokožky přenechte používání přípravku a poradte se s lékařem.
- Nevyčulujte.
- Iba na vonějšie použitie.

UPozORNENIE:

Používalie iba v súlade s návodom. Nádobka poot tlakem při zahřátí může dojít k výbuchu. Zaměřte kontakt s zářím, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými ohněm a dalšími zdrojmi vznícení. Neřijte. Prázdnou nádobu nepožijte a nevhazte do ohně. Chraňte před sluncem. Nevytvářejte teplotu nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EXTREMNĚ HORLIVĚ**OZNAOVANIE ZVÁZNĚNÝCH INCIDENTOV**

Každý závažný incident, ku kterému došlo v souvislosti s týmto zařaditím, je potřebov oznámit výrobce a kompetentnímu úřadu členského státu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

POKYNY PRO BEZPEČNOU LKVIDACI

Neplánujte ho zřadit. Výrobek likvidujte v souladu s národními nebo místními zákony.

DK**BESKRIVELSE AF PRODUKT OG INDHOLD**

Trio Elite® Medicinsk klæbemiddel spray (50 ml). (No sting)

TILSIGTET ANVENDELSE:

Fjernelse af klæbemide bandager og klæbenesjter, forbrindinger og stomposer fra huden.

BRUGSANVISNING:

1. Spray omkring kanten af bandagen, og vent nogle få sekunder.
2. Fjern forsigtigt bandagen fra huden. Brug om nødvendigt yderligere spray for at lette fjernelse.

INFORMATION:

Tvätt på få sekunder.

Kan sprøytes fra alle vinkler.

FORSIKTIG:

- Unngå å amende direkte på øye.
- Er du i tvil om produktet fies, kan man teste en omvee et annet sted på kroppen.
- Hus hudirritasjon skulle oppstå, slutt du stoppe å anvendelses.
- og kontakt din læge.
- Unngå å inhalere.
- Kun til utværes bruk.

ADVARSLER:

Brug kun som anviset. Trykbeholdere kan eksplodere ved opvarmning. Holdes væk fra høj varme, varme overflader, gnister, åben ild eller andre tændkilder. Rykning forbudt. Må ikke påføres eller brændes eller brug. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Opbevares ilttettgjenglig for børn.

YDERST BRANDFÆRLIG**RAPPORTERING AF ALLVORLIGE HENDELSER**

Enhver alvorlig hændelse, der har lmet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

INSTRUKTIONER TIL SIKKER BORTSKAFFELSE

Må ikke bortskaffes i toalettet. Bortskaf produktet i henhold til national eller lokal lovgivning

PL**DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E CONTEUDO**

Trio Elite® Spray para remoção, indolor, de adesivos médicos (50 ml)

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

Remoção de adesivos, pensos e dispositivos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Pulverize em redor do rebordo do adesivo e aguarde alguns segundos.
2. Retire suavemente o adesivo da pele, utilizando mais spray para facilitar a remoção, se necessário.

INFORMAÇÕES:

Seca em poucos segundos.
Pulveriza-se de qualquer ângulo.

ATENÇÃO:

- Evitar o uso direto sobre escaras.
- Em caso de dúvida, efetuar um teste cutâneo, numa área pequena, antes de utilizar.
- Se ocorrer irritação da pele, interromper a utilização e consultar um profissional de saúde.
- Evitar a inalação.
- Apenas para uso externo.

AVISOS:

Usar apenas como indicado. Recipiente pressurizado; pode explodir se aquecido. Manter afastado do calor, superfícies quentes, lâmpas, chamas descobertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não fumar nem queimar mesmo após a utilização. Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Manter fora do alcance das crianças.

EXTREMAMENTE INFLAMMÁVEL**COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES Graves**

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à entidade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido.

INSTRUÇÕES PARA UMA ELIMINAÇÃO SEGURA

Não eliminar o produto na sanita. Elimine o produto de acordo com as leis locais ou nacionais.

PL**BESEKRIVNING AF PRODUKT OG INDHOLD**

Trio Elite® Medicinsk klæbemiddel spray (50 ml). (No sting)

PRÆZISERINGS:

Do usunania ze skóry czestki kleju.

INSTRUKCJA UŻYTKA:

1. Spryskaj krawędzie przylepy i odczekaj kilka sekund.
2. Delikatnie odłóż od skóry, zwiększając w razie potrzeby ilość sprysku, aby ułatwić usunięcie.

INFORMACJA:

Schnie w kilka sekund.
Spryskuj pod dowolnym kątem.

UWAGA:

- Unikaj stosowania bezpośrednio na ranę.
- W razie wątpliwości należy przetestować próbek na niewielkiej powierzchni skóry.
- W przypadku podrażnienia skóry należy przestawić stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Unikaj wdychania.
- Wykazać do użytku zewnętrzny.

OSTRZEŻENIE:

Stosować ściśle według zaleceń. Niemniej pod ciśnieniem nagrzane gaza wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. Nie palić w otoczeniu produktu. Nie przekłuwać ani nie spalić, nawet po użyciu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRODUKT SKRABINE LATOPALNY**ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW**

Każdy poważny incydent, który wydarzył w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego na którego terenie jest użytkownik, lub za pośrednictwem.

INSTRUKCJA BEZPECZNEJ UTYLIZACJI

Nie wyrzucać do toalety. Produkt należy utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami

JP**製品説明**

Trio Elite® 低刺激性接着剤リムーバー（スプレー）（50 ml）

使用目的:

粘着剤、包帯、および器具の皮膚からの除去。

取扱説明:

1. 粘着剤の周囲にスプレーし、2〜3秒お待ちください。
2. 必要に応じて、除去しやすくするために追加のスプレーをし、皮膚から粘着剤をそっと剥がしてください。

製品情報:

2〜3秒で乾きます。
あらゆる角度でスプレーできます。

注意:

- 創傷に直接スプレーしないでください。
- 安全性に疑問がある場合は、使用前に小さな部分でパッチテストを行ってください。
- 皮膚が赤くなった場合は使用を中止し、医療従事者にご相談ください。
- 健康な皮膚のみ使用ください。

警告:

指示された用法のみ使用してください。加圧容器。加熱すると破裂することがあります。熱、高温、火花、火気、およびその他の発火源から遠ざけてください。禁煙。使用後も、穴を閉じた状態にしておいてください。直射日光を避けてください。50°Cを超えない温度にさらさないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。

可燃性、気酸蒸気**重大インシデント報告**

デバイスに関連して発生した重大なインシデントは、ユーザーおよび/または患者が存在する加盟国の製造業者および主管当局に報告する必要があります。

安全な廃棄処理に関する指示

トイレに流さないでください。製品は国内法令または地域法に従って廃棄してください。