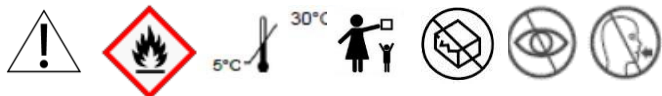


**ZenSetiv Adhesive Remover****REF ZSA2011****EN: PRODUCT DESCRIPTION**

ZenSetiv Adhesive Remover is a specially formulated solution that ensures atraumatic removal of adhesive devices.

Indications:

For the safe and pain free removal of all medical adhesive devices and skin residues including:

- Adhesive tapes
- Wound Dressings
- Stoma Flange
- other Adhesive Products

Adhesive remover is particularly suited for removing difficult residues which build up on the skin over time.

Contraindications:

- ZenSetiv Adhesive Remover should not be used on skin where infection is present.
- Do not use this product if there is a known allergic sensitivity to any of the ingredients.

**Warnings:**

ZenSetiv Adhesive remover in liquid form is flammable; use in a well ventilated area. Do not use around flames and sources of ignition. Keep out of reach of children. Do not use if pack is damaged or open. Avoid contact with eyes. For external use only. Do not swallow.

Directions for Use:**When removing adhesive dressings:**

- Lift up edge of plaster or hydrocolloid and apply ZenSetiv Adhesive Remover under the product while lifting off.
- Peel away the product slowly while continuing to apply more adhesive remover as the product begins to lift.
- After wiping clean the surrounding skin area, a new product can be applied if required.

For removing adhesive residue on the skin:

- Apply adhesive remover to the affected area.
- Allow the solution to rest on the adhesive for 1-2 minutes.
- Gently wipe clean the skin area.
- Re-apply for extremely difficult residues.

Ingredients:

Hexamethyldisiloxane, Octamethyltrisiloxane and Dimethicone

DE: PRODUKT BESCHREIBUNG:

ZenSetiv Pflasterentferner ermöglicht das einfache Entfernen Haft- und Kleberückständen durch seine spezielle Formel.

Anwendungsgebiete:

Für ein sicheres und schmerzfreies Ablösen von allen medizinischen Klebstoffen und Kleberückständen.

- Pflaster
- Wundversorgungen
- Basisplatten
- Andere klebe Produkte

ZenSetiv Pflasterentferner ist besonders geeignet zur Beseitigung von schwer zu entfernenden Kleberückständen von der Haut.

Kontraindikationen:

- ZenSetiv Pflasterentferner nicht verwenden auf wunder Haut
- Nicht verwenden bei Allergien gegenüber den Inhaltsstoffen

**Achtung:**

ZenSetiv Pflasterentferner in Flüssiger Form ist leicht entflammbar. In gut Ventilierten Räumen gebrauchen. Nicht in der Nähe von Flammen und Zündquellen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder geöffnet ist. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Nur für äußere Anwendung. Nicht schlucken.

Anwendung:**Entfernen von Haft- und Klebmaterialien:**

- Den Kleberand leicht anheben und ZenSetiv Adhesive Remover dabei aufsprühen.
- Langsam abpellen und immer wieder aufsprühen.
- Nach dem ablösen die Haut abwischen um die Haut wieder für ein neues Produkt vor zu bereiten.

Entfernen von Kleberesten/Rückständen:

- Pflaster entfernter auf die gewünschte Stelle auftragen
- 1-2 Minuten einwirken lassen
- Vorsichtig die Haut abwischen
- Vorgang bei Bedarf Wiederholen

Inhaltsstoffe:

Hexamethyldisiloxan, Octamethyltrisiloxan und Dimethicone

SV: PRODUKT BESKRIVNING

ZenSetiv häftborttagningsmedel är en speciellt framtagen lösning som säkerställer atraumatisk borttagning av självhäftande produkter.

Indikationer:

För säkert och smärtfritt avlägsnande av alla medicinska produkter med klister och hudrester

Inklusive:

- Tejp
- Sårförband
- Stomiplattor
- andra självhäftande produkter

Häftborttagningsmedel är särskilt lämpad för att avlägsna svåra rester som byggs upp på huden över längre tid.

Kontraindikationer:

- ZenSetiv häftborttagningsmedel bör inte användas infekterad hud.
- Använd inte denna produkt om det finns en känd allergisk känslighet för någon av ingredienserna.

**Varningar:**

ZenSetiv häftborttagningsmedel i flytande form är brandfarligt; använd i ett väl ventilerat utrymme. Använd inte i närheten av eld eller antändningskällor. Förvara utom räckhåll för barn. Använd inte om förpackningen är skadad eller öppen. Undvik ögonkontakt. Enbart för utvärtes användning. Svälj inte.

Bruksanvisning:**När du tar bort stomiplattan:**

- Lyft upp kanten av stomiplattan och applicera ZenSetiv häftborttagningsmedel under plattan samtidigt som den dras bort.
- Dra långsamt bort plattan samtidigt som mer häftborttagningsmedel appliceras så att plattan börjar släppa.
- Efter att omgivande hudområde torkats rent, kan en ny platta användas vid behov.

För borttagning av häftrester från huden:

- Applicera häftborttagningsmedel på det drabbade området.
- Låt lösningen verka på häftrester i 1-2 minuter.
- Torka försiktigt rent hudområdet.
- Applicera igen om det finns extremt svåra rester.

Ingredienser:

Hexametyldisiloxan, oktametyltrisiloxan och dimetikon

NL: GEBRUIKSAANWIJZING:

ZenSetiv Adhesive Remover Spray maakt het mogelijk om stomamateriaal, kleefresten, pleisters en verbandmiddelen makkelijk te verwijderen.

Toepassing:

Snel en pijnvrij verwijderen van alle medische kleefmiddelen en kleefresten.

- Pleister
- Wondverzorging
- Stomamateriaal



- Overige klevende verbandmiddelen

ZenSetiv Adhesive Remover Spray is ideaal te gebruiken om zelfs zeer sterk hechtende kleefresten op een zachte manier van de huid te verwijderen.

Contra-indicaties:

- Remover niet gebruiken op geïrriteerde of beschadigde huid
- Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor de bestanddelen.



Waarschuwing:

De ZenSetiv Adhesive remover is licht ontvlambaar. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is. Niet in de buurt van vuur gebruiken. Mag niet in de handen van kinderen komen. Niet gebruiken als het product beschadigd of geopend is. Niet in contact met de ogen komen. Niet inslikken alleen voor uitwendig gebruik.

Gebruiksaanwijzing:

Verwijderen van huidplaten of wondverbanden:

- Maak een klein begin door het te verwijderen verband op te tillen en breng ZenSetiv Adhesive Remover aan tussen de huid en het te verwijderen verband of kleefstof.
- Verband of kleefstof langzaam afpellen en zo nodig opnieuw Remover aanbrengen.
- Na het verwijderen de huid schoon maken om een nieuw product aan te kunnen brengen.

Verwijderen van Kleefresten:

- Breng de Adhesive Remover aan
- 1-2 minuten laten inwerken.
- Voorzichtig de huid schoon maken
- Indien nodig herhalen

Bestanddelen:

Hexamethyldisiloxane, Octamethyltrisiloxane en Dimethicone

DA: PRODUKTBEKRIVELSE

ZenSetiv klæbefjerne er en special designet opløsning, der sikrer en atraumatisk opløsning af klæbende produkter.

Indikationer:

For sikker og smertefri fjernelse af alle medicinske klæbere samt klæberester inklusiv:

- Klæbende tape
- Sårbandager
- Stomiplader
- Andre produkter med klæb

Klæbefjernere er specielt velegnet til at fjerne vanskelige klæberester der har siddet på huden længe.

Kontraindikationer:

- ZenSetiv Klæbefjernere bør ikke anvendes på hud med en pågående infection.
- Bør ikke anvendes hvis der er allergi over for en eller flere af ingredienserne.



Advarsel:

ZenSetiv klæbefjernere i flydende form er brandbar; bør anvendes i ventilerede rum. Brug ikke klæbefjerneren omkring flammer eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke bruges hvis emballagen er skadet eller åben. Undgå kontakt med øjnene. Kun til ekstern brug. Bør ikke indtages oralt.

Brugsanvisning:

Ved fjernelse af klæbende bandager:

- Løft op i kanten af plastret eller hydrokolloiden, og påfør ZenSetiv klæbefjerne under produktet.
- Fjern langsomt produktet, imens der fortsat applikeres klæbefjernere.
- Efter aftørring af den omkringliggende hud, kan der påsættes et nyt produkt.

Ved fjernelse af klæberester på huden:

- Påfør klæbefjernere på det berørte område
- Lad opløsningen virke 1-2 minutter
- Aftør forsigtigt det berørte område.
- Gentag proceduren, ved vanskelige klæberester.

Ingredienser:

Hexamethyldisiloxan, octamethyltrisiloxan og dimethicon

LV: PRODUKTA APRAKSTS

ZenSetiv limes noņēmējs ir speciāli izstrādāts risinājums, kas nodrošina adhezīvu ierīču netraumatisku noņemšanu.

Indikācijas:

Drošai un nesāpīgai visu medicīnas līpošo ierīču un ādas atlieku noņemšanai, tostarp:

- līmlente,
- brūču parsēji,
- stomas pamatne,
- citi adhezīvie izstrādājumi.

Adhezīvu noņemšanas līdzeklis ir īpaši piemērots, lai noņemtu sarežģītus atlikumus, kas laika gaitā u uz ādas.

Kontraindikācijas:

- ZenSetiv limes noņēmēju nevajadzētu lietot uz ādas vietās kur ir infekcija.
- Nelietojiet šo produktu, ja ir zināma alerģiska jutība pret kādu no tā sastāvdaļām.



Brīdinājumi:

ZenSetiv limes noņēmējs šķidrā veidā ir uzliesmojošs; lietot labi vēdināmā vietā. Nelietot liesmu un aizdegšanās avotu tuvumā. Sargāt no bērniem. Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts. Izvairieties no saskares ar acīm. Tikai ārīgai lietošanai. Nenorīt.

Lietošanas norādījumi:

Noņemot līmējošas virsmas:

- Paceliet plākstera vai hidrokoloida malu un pasmērējiet ZenSetiv limes noņēmēju zem produkta, piepaceļot to.
- Kad produkts sāk piepacelties, lēni noņemiet to, turpinot lietot limes noņēmēju.
- Pēc apkārtējās ādas zonas notīrīšanas, ja vajadzīgs, var uzlikt jaunu produktu.

Limes atlieku noņemšanai no ādas:

- Lietojiet limes noņemšanas līdzekli skartajā ādas zonā.
- Atļaut šķīdumam palikt uz limes atliekām 1-2 minūtes.
- Viegli noslaukiet ādas virsmu.
- Atkārtoti jāpiemēro ļoti grūti notīrāmiem limes atlikumiem.

Sastāvdaļas:

Heksametildisiloksāns, oktametiltrisiloksāns un dimetikon

GR: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

To ZenSetiv Adhesive Remover είναι ένα διάλυμα ειδικής σύνθεσης, κατάλληλο για την atraumatική αφαίρεση των αυτοκόλλητων προϊόντων από το δέρμα.

Ενδείξεις:

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή αφαίρεση των ιατρικών προϊόντων και των υπολειμμάτων τους από το δέρμα, όπως:

- Κολλητικές ταινίες
- Επιθέματα πτηγών
- Βάσεις στομίας
- Άλλα αυτοκόλλητα προϊόντα

Ενδείκνυται επίσης για την απομάκρυνση καταλοίπων που παραμένουν στο δέρμα μετά τη χρήση ιατρικών προϊόντων.

Αντενδείξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε παρουσία μόλυνσης.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής ευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.



Προειδοποιήσεις:

Το διάλυμα είναι εύφλεκτο. Εφαρμόστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγα ή πηγές ανάφλεξης. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρήση εξωτερική. Μην το καταπιίνετε.

Οδηγίες χρήσης:

Αφαίρεση αυτοκόλλητων προϊόντων:

- Ανασηκώστε την άκρη του αυτοκόλλητου και εφαρμόστε το προϊόν από κάτω.
- Εξεκολλήστε αργά, ενώ συνεχίζετε την εφαρμογή του προϊόντος.
- Καθαρίστε και στεγνώστε το περιβάλλον δέρμα. Αν χρειάζεται, εφαρμόστε καινούριο αυτοκόλλητο.

Απομάκρυνση καταλοίπων από το δέρμα:

- Εφαρμόστε το προϊόν στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.
- Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 1-2 λεπτά.
- Σκουπίστε μαλακά το δέρμα.
- Επαναλάβετε, αν χρειάζεται.

Συστατικά:

Εξαμεθυλοδισιλοξάνιο, οκταμεθυλοτρισιλοξάνιο και διμεθικόνη