



## mylife™ SafetyLancets

Udtagning af kapillærblodprøver med lavere risiko for utilsigtede stikskader

Det innovative, patenterede design gør kapillær blodprøvetagning sikker og nem. Funktionen med engangsudløser og en forseglet beskyttelsehætte byder på sikkerhed og beskytter patienter samt sundhedspersonale mod krydskontaminering eller tilskadekomst. mylife™ SafetyLancets kan fås i to forskellige versioner: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) og mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

### Sikkerhedsfunktioner

- Sikkerhedsforseglingen angiver visuelt, hvorvidt mylife™ SafetyLancet har været brugt før
- Beskyttelsehætten opretholder sterilitet og forhindrer kontaminering før anvendelse
- Kan ikke genbruges på grund af enkeltudløserfunktion



mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)


### Komfortfunktioner

- Overlegen nålekvalitet (trefacetteret nålespids) støtter en optimal blodgennemstrømning med maksimal komfort
- Skal ikke klargøres eller samles før anvendelse



mylife™ SafetyLancets Comfort  
(30G/1,2 mm)


### Hvordan mylife™ SafetyLancet skal bruges

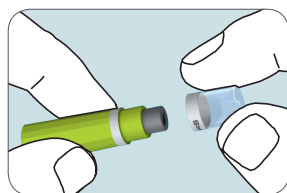


**1** Drej, og tag beskyttelsehætten af mylife™ SafetyLancet.



**2** Anbring mylife™ SafetyLancet på fingeren.

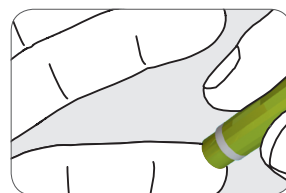

**3** Tryk det ophøjede område mod det valgte sted for at aktivere lancetmekanismen.

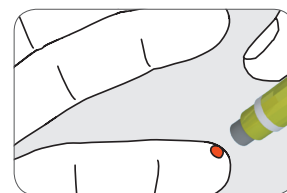

**4** Nålen trækker sig straks tilbage efter brugen. Takket være en enkeltudløserfunktion kan mylife™ SafetyLancet ikke genbruges.



## mylife™ SafetyLancets

Sterile sikkerhedslancetter til engangsbrug til sikker og behagelig rutinemæssig blodprøvetagning

Kan fås i æsker med 100 og 200 stk. med et bekvemt skydelåg



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

### Er designet til monitorering af blodsukker og andre diagnostiske test i

- Diabetesklinikker
- Hospitaler
- Hjemmehjælpen

### Bevarer steriliteten i 5 år

- Steriliserende dosis fastsat i henhold til ISO 11137
- Gammasteriliseret (kobolt-60 bestråling)

Mål	Nål Diameter	Gennemtrængning Dybde	Beskrivelse	Mængde	Ref. nr.
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	100 stks	<b>700009359</b>
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 stks	<b>7100031</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	100 stks	<b>700009361</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 stks	<b>700001495</b>

700006500/10088866-DK-da/V03