




QuikRead go[®] wrCRP & wrCRP+Hb

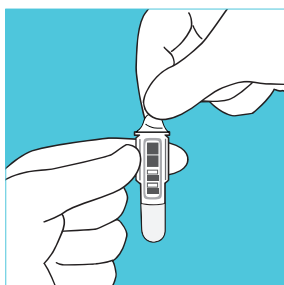


1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på kuvettens nederste del.

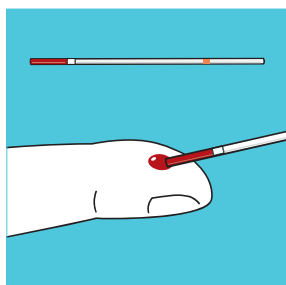

2 Fyld det orange stribet kapillærrør med prøve (10 µl) op til den hvide stopklods. Kontroller, at der ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tør eventuelt overskydende prøve materiale af kapillærrørets yderside.

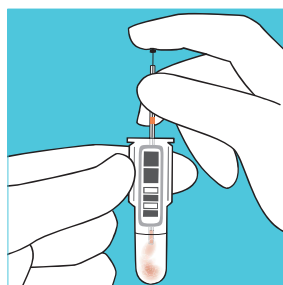


3 Anbring prøven (10 µl) i bufferopløsningen i kuvetten og tilsæt prøven ved at trykke stemplet ned. Kontroller at kapillærrøret er helt tomt.

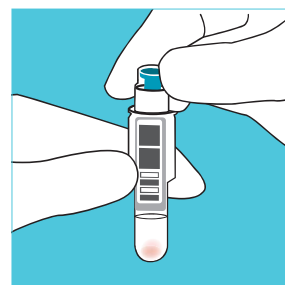

4 Luk kuvetten helt tæt med et CRP reagenslåg. Tryk ikke den inderste turkise del af låget ned. Når prøven er tilsat bufferen, skal testen køres indenfor to timer.



5 Vælg **Måling** på displayet på QuikRead go instrumentet.

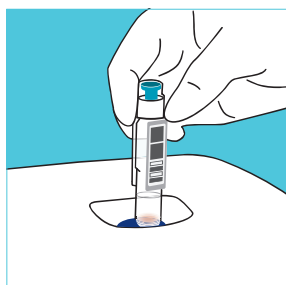

6 Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv.



7 Resultatet vises på displayet og kuvetten vil automatisk komme op af aflæsningsbrønden. For QuikRead go CRP+Hb testen bliver Hb resultatet vist under CRP resultatet.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

Opbevaring af reagenser

QuikRead go[®] wrCRP & wrCRP+Hb



Kit

Uåbnet kit ved 2–8 °C indtil kittets [udløbsdato](#)



Reagenslåg

Uåbnet rør opbevaring ved 2–25 °C: Indtil kittets [udløbsdato](#)
Efter første åbning ved 2–25 °C: [6 måneder](#)



Kuvetter

Uåbnet foliepakke ved 2–25 °C: Indtil kittets [udløbsdato](#)
Uåbnet kuvetter efter åbning af foliepakning:
Ved 2–8 °C: [6 måneder](#) / ved 18–25 °C: [3 måneder](#)



Åbnet kuvette

Lad bufferen varme op til 18–25 °C inden testen udføres
Udfør testen indenfor [2 timer](#), fra kuvettens åbning
Prøven er stabil i bufferen i [2 timer](#)



CRP
Controller

Uåbnet flaske ved 2–8 °C: Indtil [udløbsdato](#)
Åbnet flaske ved 2–8 °C: Op til [2 måneder](#)



Hb Control

Uåbnet flaske ved 2–8 °C: Indtil [udløbsdato](#)
Åbnet flaske ved 2–8 °C: Op til [1 måned](#)

Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

www.aidian.dk

www.quikread.com

| Produkt | Varenr. |
|--|---------|
| QuikRead go wrCRP with capillaries (10 µl) and plungers | 146521 |
| QuikRead go wrCRP+Hb with capillaries (10 µl) and plungers | 146255 |
| QuikRead go CRP Control Low | 153765 |
| QuikRead go CRP Control | 153764 |
| QuikRead go CRP Control High | 153763 |
| QuikRead go Hb 10 µl Control | 153656 |
| QuikRead go 10 µl Capillaries | 147851 |
| QuikRead Plungers | 132655 |
| QuikRead go Instrument | 135867 |