

NÆSTE GENERATIONS DESINFEKTIONSMIDDEL

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Klar-til-brug rengørings-/desinfektionsmiddel med hurtigvirkende hydrogenperoxid

Det unikke indhold i Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S byder på fordelene ved en patenteret hydrogenperoxidopløsning med bredspektret virkning.

Midlet er effektivt mod et bredt spekter af bakterier og vira og efterlader ingen pletter takket være en hurtig fordampning.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S tilbyder:

- ▲ Sporicidal & virucidal aftørringsmiddel til alle overflader
- ▲ Hi-speed H₂O₂[™]
- ▲ Overholder EN 16615
- ▲ De aktive indholdsstoffer nedbrydes til vand og ilt
- ▲ Fremragende materiale kompatibilitet

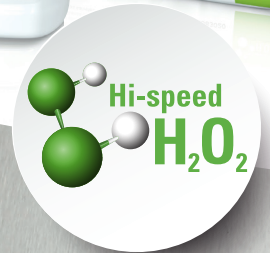

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Klar-til-brug rengørings-/desinfektionsmiddel med hurtigvirkende hydrogenperoxid



Sporicidal effekt mod C.difficile
(SUSPENSIONS TEST)



Virucid
(RENE FORHOLD)



Bactericid
(EN 13727 / 16615)

HOVEDFUNKTION	FORDELE
EFFEKTIVT	Bredspektret effektivitet Kort kontakttid
SIKKERHED	De aktive indholdsstoffer nedbrydes til vand og ilt. Fremragende materiale kompatibilitet
NEMT	Samme middel til både rengøring og desinfektion, men i to arbejdsgange.†

† SSI anbefaler at rengøring og desinfektion udført som 2 separate procedurer, idet dette er mere effektivt til at fjerne mikroorganismene end rengøring alene, desinfektion alene eller rengøring og desinfektion i en og samme procedure.

MIKROBIOLOGISKE OG VIRULOGISKE TESTRESULTATER

EFFEKTIVITET UFORTYNDET	OxyFoam S KONTAKTTID	OxyWipe S KONTAKTTID
Testet iht. RKI anbefaling 01/2004* (urene forhold)		
Effektiv mod indkapslede vira iht. RKI recommendation 01/2004*	15 sek	30 sek
Polyoma SV40*	30 sek	30 sek
Euro-normer (rene og urene forhold)		
EN 13727 (bactericid)	1 min	2 min
EN 13624 (gærdræbende)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicid)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberkulocid, mykobakteriecid)	5 min	30 min
EN 14476 (virucid)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sek	30 sek
EN 14476 Noro	1 min (rene forhold) 15 min (urene forhold)	15 min
EN 13704 (sporicid)**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
Euro-Norms (urene forhold) - 4-field-test		
EN 16615 (bactericid)	1 min	2 min
EN 16615 (gærdræbende)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicid)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberkulocid, mykobakteriecid)	5 min	5 min
Sporicid (metode EN 16615)**	15 min	30 min
C. difficile (metode EN 16615)**	5 min	5 min

* DVV 2008 ** Rene forhold

INCIDIN OXYFOAM S BRUGSANVISNING



- 1 Påfør midlet på overfladen fra ca. 30 cm afstand
- 2 Fordel midlet på overfladen - vær sikker på, ordentlig fordeling
- 3 Lad tørre



- 1 Påfør på ren serviet
- 2 Påfør midlet på overfladen - vær sikker på, at den er helt våd
- 3 Lad tørre

ECOLAB A/S
Høffdingsvej 36
2500 Valby
+45 36 15 85 15
www.dk.ecolab.eu

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu



EFFECTIVE.
SAFE.
CONVENIENT.

ANVENDELSESOMRÅDE

Incidin OxyFoam S: Rense- og desinfektionsskum til medicinske overflader (inkl. fx sonder) og inventar.



Incidin OxyWipe S: Rense- og desinfektionsservietter til medicinske overflader (inkl. fx sonder) og inventar.



© BIOZID N-12164

BRUGSANVISNING

Incidin OxyFoam S: Påfør midlet på overfladen fra ca. 30 cm afstand og påfør ren serviet. Eller brug produktet ufortyndet på en ren serviet, aftør overfladen og lad den tørre.

Incidin OxyWipe S: Brug en enkelt serviet. Påfør midlet grundigt på overfladen, og vær sikker på, at hele overfladen behandles.

Lad tørre, undgå at skylle. Vær sikker på, at hele overfladen er behandlet. Luk låget efter brug. Ikke til afsluttende desinfektion af invasivt medicinsk udstyr. Brug ikke på overflader, der er følsomme over for oxyderende midler såsom marmor, kobber eller messing.

INHOLD

100 g indeholder:

Incidin OxyFoam S: 1.5 g Hydrogenperoxid

Incidin OxyWipe S: 1.5 g Hydrogenperoxid

PAKKESTØRRELSE OG ORDREINFORMATION

PRODUKT	YDRE STØRRELSE	VARENØR
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082020
Incidin OxyFoam S	2 x 5L	3087450
Tæppehane OxyFoam S 5L	10st	10033882
Incidin OxyWipe S	6 x 100st	3082300
Vægdispenser OxyWipe S	1st	10033877

OPBEVARING

Produktet skal opbevares i sin originale indpakning på et tørt og køligt sted (maks. 25 °C), væk fra direkte sollys.

Opbevaringstid efter åbning:

Incidin OxyFoam S: Se udløbsdato

Incidin OxyWipe S: 1 måned

Referencer

1. Incidin OxyFoam S

HÅNDTER ALTID BIOCIDER SIKKERT. LÆS ALTID ETIKETTEN OG PRODUKTINFORMATIONEN FØR BRUG. KUN TIL PROFESSIONELT BRUG.