

QuikRead go[®] Strep A

Kort brugsvejledning



1 Tag prøven i halsen med podepinden fra kittet.
Placer podepinden i ekstraktionsrøret og tilsæt 2 dråber farveløs Ekstraktionsreagens 1 og 2 dråber Ekstraktionsreagens 2 i røret. Opløsningen bliver orangegul.



2 Drej podepinden rundt i opløsningen i 30 sekunder. Lad den derefter stå i opløsningen yderligere 1,5 minut, men ikke længere end 15 minutter (totalt). **Fjern** folieforsøglingen fra kuvetten. Rør ikke overfladen på den nederste del af kuvetten.



3 Vip ekstraktionsrøret og lad podepinden glide mod inder-siden for at trække opløsningen med podepinden ind i kuvetten. Hvis en større mængde af væsken bliver i røret, hæld det da ned i kuvetten. Omrør kraftigt, opløsningen bliver rød. **Pres** podepinden mod indersiden når den tages op.



4 Luk kuvetten omhyggeligt med et Strep A reagenslåg. Pres ikke den inderste pink del af låget ned. Når prøven er tilsat kan den opbevares i op til 4 timer før testen udføres. **Vælg** Måling på displayet på QuikRead go instrumentet.



5 Sæt kuvetten i aflæsningsbrønden på instrumentet. Stregkoden skal vende mod en selv. Displayet viser, hvordan målingen forløber. **Når** testen er fuldført vises resultatet i displayet, og kuvetten løftes automatisk op af aflæsningsbrønden.

Læs venligst brugsvejledningen, inden testen udføres.

Se yderligere information på: www.quikread.com

Se en video med QuikRead go Strep A Test fremgangsmåde:

- » www.oriondiagnostica.dk/Produkter/QuikRead/QuikRead-go-Strep-A/
- » youtube

QuikRead go[®] Strep A

Opbevaring af reagens



Kit æske

Opbevaring af uåbnet kit ved 2–25°C: indtil udløbsdatoen på kittet



Uåbnede kuvetter efter åbning af foliepakning

Opbevaring ved 2–8°C: 6 måneder

Opbevaring ved 18–25°C: 3 måneder



Reagenslåg, ekstraktionsreagenser og kontroller

Uåbnet rør ved 2–25°C: 12 måneder

Efter første åbning ved 2–25°C: 12 måneder




Åbnet kuvette

Testen skal udføres inden **2 timer** fra kuvetten åbnes. Lad bufferen varme op til 18–25°C før testen udføres.

Prøvetagningsinstruktion

Ved udførelse af testen, er det vigtigt at rotere podepinden under ekstraktion og i kuvetten. Husk at presse den mod indersiden, når den fjernes fra kuvetten.

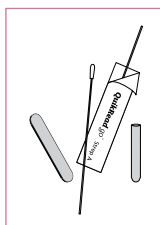


- 1 Saml alle de ting, der er nødvendige for prøvetagningen nær patienten: QuikRead go Strep A podepind, tungespatel og QuikRead go Strep A ekstraktionsrør. Husk at bruge beskyttelsestøj, inklusiv engangshandsker.


Anvend QuikRead go podepinde fra kittet. Brug af andre end QuikRead go podepinde kan give falske resultater, enten positive eller negative.



- 2 Bed patienten om at åbne munden. Tag den sterile QuikRead go Strep A podepind ud af pakningen. Brug spatlen til at presse tungen ned, og begynd prøvetagningen.

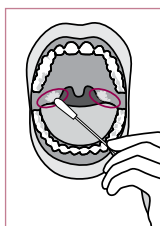

- 3 Opsamling af eksudatprøven skal ske med podepinden. For at sikre en brugbar prøve, roter podepinden ved prøvetagningen. Strep A inficerer mandlerne, husk derfor at pøde begge sider. En prøve udtaget andre steder i munden kan give et negativt resultat. En stor mængde spyt eller mikrober fra andre steder i munden kan forstyrre testen.

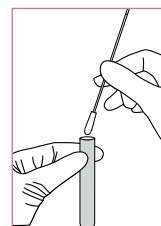

- 4 Tag podepinden ud af munden og placer den i et QuikRead go Strep A ekstraktionsrør. Vær opmærksom på ikke at berøre andre overflader i munden for at undgå forurening med normal flora.

Sikring af korrekt ekstraktion. Observer farveændringer. Farven indikerer en korrekt pH både ved ekstraktion og neutralisering. Følg de anførte tidsangivelser.

Produkt	Varenr.
QuikRead go Strep A, 50 tests	135883
QuikRead go Instrument	135867