




PICO[◇] 7

Kvikguide

smith-nephew.com/pico

 **smith&nephew**
PICO[◇] 7


Engangssystem til sårbehandling
med negativt tryk

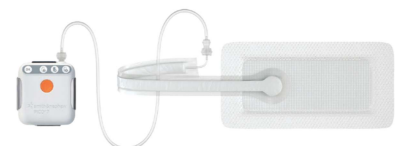

Supporting healthcare professionals

PICO[◇] 7

banebrydende teknologi

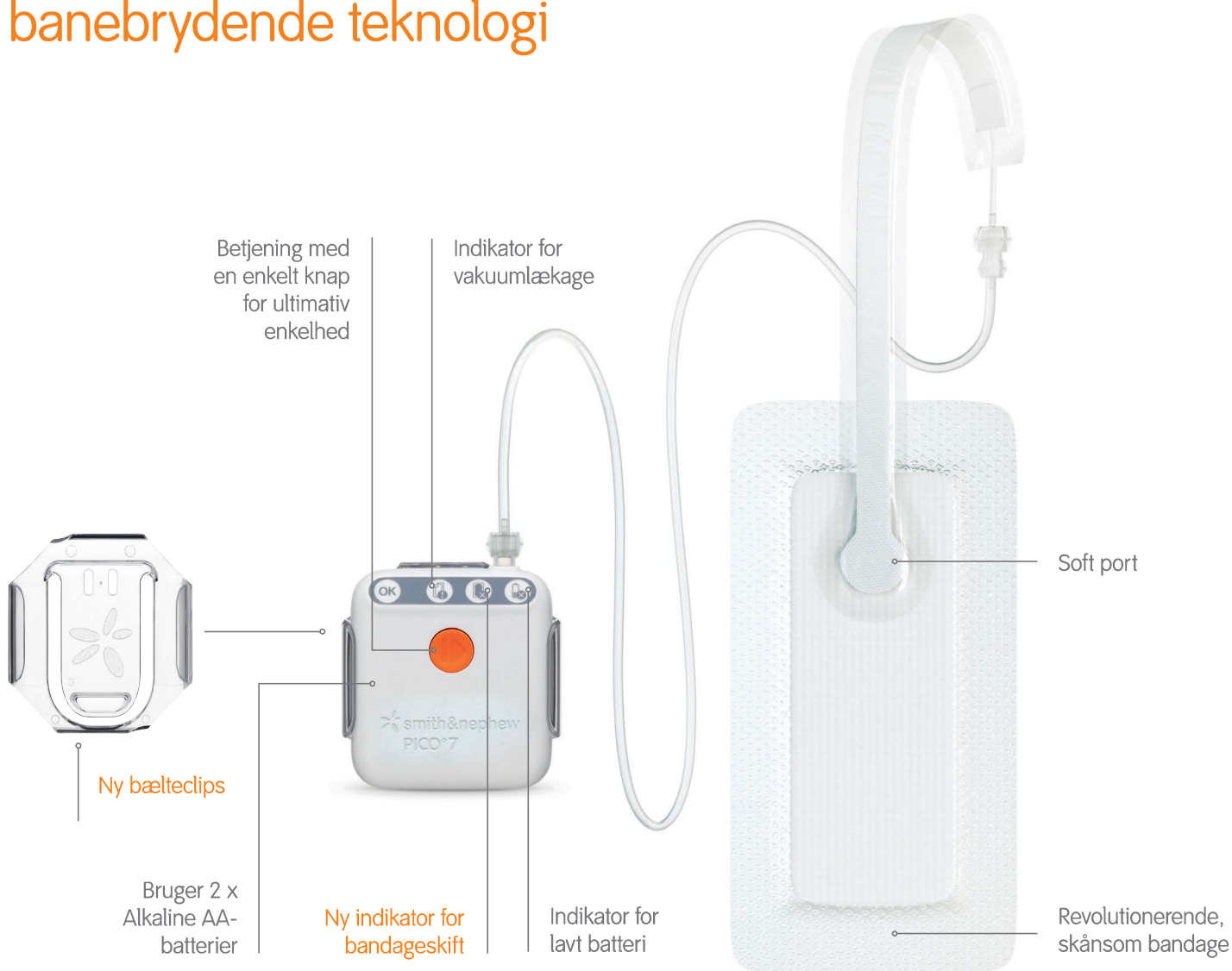

Vores bedste PICO nogensinde

Pumpens ydeevne

PICO-pumpen klarer luftlækager mere end dobbelt så effektivt som sin forgænger.¹ Den forbedrede effektivitet vil kunne hjælpe sundhedsfagligt personale med at levere negativt tryk og kan potentielt anvendes på problematiske og vanskelige områder, der er "svære at forsøge"

Brugervenlighed

- Nyt betjeningspanel med en indikator for fyldt bandage kan optimere antallet af bandageskift
- Et område til notering af startdato for behandlingen kan gøre det lettere at føre protokol

Fleksibilitet










Multipakker med 5 bandager er nu tilgængelige, så behandlingen kan tilpasses patientens kliniske behov

Livskvalitet for patienten

- Pumpen er blevet endnu mere støjsvag²
- Den nye bælteclips øger mobiliteten³

Status og fejlfinding



advarsler og fejl

| Skærmstatus | Indikatorstatus | Mulig årsag | Kommentarer/fejlfinding |
|---|--|--|---|
|  | Alle indikatorer slukket | Pumpen er på standby | Behandlingen er sat på pause. Tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen |
| | | Pumpen har afsluttet forløbet med Negative Pressure Wound Therapy (NPWT-behandling) | Behandlingen genstartes ikke ved tryk på den orange knap. Sundhedspersonalet skal anlægge ny Pumpe og bandage, hvis yderligere NPWT er påkrævet |
| | | Batterierne er opbrugt | Hvis pumpen endnu ikke har fuldført forløbet med NPWT, skal batterierne udskiftes |
|  | Grøn "OK"-indikator blinker | Systemet fungerer korrekt. Ingen problemer | Pumpens drift er indimellem hørbar, når den opretholder det negative tryk. Dette er normalt |
|  | Grøn "OK"- og orange "lækage"-indikator blinker | Pumpen arbejder på at opnå negativt tryk, men har ikke nået det tilsigtede tryk. | Vent op til 65 sekunder. Vurder, om der er etableret NPWT. |
|  | Grøn "OK"- og orange "batteri lavt"-indikator blinker | Systemet fungerer korrekt, men batterierne er ved at løbe tør for strøm | Udskift batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen |
|  | Orange "lækage"-indikator blinker | Der er registreret en høj luftlækage. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time) | Udglat bandagen og strimlerne for at fjerne eventuelle folder. Tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen. Hvis der fortsat er en luftlækage, begynder den orange lækageindikator at blinke efter cirka 60 sekunder. Sørg for, at slangekoblingerne er drejet sikkert sammen |
|  | Orange "lækage"- og orange "lavt batteri"-indikator blinker | Der er registreret en høj luftlækage, og batterierne er ved at løbe tør for strøm. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time). | Løs problemet med luftlækagen i henhold til ovenstående vejledning. Udskift også batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen |
|  | Orange "fyldt bandage"-indikator blinker | Bandagen er helt fyldt, eller filteret er tilstoppet. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time) | Sundhedspersonalet skal udskifte bandagen med en ny og trykke på den orange knap for at genstarte behandlingen |
|  | Orange "fyldt bandage"- og orange "lavt batteri"-indikator blinker | Bandagen er helt fyldt, eller filteret er tilstoppet, og batterierne er ved at løbe tør for strøm. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time). | Sundhedspersonalet skal udskifte bandagen med en ny. Udskift også batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen |
|  | Alle indikatorer lyser konstant | Der er registreret en fejl på pumpen. Pumpen kan ikke længere levere negativt tryk | Sundhedspersonalet skal applicere ny Pumpe og bandage |


Appliceringsvejledning




1. Rens og klargør såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer.
2. Fjern den midterste beskyttelsesfilm, og placer bandagen centralt over såret. Portåbningen skal vende opad i forhold til såret.
3. Fjern de to andre stykker beskyttelsesfilm og udglat bandagen omkring såret for at undgå folder.
4. Sæt batterierne i pumpen.
5. Kobl pumpen til bandagen ved at dreje slangekoblingerne sammen.
6. Tryk på den orange knap for at starte behandlingen med negativt tryk. Det grønne lys vil begynde at blinke (angiver, at systemet fungerer korrekt).
7. Sæt fikseringsstrimlerne på hver af bandagens fire sider.
8. Pumpen har 7 dages holdbarhed og bandagen kan sidde i op til 7 dage afhængigt af mængden af eksudat.
9. Når der anvendes sårfyldningsmateriale, skal sårfyldningsmateriale og PICO skiftes 2 til 3 gange om ugen.

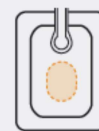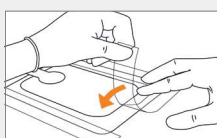

A Bandagen er korrekt placeret og kan blive siddende

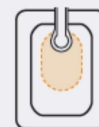

B Bandageskift påkrævet – portåbningen kan blive blokeret af væske

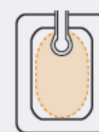

C Bandageskift påkrævet – det absorberende område er fyldt

Bestillingsoplysninger

| Bandage | Størrelse på bandage | Kit med 2 bandager* | Kit med 1 bandage** | Bandagepakke*** |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 10 cm x 20 cm | 66802002 | 66802012 | 66802022 |
| | 10 cm x 30 cm | 66802003 | 66802013 | 66802023 |
| | 10 cm x 40 cm | 66802004 | 66802014 | 66802024 |
| | 15 cm x 15 cm | 66802005 | 66802015 | 66802025 |
| | 15 cm x 20 cm | 66802006 | 66802016 | 66802026 |
| | 15 cm x 30 cm | 66802007 | 66802017 | 66802027 |
| | 20 cm x 20 cm | 66802008 | 66802018 | 66802028 |
| | 25 cm x 25 cm | 66802009 | 66802019 | 66802029 |
| | Lille multisite 15 cm x 20 cm | 66802000 | 66802010 | 66802020 |
| | Stor multisite 20 cm x 25 cm | 66802001 | 66802011 | 66802021 |
| Sårfyldningsmateriale | | Varenummer | | |
| | Skum | 10 cm x 12,5 cm | 66801021 | |
| | Gaze | 11 cm x 4 m | 66802127 | |

* 2 bandager + 1 pumpe; ** 1 bandage + 1 pumpe; *** 5 bandager, ingen pumpe

Wound Management
Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

www.smith-nephew.dk
sn.dk@smith-nephew.com

©Varemærke tilhørende Smith & Nephew
™Alle varemærker er godkendt
© Smith & Nephew februar 2018
18-02946-DK

Supporting healthcare professionals for over 150 years

For detaljerede produktoplysninger, herunder indikationer for anvendelse, kontraindikationer, virkninger, forholdsregler, advarsler og vigtig sikkerhedsinformation henvises til produktets brugervejledning (IFU) før brug.

Referencer

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO® vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in operation. September 2016; 3. WMP11446.UF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.