




# PICO<sup>◇</sup> 7

## Kvikguide

[smith-nephew.com/pico](http://smith-nephew.com/pico)

 **smith&nephew**  
**PICO<sup>◇</sup> 7**


Engangssystem til sårbehandling  
med negativt tryk

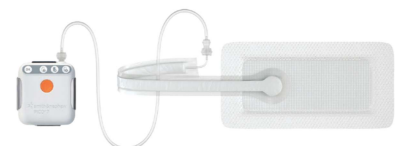

Supporting healthcare professionals

# PICO<sup>◇</sup> 7

## banebrydende teknologi

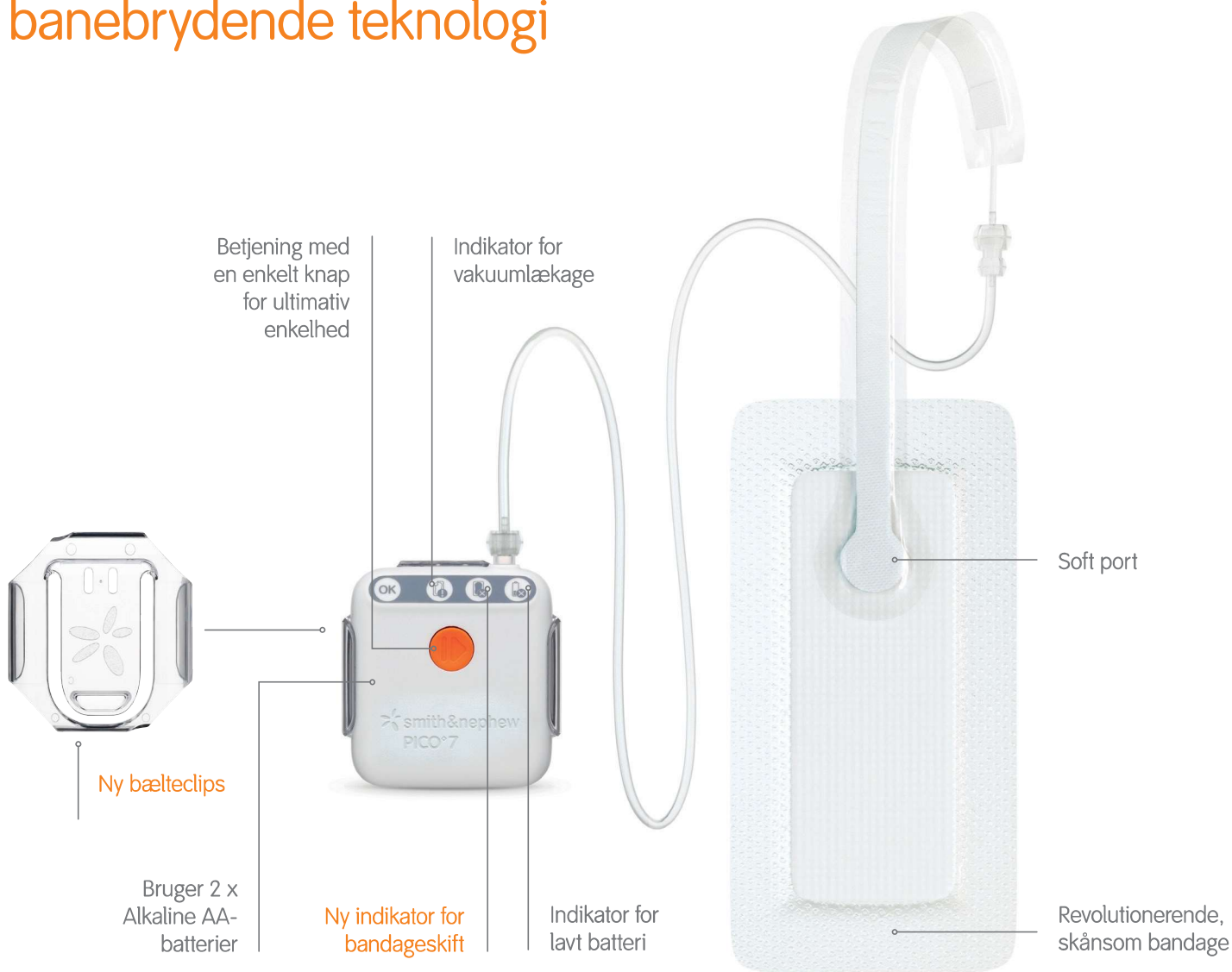

## Vores bedste PICO nogensinde

### Pumpens ydeevne

PICO-pumpen klarer luftlækager mere end dobbelt så effektivt som sin forgænger.<sup>1</sup> Den forbedrede effektivitet vil kunne hjælpe sundhedsfagligt personale med at levere negativt tryk og kan potentielt anvendes på problematiske og vanskelige områder, der er "svære at forsøge"

### Brugervenlighed

- Nyt betjeningspanel med en indikator for fyldt bandage kan optimere antallet af bandageskift
- Et område til notering af startdato for behandlingen kan gøre det lettere at føre protokol

### Fleksibilitet










Multipakker med 5 bandager er nu tilgængelige, så behandlingen kan tilpasses patientens kliniske behov

### Livskvalitet for patienten

- Pumpen er blevet endnu mere støjsvag<sup>2</sup>
- Den nye bælteclips øger mobiliteten<sup>3</sup>

# Status og fejlfinding




## advarsler og fejl

Skærmstatus	Indikatorstatus	Mulig årsag	Kommentarer/fejlfinding
	Alle indikatorer slukket	Pumpen er på standby	Behandlingen er sat på pause. Tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen
		Pumpen har afsluttet forløbet med Negative Pressure Wound Therapy (NPWT-behandling)	Behandlingen genstartes ikke ved tryk på den orange knap. Sundhedspersonalet skal anlægge ny Pumpe og bandage, hvis yderligere NPWT er påkrævet
		Batterierne er opbrugt	Hvis pumpen endnu ikke har fuldført forløbet med NPWT, skal batterierne udskiftes
	Grøn "OK"-indikator blinker	Systemet fungerer korrekt. Ingen problemer	Pumpens drift er indimellem hørbar, når den opretholder det negative tryk. Dette er normalt
	Grøn "OK"- og orange "lækage"-indikator blinker	Pumpen arbejder på at opnå negativt tryk, men har ikke nået det tilsigtede tryk.	Vent op til 65 sekunder. Vurder, om der er etableret NPWT.
	Grøn "OK"- og orange "batteri lavt"-indikator blinker	Systemet fungerer korrekt, men batterierne er ved at løbe tør for strøm	Udskift batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen
	Orange "lækage"-indikator blinker	Der er registreret en høj luftlækage. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time)	Udglat bandagen og strimlerne for at fjerne eventuelle folder. Tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen. Hvis der fortsat er en luftlækage, begynder den orange lækageindikator at blinke efter cirka 60 sekunder. Sørg for, at slangekoblingerne er drejet sikkert sammen
	Orange "lækage"- og orange "lavt batteri"-indikator blinker	Der er registreret en høj luftlækage, og batterierne er ved at løbe tør for strøm. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time).	Løs problemet med luftlækagen i henhold til ovenstående vejledning. Udskift også batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen
	Orange "fyldt bandage"-indikator blinker	Bandagen er helt fyldt, eller filteret er tilstoppet. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time)	Sundhedspersonalet skal udskifte bandagen med en ny og trykke på den orange knap for at genstarte behandlingen
	Orange "fyldt bandage"- og orange "lavt batteri"-indikator blinker	Bandagen er helt fyldt, eller filteret er tilstoppet, og batterierne er ved at løbe tør for strøm. Der bliver ikke leveret negativt tryk (Bemærk: Pumpen vil automatisk prøve at genstarte behandlingen efter 1 time).	Sundhedspersonalet skal udskifte bandagen med en ny. Udskift også batterierne, og tryk på den orange knap for at genstarte behandlingen
	Alle indikatorer lyser konstant	Der er registreret en fejl på pumpen. Pumpen kan ikke længere levere negativt tryk	Sundhedspersonalet skal applicere ny Pumpe og bandage


## Appliceringsvejledning




1. Rens og klargør såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer.
2. Fjern den midterste beskyttelsesfilm, og placer bandagen centralt over såret. Portåbningen skal vende opad i forhold til såret.
3. Fjern de to andre stykker beskyttelsesfilm og udglat bandagen omkring såret for at undgå folder.
4. Sæt batterierne i pumpen.
5. Kobl pumpen til bandagen ved at dreje slangekoblingerne sammen.
6. Tryk på den orange knap for at starte behandlingen med negativt tryk. Det grønne lys vil begynde at blinke (angiver, at systemet fungerer korrekt).
7. Sæt fikseringsstrimlerne på hver af bandagens fire sider.
8. Pumpen har 7 dages holdbarhed og bandagen kan sidde i op til 7 dage afhængigt af mængden af eksudat.
9. Når der anvendes sårfyldningsmateriale, skal sårfyldningsmateriale og PICO skiftes 2 til 3 gange om ugen.

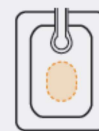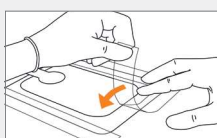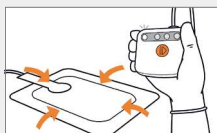

**A** Bandagen er korrekt placeret og kan blive siddende

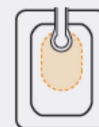

**B** Bandageskift påkrævet – portåbningen kan blive blokeret af væske

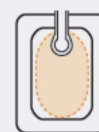

**C** Bandageskift påkrævet – det absorberende område er fyldt

## Bestillingsoplysninger

Bandage	Størrelse på bandage	Kit med 2 bandager*	Kit med 1 bandage**	Bandagepakke***
	10 cm x 20 cm	66802002	66802012	66802022
	10 cm x 30 cm	66802003	66802013	66802023
	10 cm x 40 cm	66802004	66802014	66802024
	15 cm x 15 cm	66802005	66802015	66802025
	15 cm x 20 cm	66802006	66802016	66802026
	15 cm x 30 cm	66802007	66802017	66802027
	20 cm x 20 cm	66802008	66802018	66802028
	25 cm x 25 cm	66802009	66802019	66802029
	Lille multisite 15 cm x 20 cm	66802000	66802010	66802020
	Stor multisite 20 cm x 25 cm	66802001	66802011	66802021
<b>Sårfyldningsmateriale</b>		<b>Varenummer</b>		
	Skum	10 cm x 12,5 cm	66801021	
	Gaze	11 cm x 4 m	66802127	

\* 2 bandager + 1 pumpe; \*\* 1 bandage + 1 pumpe; \*\*\* 5 bandager, ingen pumpe

Wound Management  
Smith & Nephew A/S  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

[www.smith-nephew.dk](http://www.smith-nephew.dk)  
sn.dk@smith-nephew.com

©Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
™Alle varemærker er godkendt  
© Smith & Nephew februar 2018  
18-02946-DK

Supporting healthcare professionals for over 150 years

For detaljerede produktoplysninger, herunder indikationer for anvendelse, kontraindikationer, virkninger, forholdsregler, advarsler og vigtig sikkerhedsinformation henvises til produktets brugervejledning (IFU) før brug.

### Referencer

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO® vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in operation. September 2016; 3. WMP11446.UEF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.