


Nexcare™

GoldHot™

CLASSIC

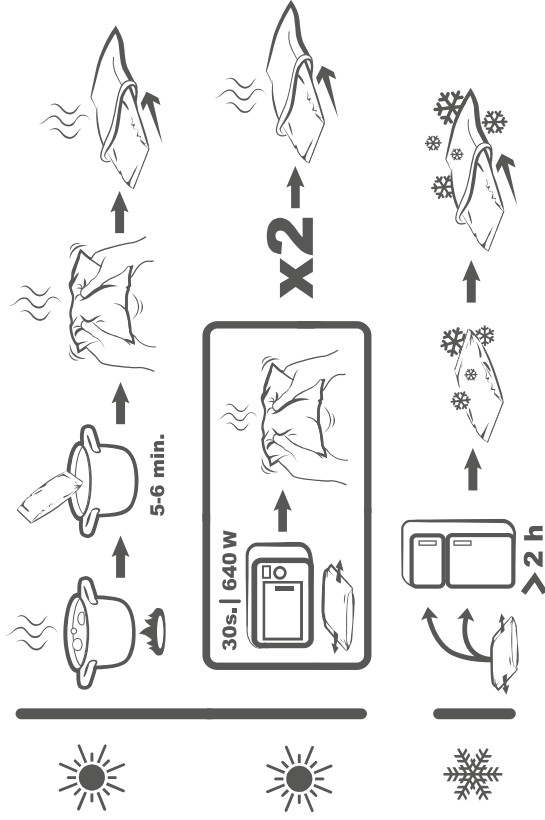

SE Kyl-/värmedyna för flergångsbruk

Smärtlindring genom värme och kyla



Kyla

Används för att minska svullnad, smärta och lindra inflammation.

För akuta skador t.ex. stukningar och bulor. Fungerar också vid kronisk muskelsmärk. Påskyndar läkning av skadade muskler ochleder.

Användning ColdHot™ Classic

- huvudvärk och migrän
- inflammationer
- feber
- svullnader vid akuta skador
- stukningar

Instruktioner - Kyla

Kyl/frys

Förvara dynan utan påse i frysen eller kylan så att den alltid är klar för användning.

Använd dynan i max. 20 minuter. Vila i 20 minuter innan nästa behandling påbörjas.



Värme

Lindrar smärta genom att minska spänningar och stimulera blodflödet. För att lindra smärta och minska muskelspänning vid t.ex. ryggsmärk, menssmärta, reumatism, kronisk muskelsmärk (ej akuta inflammationer).

Användning ColdHot™ Classic

- stel nacke och axlar
- muskelspänning
- artrit/muskelsmärk när du är frusen (som kroppsvärme)

Instruktioner - Värme**

Varmt vatten

Koka upp vatten och flytta kastrullen från spisen. Lägg dynan i vattnet under 5-6 minuter.

Mikrovågsugn

Lägg dynan platt i mikrovågsugnen på 640 W och värme i 2 x 30 sek. Krama dynan efter varje intervall för att blanda den uppvärmda gelen.

Nexcare™ ColdHot™ Classic kyl-/värmedyna kan användas kall eller varm och är en utmärkt lösning för dem som föredrar naturlig, läkemedelsfri behandling. Skyddande påse till dynan medföljer för behaglig användning

Den blå gelen är icke-toxisk och säker för hela familjen. Den är också biologiskt nedbrytbar* till 99 % och därmed är den också mer miljöpåpassad.

Varning

- Endast för utvärtes bruk.
- Placera aldrig dynan direkt på huden. Använd den medföljande påsen eller en tunn handduk.
- Utsätt inte dynan för onödigt tryck t. ex. genom att sitta eller ligga på den. Dynan kan då gå sönder eller börja läcka. Använd därför inte heller dynan då du sover.
- Använd inte på öppna sår eller känslig hud.
- Vid nerv- och blodcirkulationsproblem bör produkten endast användas på läkarens inrådan.
- Försiktighet måste vaktas för att undvika kylskador och yttiga nervskador.
- Brännskador kan uppstå på personer med värmebrännfall i hud (anabesia).
- Övervakning rekommenderas vid användning på barn eller personer med kognitivt handikapp.
- Om obehag uppstår - avbryt användning.
- Vid osäkerhet kring behandlingsformen rådgör med din läkare.

Contraindicaciones

- *Värm ej vikt dyna på grund av risk för läckage.
- Var försiktig när du tar dynan med bara händer från kastrull/mikrovågsugn.
- Dynan är för varm, vänta med applicering på kroppen tills temperaturen är lägom.
- Dynan förstörs om den överhettas.
- Värm inte i ugn eller på grill.
- Om mikrons effekt är ökad, värm på lägsta effekt (tining) i 30 sekunders intervaller.

Skötsel

Dynan kan tvättas för hand med mild rengöringsmedel. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel.

Avfallshantering

Produkten hanteras som traditionellt hushållsavfall.

***99% av de aktiva ingredienserna i enlighet med 84/449/EEG.**