


# SORBACT® FOAM DRESSING

Infektionsforebyggende skumbandage

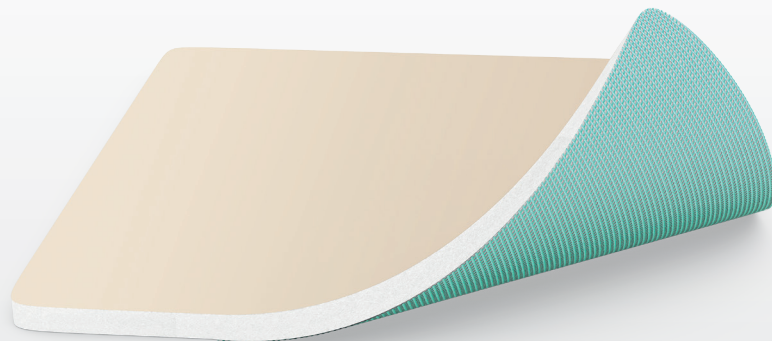

## REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I MODERAT VÆSKENDE SÅR

*Sorbact® Foam Dressing er en steril skumbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med polyurethanskum og en semipermeabel bagside. Sorbact® Foam Dressing absorberer og holder på eksudat, hvilket reducerer risikoen for maceration og opretholder et fugtigt sårmiljø. Overskydende væske kan fordampe igennem den semipermeable bagside.*

Produkt	Varenr.	Størrelse	Stk. / æske
Sorbact® Foam Dressing	98310	10x10 cm	10
Sorbact® Foam Dressing	98315	15x15 cm	10
Sorbact® Foam Dressing	98320	10x20 cm	10




## TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Foam Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er lavt til moderat væskende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

## BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sårpuden skal dække såret med et overlap på mindst 2 cm.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Ved tilklipning af bandagen skal der anvendes steril teknik. Kassér åbne og ubrugte bandager.
5. Læg bandagen på. Sørg for, at den grønne side af bandagen er i direkte kontakt med hele såret.
6. Fiksér med passende sekundærbandage.
7. Bandagens skiftefrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt sårets og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

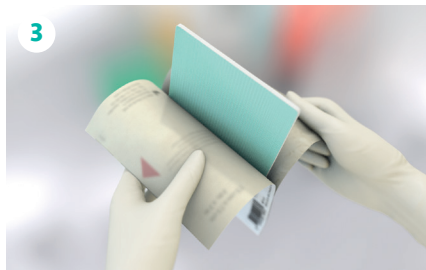

## SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.