


SORBACT® SUPERABSORBENT

Infeksjonsforebyggende høyabsorberende bandasje

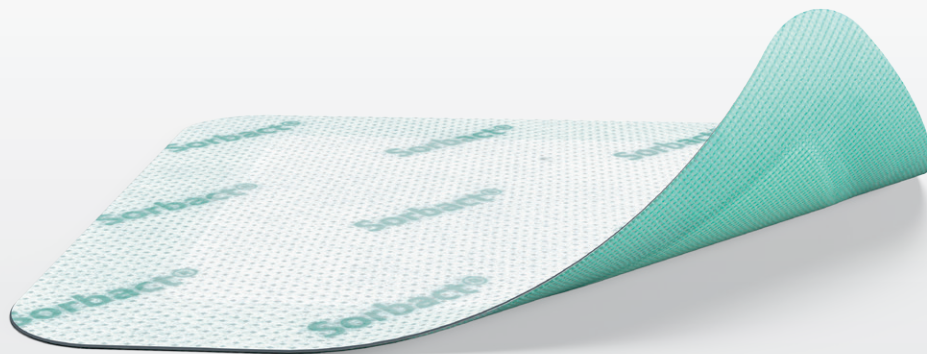

REDUSERER DEN MIKROBIELLE BELASTNINGEN I SÅR SOM VÆSKER KRAFTIG ELLER SVÆRT KRAFTIG


Sorbact® Superabsorbent er en steril, bakterie- og soppbindende, superabsorberende sarbandasje. Den består av en grønn Sorbact® sarkontaktflate kombinert med en superabsorberende kjerne og en hvit vannavstotende bakside, som forhindrer sekresjon i å trengte gjennom. Sorbact® Superabsorbent absorberer og holder på sekresjon. Dermed reduseres risikoen for masesjon, samtidig som bandasjen muliggjør et fuktig sarmiljø. Sorbact® Superabsorbents høye absorpsjonskapasitet bidrar til at bandasjen ikke behøver å skiftes like ofte.

Produkt	Ref.nr.	Str.	stk./pakning
Sorbact® Superabsorbent	98501	10x10 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98502	10x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98503	20x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98504	20x30 cm	10




INDIKASJONER

Sorbact[®] Suprabsorbent er beregnet for bruk i behandlingen av rene, koloniserte, kontaminerte eller infiserte sår med høye til svært høye nivåer av sekresjonsnivaer, for eksempel operasjonssår, traumesår, trykksår, diabetiske sår og sår på fotter og bein.

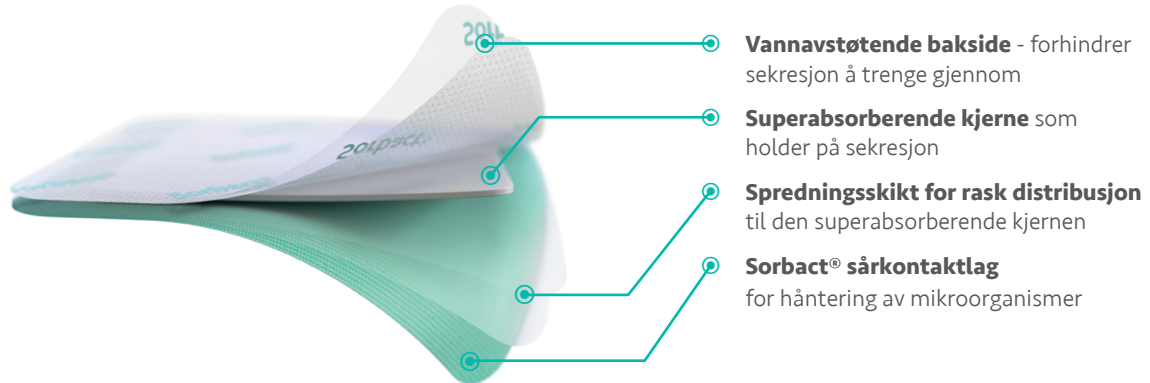

BRUKSANVISNING

- Behandle såret i samsvar med lokal klinisk praksis.
- Velg en passende bandasjestørrelse for såret.
- Fjern bandasjen fra forpakningen ved hjelp av en aseptisk teknikk.
- Det er viktig at det grønne stoffet kommer i direkte kontakt med overflaten på sårområdet.
- Bruk passende fikseringsbandasje dersom dette er nødvendig.
- Hvor ofte bandasjen skal skiftes avhenger av graden av væskemengden og sårets generelle tilstand. Bandasjen skal skiftes minst to ganger i uken. Bandasjen kan brukes til kompresjonsbehandling.

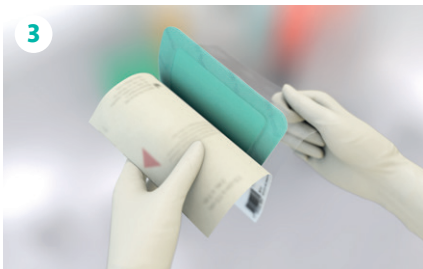

SORBACT[®] – FOREBYGGER INFEKSJON

Sorbact[®] bakterie bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere den mikrobielle belastningen på naturlig måte. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandasjens overflate og fjernes når bandasjen skiftes.