


● Mepore® Film & Pad

Pustende, transparent selvheftende absorberende filmbandasje

Mepore Film & Pad er en pustende, transparent selvheftende absorberende filmbandasje. Releasesystemet er designet for enkel applisering og den transparente filmen gjør det enkelt å observere huden rundt såret.

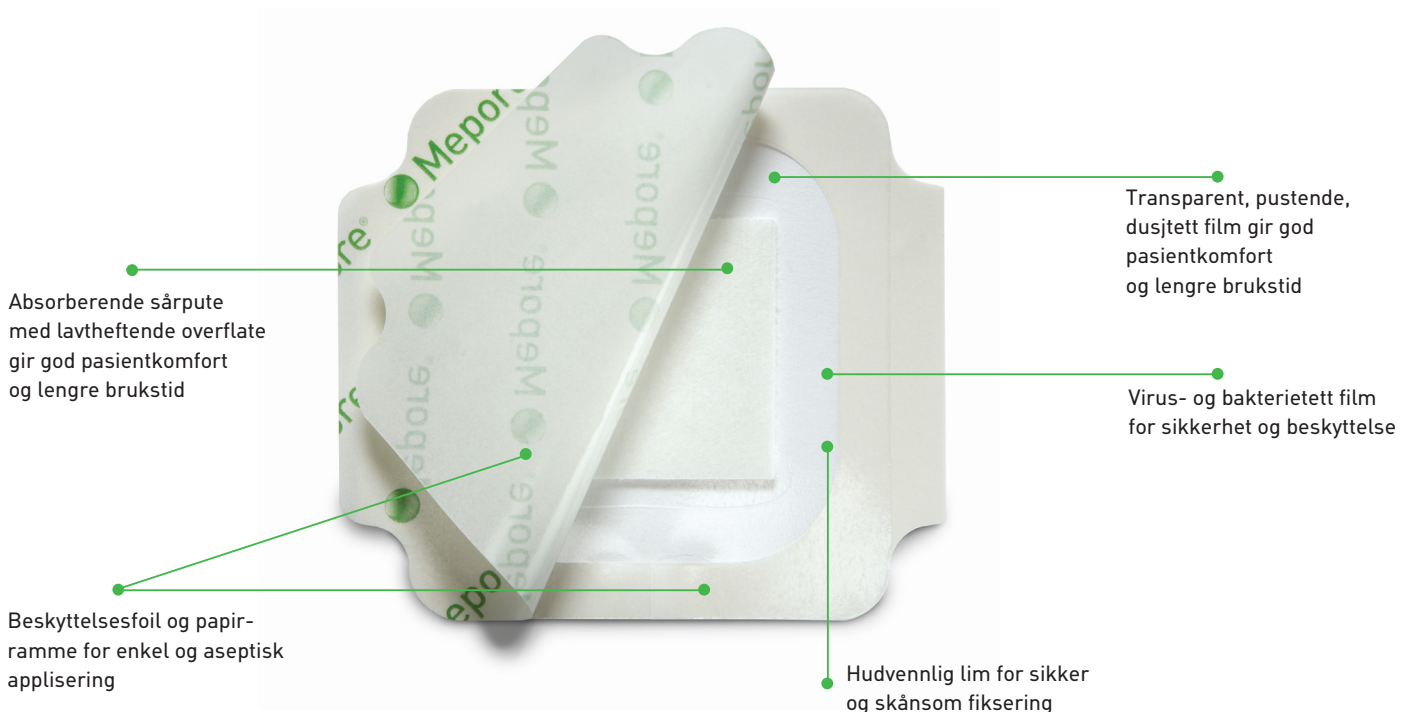

Slik fugerer Mepore Film & Pad


Mepore Film & Pad har en absorberende sårpute og pustende film som gir bandasjen en svært god væskehåndtering. Filmen gir også beskyttelse mot ytre kontaminasjon. Mepore Film & Pad er fleksibel og former seg etter kroppens ujevnheter samtidig som den gjennom-siktige filmen gjør det enkelt å overvåke sårområdet. Polyakrylatlimet er skånsomt mot huden, men gir likevel

sikker fiksering. Mepore Film & Pad bandasjer er lett å applisere og skifte aseptisk, også ved bruk av hansker.

Bruksområder

Mepore Film & Pad kan brukes på en rekke lite til moderat væskende sår som for eksempel postoperative sår, kutt eller skrubbsår.

Hvordan bruke Mepore Film & Pad

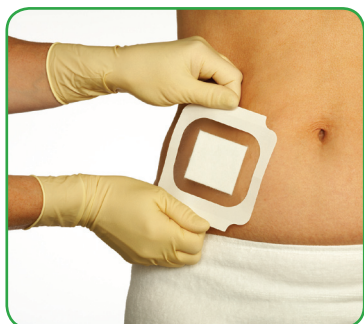

Fjern beskyttelsesfoilen. Tilpass bandasjen over såret og legg den på huden uten å strekke.



Fjern papirrammen og de to hvite sidestrimlene.



Legg hånden over bandasjen i et par sekunder for å sikre god hefting. Ved fjerning; strekk filmen horisontalt for å løsne skånsomt fra huden, og redusere risiko for smerte og hudstripping.

Skiftefrekvens

Skiftefrekvensen bestemmes av sårets tilstand.

Fordeler ved Mepore Film & Pad

- Lavtheftende sårkontaktlag
- Gode pusteegenskaper
- God væskehåndtering
- Enkel applisering, også ved bruk av hansker
- Former seg etter kroppen
- Virus- og bakterietett film, som lager en barriere mot lekkasje
- Skånsom og sikker fiksering
- Hudvennlig hefting
- Dusjtett
- Bredt sortiment

Forholdsregler

Mepore Film & Pad må ikke appliseres på pasienter som reagerer på akrylatlim. Utvis forsiktighet ved fjerning for å minimere risiko for mekanisk skade på frisk hud. Såret må inspiseres for eventuelle tegn på infeksjon. Ved tegn på infeksjon skal bruk av Mepore Film & Pad vurderes av fagpersonell.

Mepore Film & Pad er pakket i sterile engangspakninger

Art.nr.	Str i cm	Str på sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
275100	4 × 5	1,5 × 2,5	85	340
275200	5 × 7, oval	2,5 × 4	85	340
275300	5 × 7	2,5 × 4	85	340
275400	9 × 10	4,5 × 5	30	180
275500	9 × 15	4,5 × 10	30	240
275600	9 × 20	4,5 × 15	30	240
275700	9 × 25	4,5 × 20	30	150
275800	9 × 30	4,5 × 25	25	125
275900	9 × 35	4,5 × 30	25	100
275110	4 × 5	1,5 × 2,5	5	70
275210	5 × 7, oval	2,5 × 4	5	70
275310	5 × 7	2,5 × 4	5	70
275410	9 × 10	4,5 × 5	5	50
275510	9 × 15	4,5 × 10	5	50
275610	9 × 20	4,5 × 15	5	40

Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22 70 63 70
www.molnlycke.com

