


Det tunna absorberande allt-i-ett skumförbandet

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Tunt, formbart och självhäftande allt-i-ett skumförband
- Skonsam men säker vidhäftning
- Duschbart

Virus- och bakteriebarriär*

- Andningsbar
- Duschbar

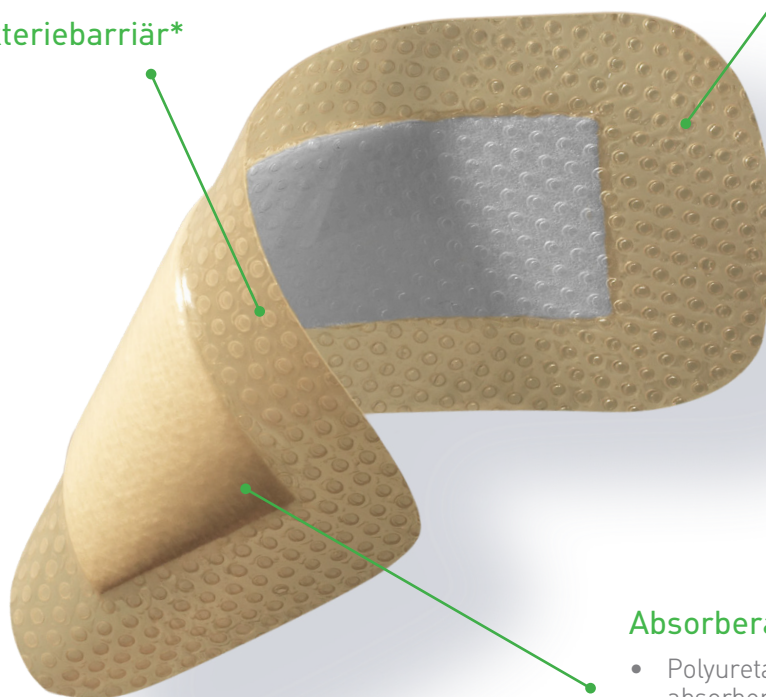

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbytet¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration³

Absorberande skumskikt


- Polyuretanskum som snabbt absorberar sårsekret
- Tunt och formar sig lätt efter kroppens konturer
- Nonwoven spridningskikt för att optimera absorption och förhindra läckage

* mikrober större än 25 nm


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

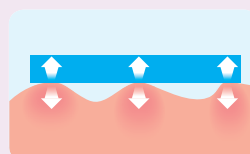


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

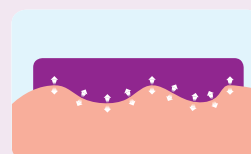


Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna

Så här används Mepilex® Border Lite

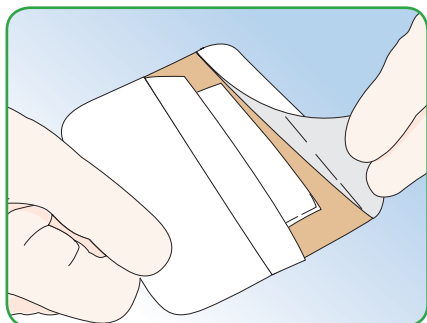

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilm.

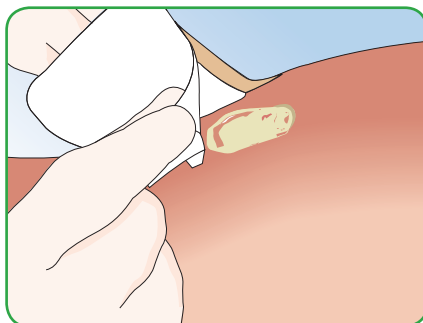

Applicera den klabbiga sidan mot såret.
Sträck inte förbandet.



Så här fungerar Mepilex Border Lite

Mepilex Border Lite är ett tunt självhäftande och duschbart allt-i-ett skumförband. Förbandet absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet är mycket formbart och flexibelt, vilket gör det väldigt smidigt att arbeta med. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Border Lite

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Självfixerande allt-i-ett skumförband
- Tunt, formbart och flexibelt
- Duschbart
- Kan användas under kompression
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden

Mepilex Border Lite kan användas på ett stort antal torra till svagt vätskande sår såsom ben- och fotsår, trycksår, traumatiska sår t.ex. skärsår, fingerskador samt suturerade sår. Kan även användas som skydd för sår med skadad/ömtålig omkringliggande hud.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Border Lite om lämplig infektionsbehandling inleds.

Mepilex Border Lite sortiment (levereras sterila, enstycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
281000	4 x 5	10	70
281100	5 x 12,5	5	65
281200	7,5 x 7,5	5	70
281300	10 x 10	5	50
281500	15 x 15	5	50



Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
www.molnlycke.se
www.molnlycke.se/patient

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® Border Lite are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

