


Mepitel® One

DET EFFEKTIVE SÅRKONTAKTLAGET

- Minimerer skade på såret og smerte for pasienten ved bandasjeskift ^(1,2)
- Heftemiddel på kun én side for enkel applisering
- Kan ligge på såret i inntil to uker ⁽³⁻⁷⁾ noe som gir kostnadseffektiv ^(1,8) og uforstyrret sårheling

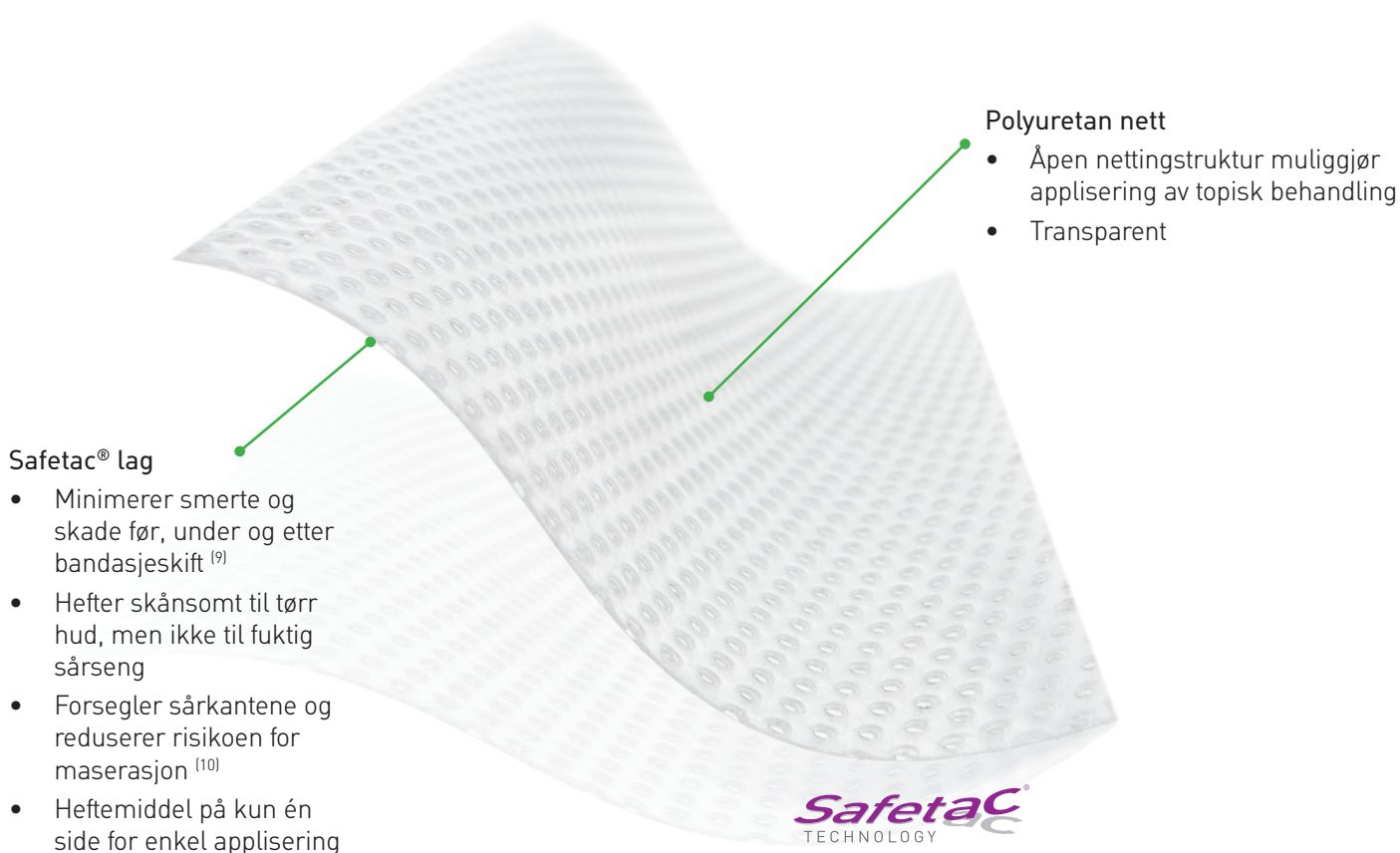


Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre smerte. Mindre skade.

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac teknologien finnes i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex® -familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For ytterligere informasjon se www.safetac.com

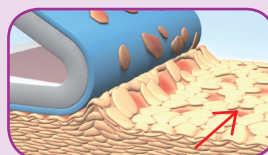


Hudskade ved bruk av tradisjonelle heftemidler

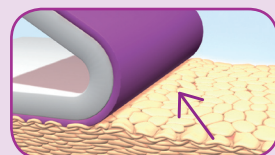


Ingen hudskade med Safetac teknologi


Hvordan bruke Mepitel® One

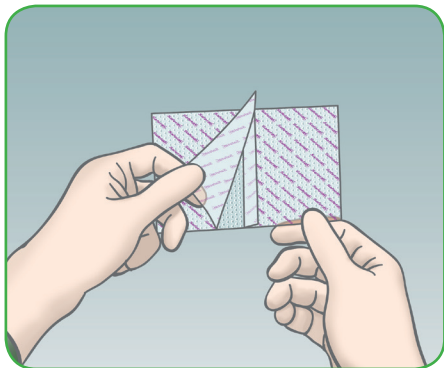

Rengjør såret.
Fjern relasefilmen.

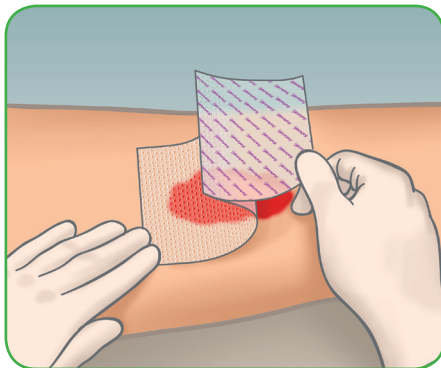

Appliser Mepitel® One på såret.

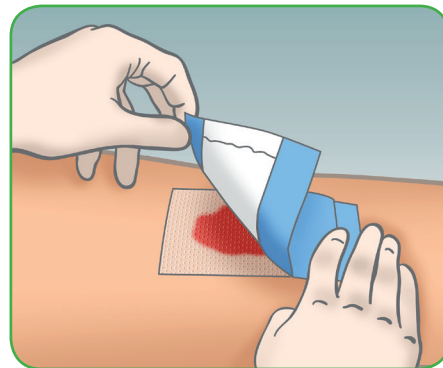

Appliser en absorberende sekundærbandasje, f. eks Mesorb

Hvordan virker Mepitel® One

Mepitel One kan ligge på såret i inntil to uker^[3-7], avhengig av sårets tilstand, noe som gir kostnadseffektiv og uforstyrret sårheling. Nettingsstrukturen i Mepitel One sørger for at sårsekret enkelt absorberes opp i sekundærbandasjen. Safetac laget forhindrer at sekundærbandasjen fester seg til såret, noe som fremmer atraumatisk bandasjeskift. Safetac teknologien danner en barriere rundt sårkantene, og forhindrer dermed lekkasje av sårsekret til den omkringliggende huden slik at risikoen for maserasjon minimeres.

Fordeler med Mepitel One

- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift
- Heftemiddel på kun én side for enkel applisering
- Kan ligge på såret i inntil to uker, noe som gir kostnadseffektiv og uforstyrret sårheling
- Gir færre bandasjeskift
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Opprettholder produktets egenskaper over tid – etterlater ingen rester og tørker ikke ut
- Transparent for enkelt å inspisere såret ved applisering og bruk
- Formes enkelt etter kroppskonturer, gir god komfort
- Holder seg på plass
- Lav risiko for hudirritasjon og allergi

Bruksområder


Mepitel One kan brukes på en rekke væskende sår, som for eksempel smertefulle sår, hudflenger, hudavskrapninger, kirurgiske sår, delhudsbrannskader, traumatiske sår, blemmer, rifter, delhud og fullhudstransplantat, legg- og fotsår. Mepitel One kan også brukes som et beskyttende lag på ikke væskende sår og områder med skjør/ømfintlig hud.

Advarsel

Ved bruk av Mepitel One på brannskader behandlet med meshed grafts eller etter ansiktsoperasjoner kan avtrykk oppstå dersom produktet ikke brukes riktig.

Forholdsregler

- Såret bør inspiseres for tegn til infeksjon i henhold til klinisk praksis. Rådfør deg med profesjonelt helsepersonell for en passende medisinsk behandling.
- Hvis Mepitel One benyttes av pasienter med Epidermolysis Bullosa, inspiser såret nøye ved bandasjeskift. Hefttegenskapene til Mepitel One er noe høyere enn hos Mepitel.
- Unngå å plassere unødvendig press på bandasjen hvis Mepitel One benyttes på brannskader behandlet med meshed grafts.
- Hvis Mepitel One benyttes etter ansiktsoperasjoner, bør en unngå å plassere for mye press på bandasjen. Løft og reposisjoner bandasjen minimum annenhver dag.
- På blødende eller svært væskende sår bør Mepitel dekkes med absorberende bandasje.
- Når Mepitel One brukes til fiksering av hudtransplantasjoner bør ikke bandasjen skiftes før etter fem dager.

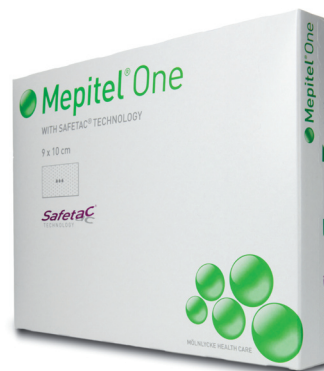

MEPITEL ONE SORTIMENT (sterile)

Art.nr.	Størrelse	Antall i eske	Ant. i kartong
289100	5 × 7,5	10	70
289300	7,5 × 10	10	40
289500	10 × 18	10	70
289700	17 × 25	5	40