


Mepilex® Transfer

Mykt skum sårkontaktlag

- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift^{1, 2}
- Transporterer eksudat vekk fra såret og minimerer risikoen for maserasjon³
- Former seg etter kroppen og muliggjør håndtering av sår som er vanskelige å bandasjere

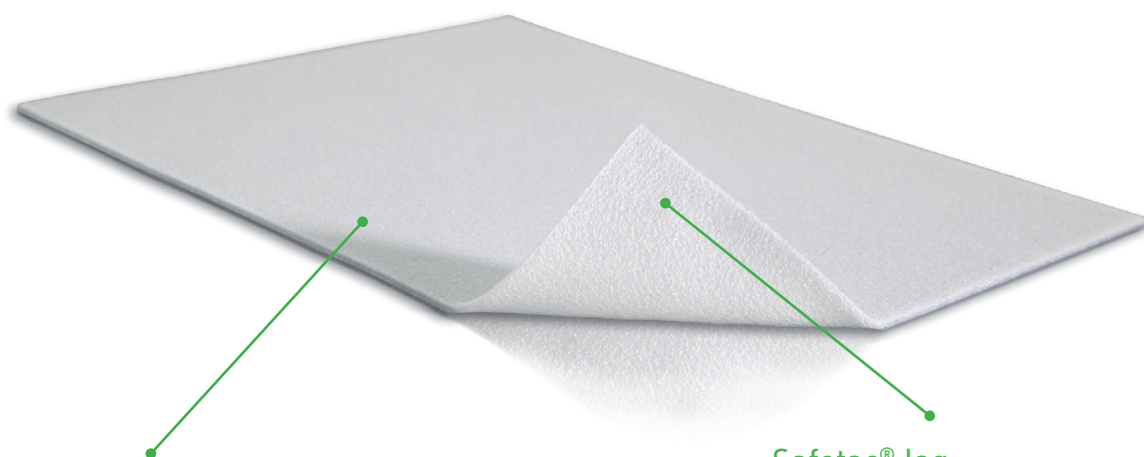

Polyuretan tynt skumlag

- Transporterer eksudat vertikalt vekk fra såret
- Former seg etter kroppen
- Egner seg godt til store væskende sår


Safetac® lag

- Reduserer smerte og skade før, under og etter bandasjeskift¹
- Hefter ikke i fuktig sår seng, men til den tørre omkringliggende huden
- Forsegler sårkantene og reduserer risikoen for maserasjon


Safetac® teknologi

Safetac er en unik og patentert hefteteknologi som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, slik som Mepilex Border Post-Op, Mepilex- familien, Mepitel, Mepiform og Mepitac.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

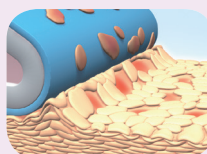


Tradisjonelle heftemidler hefter kun på toppen av porene og må derfor hefte hardere

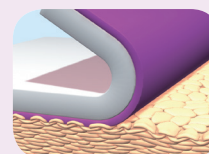


Safetac føyer seg etter hudens porer og forsegler sårkantene


Hvordan bruke Mepilex® Transfer

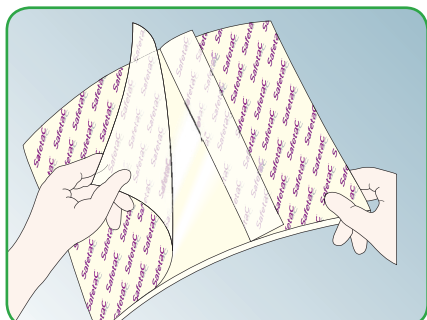

Rens sårområdet og tørk omkringliggende hud.
Fjern først den øvre delen av releasefilmen.

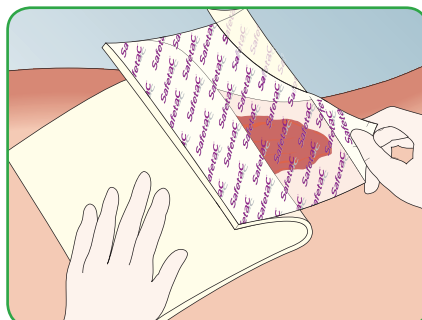

Mepilex Transfer bør overlape omkringliggende hud med minst 5 cm.

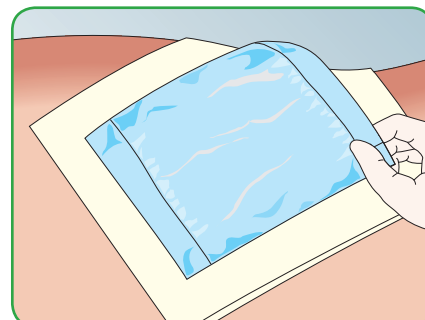

Appliser en passende absorberende sekundær bandasje og fiksér.

Slik fungerer Mepilex Transfer

Mepilex Transfer er en tynn og svært føyelig skumbandasje som absorberer væske og opprettholder et fuktig sårmiljø. Safetac skaper en forsegling rundt sårkantene og hindrer lekkasje til omkringliggende hud, slik at risikoen for maserasjon minimeres. Strukturen i skummet sørger for at sårvesken transporteres vertikalt opp i en egnet sekundærbandasje.

Fordeler med Mepilex Transfer

- Transporterer eksudat vekk fra såret
- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning
- Former seg etter kroppen
- Kan klippes til riktig fasong
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Komfortabel
- Kan ligge på ved strålebehandling
 - Påvirker ikke stråledosen til tumor

NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man iverksetter infeksjonsbehandling.

Bruksområder

Mepilex Transfer egner seg til en rekke væskende sår, og sår som er vanskelige å bandasjere, som for eksempel:

- Cancersår
- Epidermolysis Bullosa (EB)
- Donorsteder
- Venøse leggsår
- Fasciotomi
- Sår og rifter på bryst i forbindelse med amming

Mepilex Transfer kan også brukes som beskyttelseslag på ikke-væskende sår og/eller store områder med ømfintlig hud. Mepilex Transfer kan brukes under kompresjon. Appliser en passende sekundærbandasje for å opprettholde et fuktig sårmiljø.

Mepilex Transfer sortiment

(pakket i sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
294600	7,5 x 8,5	5	70
294700	10 x 12	5	50
294800	15 x 20	5	40
294502	20 x 50	4	24
Apotekspakning			
294670	7,5 x 8,5	2	108



Mer informasjon på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS

Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo

Telefon: 22 70 63 70

www.molnlycke.no

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® Transfer are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

