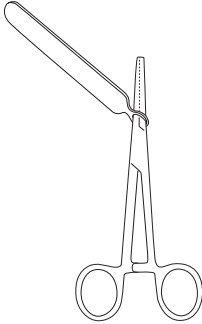
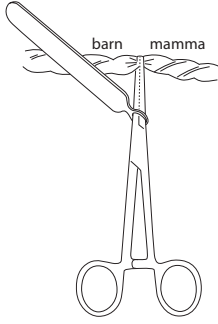
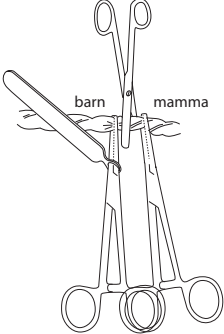
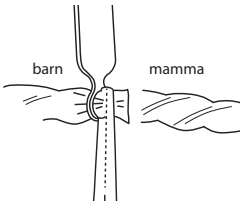
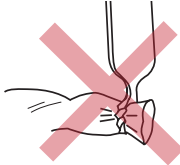
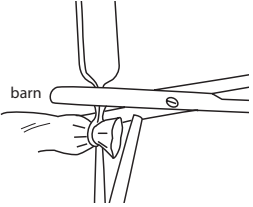












Bruksanvisning Navelsnodd

SE

 <p>1. Trä navelsnodden på peangen. ⚠️ Töj inte ut navelsnodden mer än nödvändigt. Detta kan orsaka att ringen går sönder.</p>	 <p>2. Knip åt navelsträngen med peangen nära barnet. OBS se till att spetsen på peangen är kant i kant med navelsträngens ihoppresade sida.</p>	 <p>3. Placera en peang bredvid den andra mot mamman. Klipp av navelsträngen mellan peangerna med navelsaxen.</p>
 <p>4. Ta tag i navelsnoddens dragplatta och dra navelsnodden av från peangen och över navelsträngen.</p>	 <p>⚠️ 5. Låt inte navelsnoddens ring bli vriden enligt bilden. Detta kan orsaka att ringen går av.</p>	 <p>6. Klipp av navelsnoddens dragplatta minst 1 mm från navelsnoddens ring, som nu ligger runt navelsträngen. Lossa peangen.</p>

⚠️ Kontrollera navelsnodden noga de första 24 timmarna efter.

 Läs användarmanualen	 Tillverkare	 Återanvänd inte. Engångsprodukt.
 Artikel nummer	 Använd före	 Överensstämmer med direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEC (0402).
 Lot nummer	 Använd inte bruten förpackning.	 Steriliserad med etylenoxid.

 REF: 9607 och 9607S

40-9607/9607S-210315

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, 0371 330 30, info@wingplast.se, www.wingplast.se



Wing Plast AB