


# SORBACT® SUPERABSORBENT

Infektionsförebyggande högabsorberande förband

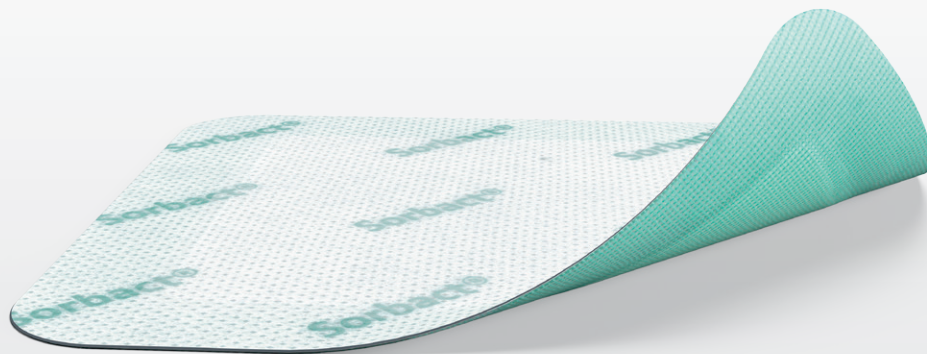

## MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I RIKLIGT TILL MYCKET RIKLIGT VÄTSKANDE SÅR


*Sorbact® Superabsorbent är ett sterilt, bakteriebindande, superabsorberande sårförband. Det består av en grön sårkontaktyta i acetatväv, kombinerat med en superabsorberande kärna och en vit vattentålig baksida. Sorbact® Superabsorbent absorberar och håller kvar sårvätska, minskar därmed risken för maceration och upprätthåller en fuktig sårmiljö. Den höga absorptionsförmågan hos Sorbact® Superabsorbent bidrar dessutom till att minska antal förbandsbyten.*

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Superabsorbent	98501	10x10 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98502	10x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98503	20x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98504	20x30 cm	10





## AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact<sup>®</sup> Superabsorbent är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med rikliga till mycket rikliga vätskemängder, såsom venösa och arteriella sår, postoperativa sår, traumasår, trycksår och diabetessår.

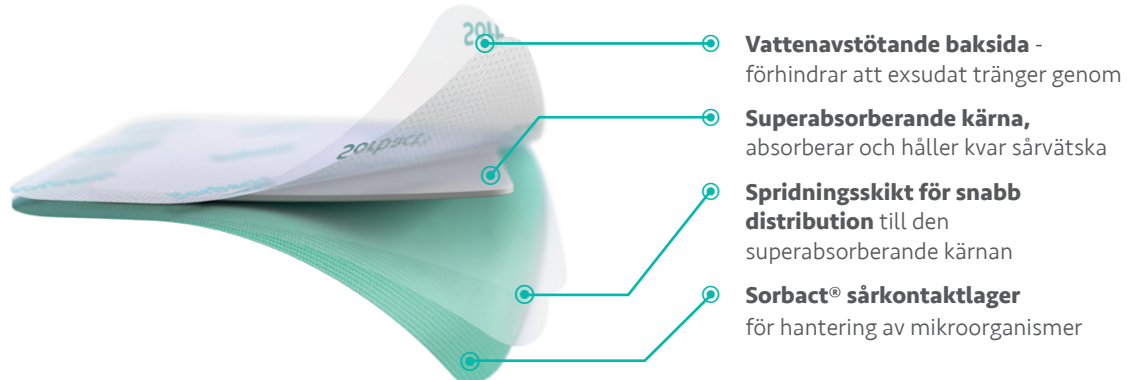

## BRUKSANVISNING

1. Behandla såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med sårytan.
5. Applicera lämplig förbandsfixering efter behov.
6. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar och sårets allmänna kondition. Förbandet ska bytas minst två gånger i veckan. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

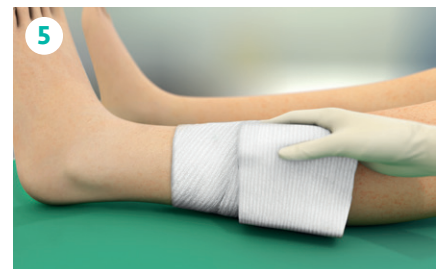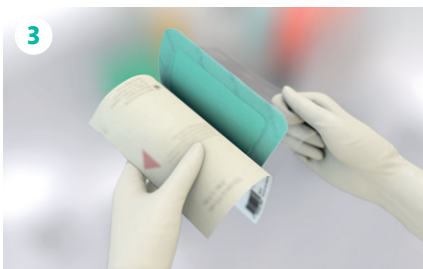

## SORBACT<sup>®</sup> – FÖREBYGGER INFEKTION

Sorbact<sup>®</sup> mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts