

BARRIER® Instrumentbordslakan


- Starkt och hållbart material ger en slitstark och tillförlitlig kvalitet
- Vätsketätt material och effektiv absorption förhindrar vätskegenomsläpp och bakterieöverföring
- Integrerad tejp för en snabb och säker fixering
- Optimal vikning och förpackning för en enkel och effektiv hantering
- Ett brett sortiment av storlekar som erbjuder lösningar till alla instrumentbord



BARRIER® skapar ringar på vattnet som bidrar till att ge bättre vård till fler patienter

Alla BARRIER® produkter är utformade för en optimal kombination av skydd, funktion och komfort. Erbjuder innovativa fullservicelösningar som kombinerar hög kvalitet, säkra produkter, leverans- och logistikfördelar samt kontinuerlig support och utbildning. Tillsammans skapar dessa element en ökad tids-, insats- och kostnadseffektivitet. Värdefulla resurser frigörs som i sin tur skapar ytterligare effektivitet - och bidrar till att ge bättre vård till fler patienter.



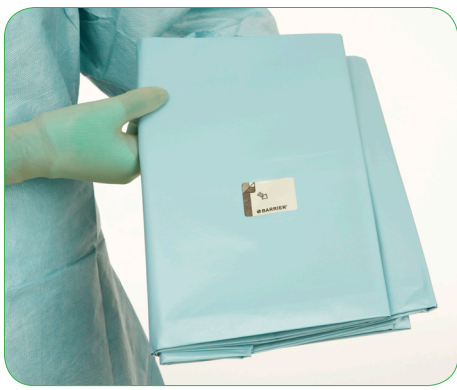

1 Håll lakanet på det sätt som framgår av instruktionsetiketten. Etiketten är självhäftande och fäster mot bordet.



2 Ta bort skyddspappret från etiketten.




3 Placera lakanet på instrumentbordet.



4 Vik ut lakanet åt sidorna.



5 Vik ut instrumentbordslakanet först i riktning mot dig själv.

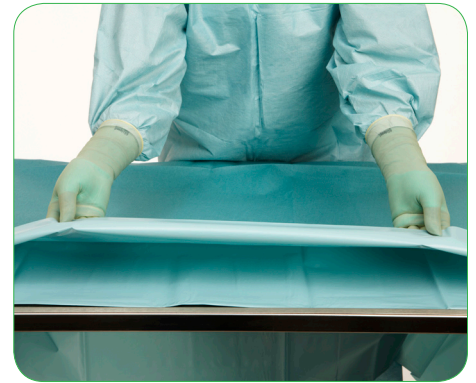

6 Vik sedan ut lakanet bort ifrån dig själv.

Artikel nr.	ProcedurePak® komponenter	Storlek	Absorptionsyta	Förpackningsantal Avd frp/Trp frp
80100	90100	100×150cm	75×150cm	40/80
80150	90150	150×150cm	75×150cm	30/60
80170	90170	150×170cm	75×170cm	27/54
80190	90190	150×190cm	75×190cm	22/44
80210	90210	150×210cm	75×210cm	21/42
80240	90240	150×240cm	75×240cm	20/40

