
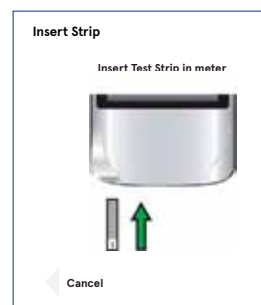
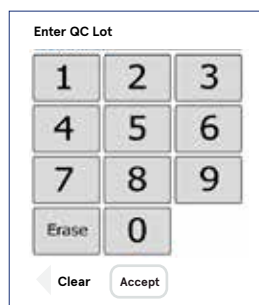
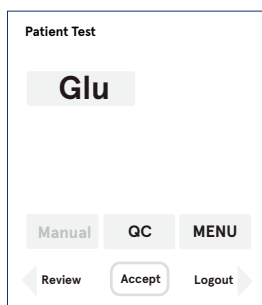


Nova StatStrip Glucose och β -Ketone Hospital Meter

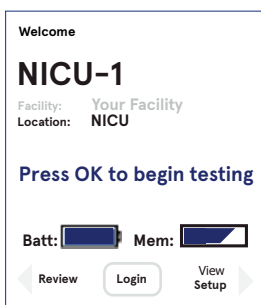



1 Tryck på **Login** och skanna eller skriv in Användar-ID. Tryck på **Godkänn**.

2 Byt till kvalitetskontroll genom att trycka på **QC** eller tryck på **Godkänn** för att utföra ett patientprov.

3 Skanna lotnummer från förpackningen med stickor, tryck **Godkänn**.

4 Skanna eller skriv in patient-ID eller Lotnummer för kvalitetskontroll. Tryck **Godkänn**.

5 För in en teststicka i mätaren.

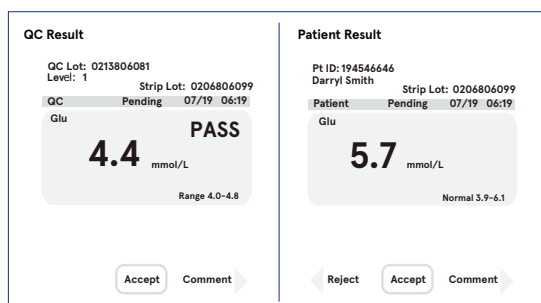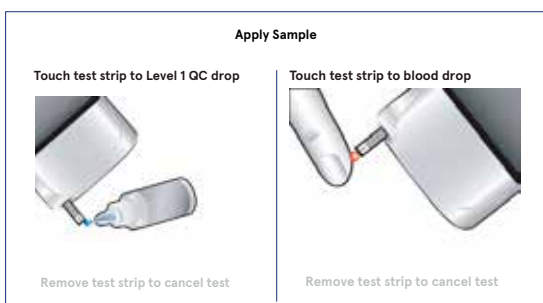

6 Utför testet genom att vidröra teststickan med en droppe av kontrollvätskan eller av patientprovet. Ha mätaren på en platt yta eller upprätt. Blanda försiktigt kontrollvätskan. Kassera första droppen. **OBS! Se till att vätska inte kommer in i testporten.**

7 Resultatet visas i mätarens display genom att trycka på **Godkänn**. Genom att trycka på **Tillbaka**-knappen så avbryts visning av resultat och en kommentar kan läggas till genom att trycka på **Kommentars**-knappen. För kontrolltest så kommer **Godkänt** eller **Underkänt** att visas för att indikera testresultatet.

För att ta ut teststickan ur mätaren så tryck på utkastknappen på mätarens baksidan.

Var god läs instruktionerna innan du utför testet.

Ytterligare funktioner kan finnas till mätaren

Nova StatStrip Glucose och β -Ketone Hospital Meter

Nova StatStrip Glucose och β -Ketone Hospital Meter



- För alla professionella vårdinrättningar
- Placera mätaren i docknings-/laddstationen när den inte används.
- Rengör med 70% isopropylalkohol, 10% utspädd anatriumhypoklorit eller kommersiella ytsaneringsmedel som är godkända för användning på sjukhus.
- Mätaren får INTE sänkas ner i eller hållas under rinnande vatten. Spraya INTE desinfektionsmedel på mätaren.

Kontrollösning för Nova StatStrip glukos och β -keton

- Förvara kontrollflaskan tätt stängd under 30°C.
- Förvara ej i kyl eller frys.
- Den öppnade kontrollflaskans stabilitet är upp till 3 månader eller öppnad fram till utgångsdatum.

Nova StatStrip Glucose och β -Ketone strips

- Förvara teststickorna i 15°C–30°C.
- Använd stickorna innan **utgångsdatum** eller glukostest inom **180 dagar** efter att kontrollflaskan har öppnats och β -ketonstrip inom **90 dagar** efter att kontrollflaskan har öppnats.



Utföra test

- Tvätta patientens händer eller rengör provtagningsstället med spritad kompress och låt torka helt innan du tar provet.
- Teststickan måste fyllas på en gång. Lägg inte till mer prov.
- För kapillärt, venöst och arteriellt helblod.
- Lämplig även för neonatala prover och patienter som får intensiv medicinsk behandling.
- Lämpliga antikoagulantia: natrium, litium och ammoniumheparin.

Felsökning



Analys avbruten: Testet har avbrutits, upprepa testet med en ny teststicka. Låt teststickan vara kvar tills resultatet visas på skärmen.

Dåligt prov: För in en ny teststicka och kör provet igen. Om felkoden upprepas ska testet utföras med en annan flaska eller med en alternativ metod.

Byt teststicka: Händer efter att teststickan förts in eller under analys. För in en ny teststicka och kör provet igen. Om felkoden upprepas ska testet utföras med en annan flaska eller med en alternativ metod.



Temperatur: Mätaren fungerar bara inom temperaturintervallet 1°C till 40°C. Sätt mätaren på en plats där temperaturen är inom intervallet 1°C till 40°C.



Flödesfel: Provet drogs felaktigt in i teststickan antingen för att teststickan fylldes otillräckligt eller för att blodprovet utfördes felaktigt. Upprepa testet med en ny sticka. Om felkoden upprepas ska testet utföras med en alternativ metod.



Överföringsfel: Servern nekar kommunikation med mätaren eller så bröts uppkopplingen till servern. Kontrollera nätverksinställningarna, status för ditt nätverk eller kontakta din administratör för hjälp.



Överföringsfel: Mätaren flyttades innan ingen var klar. Sätt tillbaka mätaren i dockningsstationen.

Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / Tel. 08-623 04 00

För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se

Produkt	Tillv.nr	Art.nr
Nova Statstrip Glu Ket Meter	53712	154722
Nova Statstrip-Glu Ket Meter Wifi 1.86	54796	154767
Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100T	42214	154727
Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 T	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1	46947	154725
Nova Statstrip-Glu Ket Control Level 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3	46949	154723
Nova Dock Single For Ver-1.75/.86	53400	154724