

# IMMOB K-LIGHT™

## TRAUMA



- STABIL
- HYGIENISKT
- TIDSBESPARANDE



IMMOB K-Light™ ersätter det tidigare IMMOB-systemet. Två separata huvudkuddar, gördel och Hak-/pannelourband (bilden till höger) gör systemet komplett. Huvudkuddarna är försedda med kardborre och kan placeras med kompensation för ocentrerad patient. Materialet är utformat för maximal styrka och hygien. Huvudkuddarna fungerar även till TT-Headfix K-Light™ och TT-Cover K-Light™.



ESON COMFORT  
Idé-Möbler i Landeryd AB  
Centrumvägen 7  
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051  
[info@esoncomfort.com](mailto:info@esoncomfort.com)

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved

### PRODUKTINFORMATION

IMMOB K-Light™ är en immobiliseringslösning med två separata kardborreförsedda huvudkuddar för TraumaTransfer™. Lösningen med separata huvudkuddar går att flytta både i sid- och höjdlid. Denna är utvecklad för ett enkelt handhavande och en säker immobilisering. Gördeln tvättas efter användning och använda huvudkuddar och velourband destrueras genom förbränning för att återinvestera miljöinnehållet.

**OBS! Innehåller inget polyuretan som frigör cancerogena ämnen vid förbränning.**

| ART.NR        | NAMN   |
|---------------|--|
| IMMOBGKL      | IMMOB K-Light™ Gördel, immobilisering för TraumaTransfer™ (3 st)           |
| IMMOBGKLM     | IMMOB K-Light™ Mini Gördel, immobilisering för TraumaTransfer™ Mini (3 st) |
| TTHEADFIXKLH  | Huvudkudde för IMMOB K-Light™ (20st) (beställs separat)                    |
| TTHEADFIXKLMH | Huvudkudde för IMMOB K-Light™ Mini (20st) (beställs separat)               |
| VFLEXFIX      | Hak-/pannelourband (50st)  |

Tillval / reservdelar

Specialstorlekar, specielltillämpningar mm.

CE Registrationcode

ESON COMFORT  
www.esoncomfort.se  
"WE INVENT THE FUTURE"

# TT-HEADFIX K-LIGHT™

TRAUMA



- STABIL
- HYGIENISKT
- TIDSBESPARANDE



TT-Headfix K-Light™ är en immobiliseringslösning med två separata huvudkuddar. Huvudkuddarna är försedda med kardborre och kan placeras med kompensation för ocenterad patient. Materialet är utformat för maximal styrka och hygien. Bilden till höger visar TT-Headfix K-Light™ Mini för barn, 1 - 8 år.



ESON COMFORT  
Idé-Möbler i Landeryd AB  
Centrumvägen 7  
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051  
[info@esoncomfort.com](mailto:info@esoncomfort.com)

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved

## PRODUKTINFORMATION

TT-Headfix K-Light™ är en immobiliseringslösning med två separata kardborreförsedda huvudkuddar för TraumaTransfer™. Lösningen med separata huvudkuddar går att flytta både i sid- och höjdlid. Denna är utvecklad för ett enkelt handhavande och en säker immobilisering. Använd TT-Headfix och huvudkuddar destrueras genom förbränning för att återinvestera miljön.

**OBS! Innehåller inget polyuretan som frigör cancerogena ämnen vid förbränning.**

| ART.NR       | NAMN  |
|--------------|---|
| TTHEADFIXKL  | TT-Headfix K-Light™ immobilisering för TraumaTransfer™ (20 st)          |
| TTHEADFIXKLM | TT-Headfix K-Light™Mini immobilisering för TraumaTransfer™ Mini (20 st) |
| TTHEADFIXLH  | Huvudkudde för TT-Headfix K-Light™ (20st) (beställs separat)            |
| TTHEADFIXMLH | Huvudkudde för TT-Headfix K-Light™ Mini (20st) (beställs separat)       |

Tillval / reservdelar

Specialstorlekar, specialtillämpningar mm.

CE Registrationcode 344-2757-118173

ESON COMFORT  
www.esoncomfort.se

“WE INVENT THE FUTURE”

# TT-COVER K-LIGHT™

## TRAUMA



- VÄRMANDE
- HYGIENISKT
- TIDSBESPARANDE



TT-Cover K-Light™ är ett engångsöverdrag med två separata huvudkuddar. Huvudkuddarna är försedda med kardborre och kan placeras med kompensation för ocentrerad patient. Materialet är utformat för maximal styrka och hygien. Bilden till höger visar TT-Cover K-Light™ Mini för barn, 1 - 8 år.



ESON COMFORT  
Idé-Möbler i Landeryd AB  
Centrumvägen 7  
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051  
[info@esoncomfort.com](mailto:info@esoncomfort.com)

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved

### PRODUKTINFORMATION

TT-Cover K-Light™ är ett engångsöverdrag med två separata kardborreförsedda huvudkuddar för TraumaTransfer™. Lösningen med separata huvudkuddar går att flytta både i sid- och höjdlid. Denna är utvecklad för ett enkelt handhavande och en säker immobilisering. Materialet är komponerat för att minimera patientens värmeförlust och för att med hjälp av en vätskespärri hindra läckage av vätskor. Undersidan är optimerad för optimal draghållfasthet för säkra överflyttningar. Klarar en rörlig vikt om 150 kg i vått tillstånd vid lyft (fyra personer). Använt överdrag och huvudkuddar destrueras genom förbränning för att återinvestera miljönnehållet.

**OBS! Innehåller inget polyuretan som frigör cancerogena ämnen vid förbränning.**

| ART.NR       | NAMN  |
|--------------|---|
| TTCOVERKL    | TT-Cover K-Light™ engångsöverdrag för TraumaTransfer™ (25 st)           |
| TTCOVERKLM   | TT-Cover K-Light™ Mini engångsöverdrag för TraumaTransfer™ Mini (25 st) |
| TTHEADFIXLH  | Huvudkudde för TT-Cover K-Light™ (20st) (beställs separat)              |
| TTHEADFIXMLH | Huvudkudde för TT-Cover K-Light™ Mini (20st) (beställs separat)         |

Tillval / reservdelar

Specialstorlekar, specialtillämpningar mm.

CE Registrationcode 344-2757-118173


ESON COMFORT  
www.esoncomfort.se  
"WE INVENT THE FUTURE"

# TT-HEADFIX K-LIGHT™


## HOW TO USE



1. Assemble TT-Headfix K-Light™ over the neck of TraumaTransfer™. Stretch it firmly and mount the velcro on the underside. The two velcro straps on the girdle shall point upwards like in the picture.

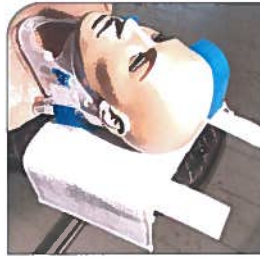

2. Assemble one of the head cushions to the velcro, on top of the girdle. NOTE! One cushion can be mounted before the patient is placed on the TraumaTransfer™. TraumaTransfer™ is ready for use!

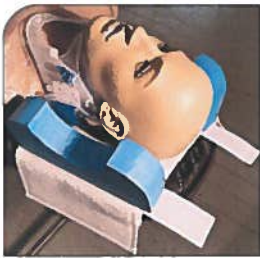

3. Center the patient with the head equal to the top of the TraumaTransfer™. After moving the patient to the TraumaTransfer™, assemble the head cushion number two the same way.



4. Now you can secure the head cushions with the two velcro straps. Assemble according to the picture. NOTE! Head cushions ordered separately.



5. Assemble the VFLEXFIX™-straps according to the picture. Start with the chin and end with the forehead.



6. The patients head is now fully immobilized. The picture also shows the velcro straps that secures the head cushions and side flaps of the girdle.



7. The patients head is now in a safe and comfortable position. Please, be aware of the importance of using immobilisation cushions like TT-Pelfix™ or TT-SIP™, to prevent the body from moving on the TraumaTransfer™.



8. This image shows TT-Cover K™™ "the Sahlgrenska version". This version has a single double sided head cushion. The TT-Headfix K-Light can also be ordered as a complete cover, as TT-Cover K-Light™



ESON COMFORT  
Idé-Möbler i Landeryd AB  
Centrumvägen 7  
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051  
[info@esoncomfort.com](mailto:info@esoncomfort.com)

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved



ESON COMFORT  
"WE INVENT THE FUTURE"  
[www.esoncomfort.com](http://www.esoncomfort.com)