



FlexiSeal™ PROTECT



Utvecklad för att
skydda patienten
från en överfylld kuff



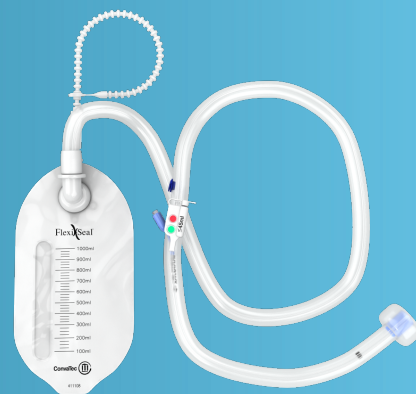

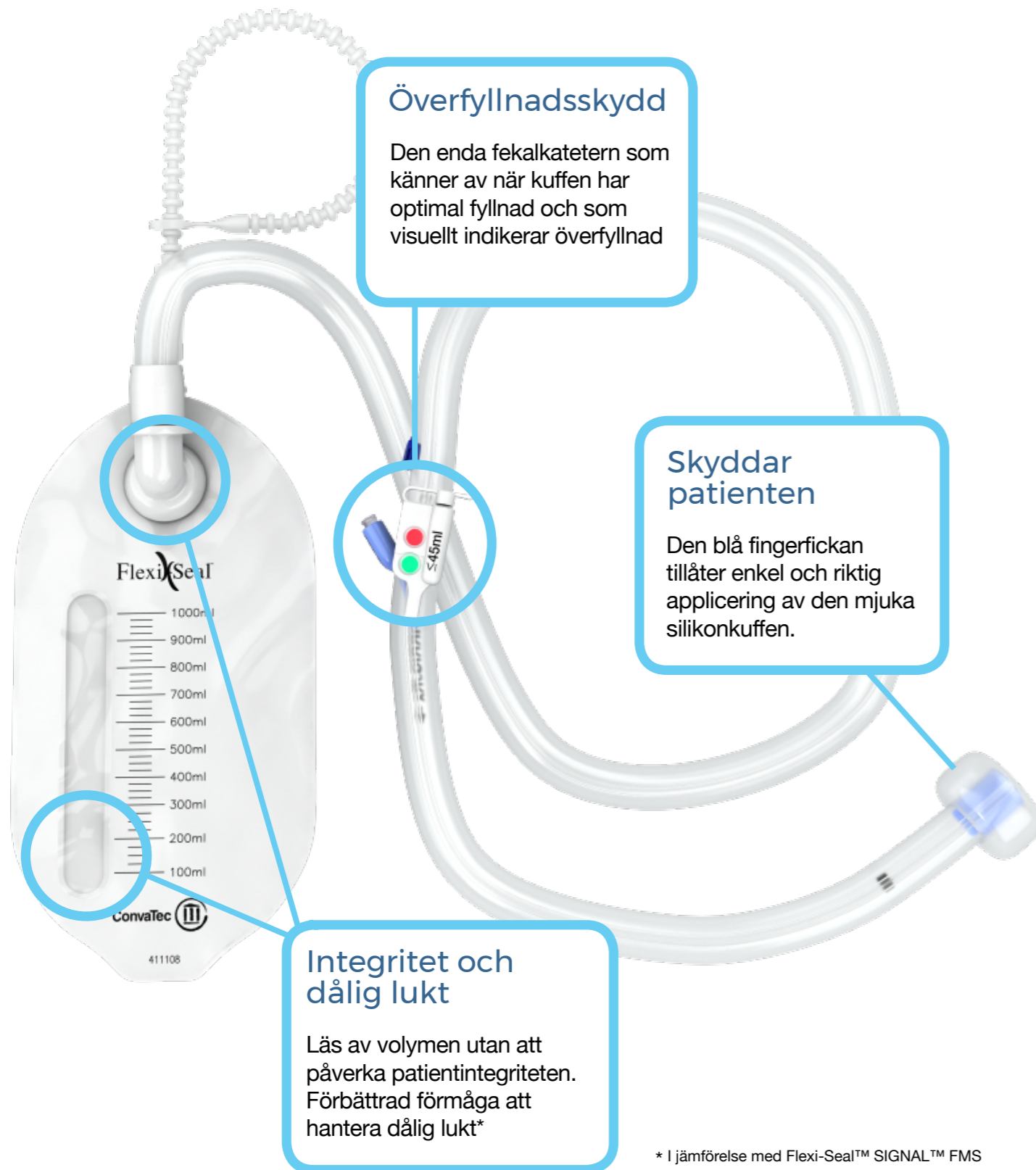
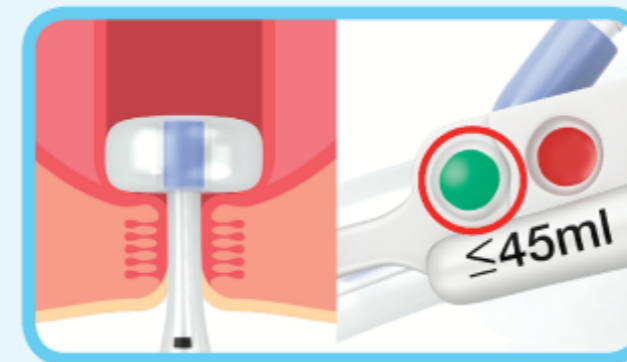
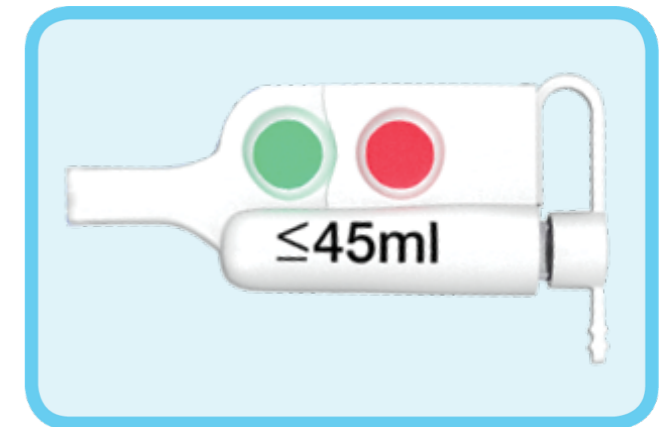
Fördelar med Flexi-Seal™ PROTECT



* I jämförelse med Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

STOPPA NÄR DEN 'POPPAR'

-  GRÖN kupol indikerar optimal påfyllning.*
-  RÖD kupol indikerar överfyllnad.
-  VIT skyddshatt på påfyllningsporten för att minska risken för förväxling med irrigationsporten.



Fyll på kuffen genom att sakta pressa samman sprutan. Den gröna kupolen "poppar" upp när kuffen når optimal fyllnad.*



Den röda kupolen "poppar" upp om kuffen blir överfylld. Överfyllnad kan medföra komplikationer. Om den röda kupolen "poppar" upp, töm kuffen helt. Både den gröna och röda indikatorn töms. Börja om påfyllningen av kuffen och stoppa så fort den gröna kupolen "poppar" upp för optimal fyllnad.

* Maximal mängd vätska för påfyllning är ≤45ml. Påfyllningen skall stoppas direkt när den gröna indikatorn "poppar" ut, vilket kan ske innan maxvolym av 45ml. Fyll aldrig mer än totalt 45ml.

Övriga fördelar med Flexi-Seal™ PROTECT FMS




Skydd mot infektion

Minskad risk för spridning av *C. difficile*, visat in vitro.¹



Skydd mot dålig lukt

Hela slangen har en barriär som förhindrar spridning av dålig lukt.²

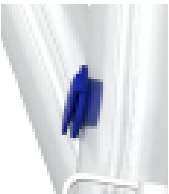

Skydd för provtagningsport

Den blå provtagningsporten tillåter säker och enkel provtagning av avföringen med minskad risk för exponering.



Privacy™ uppsamlingspåse

Kolfilter med 6x bättre förmåga att absorbera lukt molekyler.³ Filtret släpper också ut gas så att behovet av manuell tömning minskar.⁴

Beställningsinformation

Flexi-Seal™ PROTECT FMS Kit (1 kit/box, 1 påse)	421630
Privacy™ Collection påse med APS Filter (10/box)	411108

REFERENSER: 1. Jones S, Towers V, Welsby S, et al. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management 2011;57(10):38–49.2. Odor Barrier Testing. 130124-001. Data on file, ConvaTec Inc. 3. Flexi-Seal™ Privacy Bag Filter Evaluation. 121412-001. Data on file, ConvaTec Inc. 4. Minimizing the spread of *C. difficile* spores from the release of gas. February 19, 2013. Data on file, ConvaTec Inc.

För mer information, ring:

020 - 21 22 22

Måndag-Fredag 09:00 - 16.00

www.convatec.se