



Tegaderm™


IV Care Solutions

3M™ Tegaderm Advanced 9132™ antibakteriellt intravenöst fixeringsförband

Integrerad design kombinerar antibakteriellt skydd med transparens, kateterfixering och konsekvent applicering för perifera intravenösa katetrar.

Antibakteriellt skydd

Motverkar tillväxt hos den normala hudfloran på desinfikerad hud bättre än förband som inte är antibakteriella.¹

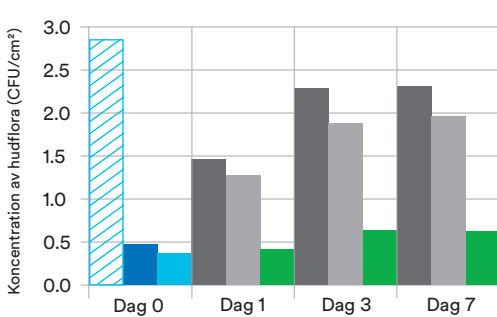

- Baslinje
- Efter 70 % IPA
- Efter 2 % CHG i 70 % IPA
- Kontrollförband, hud preparerad med 70 % IPA
- Kontrollförband, hud desinfikerad med 2 % CHG i 70 % IPA
- Tegaderm Advanced™ antibakteriellt intravenöst fixeringsförband, hud preparerad med 2 % CHG i 70 % IPA

En vattentät och steril barriär skyddar mot yttre föroreningar*

Transparent film som andas.

Antibakteriellt skydd

Klorhexidylglukonat (CHG) är integrerat i förbandets fästyta för att ge antibakteriellt skydd. Ingen extra fukt krävs för att aktivera.



Stor fixeringstejprensma med slits

Främjar konsekvent applicering och förbättrar stabiliseringen.

Formbar kant

Använder teknik framtagen för att minska risken att kanterna släpper.

Anpassningsbar nyckelhållsslits

En slits gör att kateterkanalen sitter bättre och hålls på plats.

Antibakteriellt skydd

Motverkar bevisat tillväxt hos den normala hudfloran på preparerad hud i upp till 7 dagar.

Transparens

Transparent förband som gör det enklare att tidigt upptäcka komplikationer på insticksstället.


Kateterfixering

Avsedd att minimera rörelser och rubbningar av katetern.

Enkel användning

Förbandet med CHG-fästyta är utformat för att säkerställa standardiserad och korrekt applicering.

¹In vitro-tester visar att den transparenta filmen utgör en barriär mot virus som är 27 nm eller större, så länge som förbandet är helt och inte läcker. 1. 3M data på fil. EM-05-305455

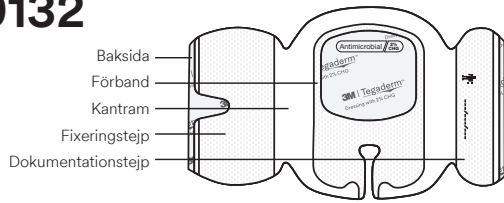

Förbered



Förbered huden enligt inrättningens arbetssätt. Se till att huden är helt torr.


Tryck



Applicering med en hand

Sträck inte förbandet vid placeringen. Dra bort baksidan från förbandet och placera förbandsfönstret över insticksstället och rikta in infusionsslangen mot slitsen. Tryck på hela förbandet med en hand för optimalt fäste samtidigt som du tar bort ramkanten med den andra handen.

Säkra

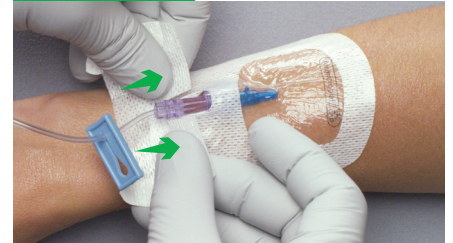

Applicera fixeringstejpen under injektionsventilen och överlappande tillbaka på förbandet. Ta bort de häftämnesfria flikarna.

Säkra



Notera informationen om förbandsbyte på dokumentationstejpen. Applicera dokumentationstejpen ovanpå förbandet, över kateterkanalerna. Ta bort de häftämnesfria flikarna. Fäst slangen med tejp.


Övervaka



Byta förbandet:

- ▶ Minst en gång i veckan
- ▶ Om förbandet börjar sitta löst eller blir smutsigt eller fuktigt
- ▶ Enligt inrättningens arbetssätt

Ta bort

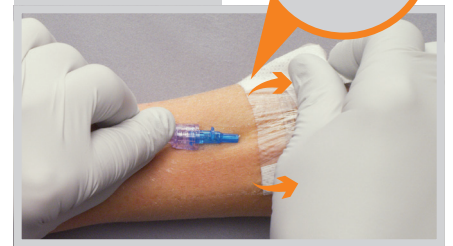

Ta bort tejprensorna. Använd en låg och långsam borttagningsteknik och börja ta bort förbandet där katetern eller slangen går ut från förbandet i riktning mot kateterns insticksställe. Undvik hudskador genom hålla förbandet lågt mot huden, istället för att dra det rakt uppåt.

Se produktens bruksanvisning för övrig viktig information.

Beställningsinformation

Produkt	Artikelnummer	Förbandets totala storlek	Antal/förpackning	Förpackningar/transportförpackning
	9132	7 cm × 8,5 cm	25	4

Gå till [3M.com/IVtraining](https://www.3m.com/IVtraining) för produktutbildning för alla 3M:s lösningar för intravenösa infarter.