


# Mepore® Film & Pad

## Transparent och absorberande filmförband

Mepore Film & Pad är ett andningsbart, transparent, självhäftande, duschbart och absorberande filmförband. Mepore Film & Pads ramsystem förenklar appliceringen av förbandet.

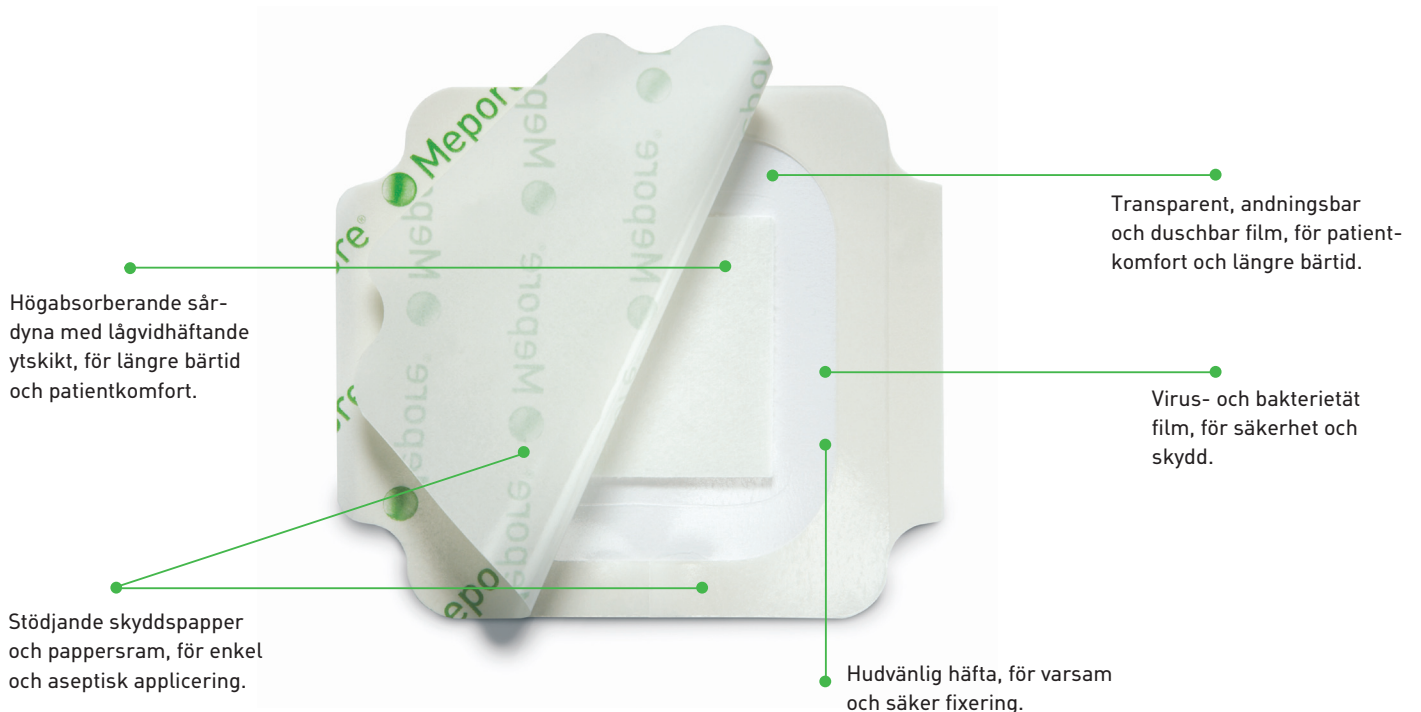


## Så här fungerar Mepore Film & Pad

Tack vare den högabsorberande sårdynan och filmens andningsbarhet har förbandet en god vätskehanteringsförmåga. Mepore Film & Pad ger ett flexibelt transparent skydd och formar sig väl efter kroppskonturen. Polyakrylathäftan är hudvänlig samtidigt som den ger en tillförlitlig fixering. Mepore Film & Pad är enkel att applicera aseptiskt, även vid användning av handskar.

## Användningsområden

Mepore Film & Pad kan användas på ett stort antal sår som är svagt till måttligt vätskande, t ex kirurgiska sår, skär- och skrubbsår.

## Så här används Mepore Film & Pad

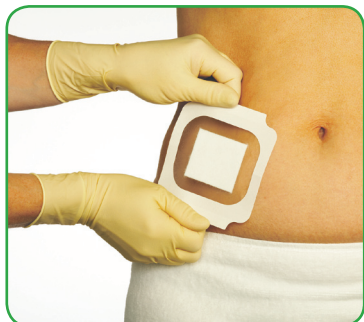

Avlägsna skyddspappret. Applicera förbandet. Sträck inte förbandet vid applicering.



Ta bort pappersramen och de två vita flikarna.



Värm med handen över förbandet under ett par sekunder så att förbandet fäster ordentligt.

## Bytesfrekvens

Bytesfrekvensen avgörs av sårets tillstånd.

## Fördelar med Mepore Film & Pad

- Lågvidhäftande sårdyna
- God absorptionsförmåga
- God vätskehanteringsförmåga
- Enkelt att applicera, även vid användning av handskar
- Formar sig väl efter kroppskonturer
- Virus- och bakterietät film
- Varsam och säker fixering
- Hudvänlig vidhäftning
- Duschbar
- Brett sortiment

## Observera

Mepore Film & Pad bör inte användas av personer som är känsliga för polyakrylat. Precis som andra självhäftande förband ska Mepore Film & Pad inte sträckas vid applicering, eftersom det kan skada huden. Såret bör kontrolleras för att upptäcka eventuella tecken på infektion i enlighet med klinisk praxis. Rådgör med sjukvårdspersonal för lämplig behandling.

## Mepore Film & Pad levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Storlek sårdyna	Avd fp	Transp fp
275100	4x5	1,5x2,5	85	340
275200	5x7, oval	2,5x4	85	340
275300	5x7	2,5x4	85	340
275400	9x10	4,5x5	30	180
275500	9x15	4,5x10	30	240
275600	9x20	4,5x15	30	240
275700	9x25	4,5x20	30	150
275800	9x30	4,5x25	25	125
275900	9x35	4,5x30	25	100
275110	4x5	1,5x2,5	5	70
275210	5x7, oval	2,5x4	5	70
275310	5x7	2,5x4	5	70
275410	9x10	4,5x5	5	50
275510	9x15	4,5x10	5	50
275610	9x20	4,5x15	5	40



Mölnlycke Health Care AB  
Box 13080, 402 52 Göteborg  
Telefon: 031-722 30 00  
www.molnlycke.com