


Semi-permeabel film<sup>1</sup>

Absorberande hydrocellulärt skum<sup>2</sup>

Icke vidhäftande<sup>3</sup> sårkontaktlager

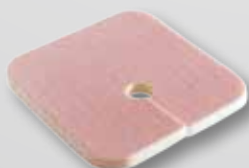

 smith&nephew  
**ALLEVYN**<sup>◇</sup>  
Non-Adhesive

# ALLEVYN® Non-Adhesive är ett förband som består av tre lager, ett högabsorberande hydrocellulärt skum<sup>2</sup> mellan en toppfilm med hög genomsläpplighet<sup>1</sup> och ett icke vidhäftande sårkontaktlager<sup>3</sup> för att kombinera patientkomfort<sup>4</sup> med effektiv vätskehantering<sup>1,2</sup>.

- En toppfilm med hög genomsläpplighet<sup>1</sup> som hjälper till att minska risken för maceration i och omkring såret<sup>5</sup>
- Icke vidhäftande sårkontaktlager<sup>3</sup> innebär att förbandet är lämpligt för skör och känslig hud<sup>3,4</sup> inkluderat epidermolysis bullosa<sup>5</sup>
- Mjukt och komfortabelt för patienten<sup>4</sup> och formbart för anatomiskt utmanande sårömråden<sup>2,4</sup>
- Speciellt utformad "hälkopp" designad att passa detta svårbandagerade område
- Tillgänglig i flera storlekar vilka kan anpassas till svårbandagerade områden
- Lämplig att använda under kompression<sup>7</sup>
- Enkel att applicera och ta bort<sup>2</sup>
- Speciellt utformat tracheostomiförband, avsett för tracheostomier eller dränage

## Indikationer

ALLEVYN Non-Adhesive är indikerat för sårbehandling av sekundärläkande, grunda, granulerande sår, svårläkta- och akuta vätskande sår, hel- eller delhudssår såsom trycksår, fotsår hos diabetiker, bensår, svampbelastade sår, infekterade sår, maligna sår, kirurgiska sår, tagställen, 1:a och 2:a gradens brännskador och epidermolysis bullosa sår.

## Applicering

Rengör såret enligt lokala riktlinjer. Välj ett förband i lämplig storlek. Rengör och förbered kringliggande hud och torka torrt. Avlägsna överflödigt hårväxt för att få bättre vidhäftning. Öppna förpackningen med ALLEVYN Non-Adhesive med ren teknik. Applicera förbandet med den vita sidan mot såret, försäkra dig om att förbandet har bra kontakt med såret och fixera med ett bandage eller film ( OPSITE® Flexifix eller OPSITE® Flexifix Gentle). Vid användning under kompression, måste förbandet anpassas till sårets storlek. ALLEVYN Non-Adhesive kan klippas för att passa utmanande områden. Använd alltid aseptisk teknik när du tillpassar förbandet. Om förbandet är klippt, försäkra dig om att allt exponerat skum täcks med lämplig film - utan att täcka hela förbandet.

## Omlägningsfrekvens

I början av sårbehandlingen ska förbandet kontrolleras ofta. Om ALLEVYN Non-Adhesive används på infekterade sår ska infektionen undersökas och behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer. Förbandet kan sitta på plats upp till 7 dagar eller tills exudatet når 1.5 cm från kanten beroende på vilket som inträffar först. För förband som är applicerade sacralt gäller 5 dagar. Området uppmanar till täta kontroller då risken för kontamination är hög. Beslutet om förbandsbyte ska fattas efter klinisk bedömning. Lokala kliniska riktlinjer ska beaktas.

## Referenser

1. Smith & Nephew data on file report: Comparison of the permeability of ALLEVYN Non-Adhesive standard and new ALLEVYN Non-Adhesive written by David Foster and Anna Rial, Feb 2006. 2. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. Kurring PA *et al.*, (1994). Br J Nurs 3(20) 1049-1053. 3. A randomised comparative pilot study to evaluate ALLEVYN hydrocellular dressings and Sorbsan Calcium alginate dressings in the treatment of diabetic foot ulcers, Baker NR, Creevy J. Presented at the 6th Annual Symposium on Advanced Wound Care, San Diego, California, 1993. 4. Clinical evaluation report ref: CE/022/ANA - A prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of ALLEVYN Non-Adhesive wound dressings. Samantha Hartwell, November 2006. 5. The clinical and physical properties of ALLEVYN Non-Adhesive dressings and the moist wound environment. 6. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010. 7. Smith & Nephew data on file 0512009.

## Försiktighetsåtgärder

Använd inte ALLEVYN Non-Adhesive tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritlösningar (e.g. EUSOL) eller väteperoxid, då dessa ämnen kan bryta ner det absorberande polyuretanut i förbandet. Om rodnad eller ömhet uppstår, avbryt behandlingen och konsultera sjukvård. ALLEVYN Heel ska inte användas i förebyggande syfte. Det är ett sårförband.

ALLEVYN Non-Adhesive är enbart för engångsbruk. Om det används på mer än en patient finns risk för korskontaminering eller infektion. Öppnad förpackning innebär att den sterila miljön är bruten, därför skall öppnade förband ej sparas för senare bruk.

## Borttagning av förband

För att avlägsna ALLEVYN Non-Adhesive, ta bort bandage eller extern fixering och lyft förbandet av såret.



## Beställningsinformation

Artikel nr	Storlek	Antal/fp
66007643	5cm x 5cm	10
66007637	10cm x 10cm	10
66007335	10cm x 20cm	10
66000093	15cm x 15cm	10
66007638	20cm x 20cm	10
66000663	40cm x 70cm	2
66007630	Heel 10.5cm x 13.5cm	5
66007640	Tracheostomy 9cm x 9cm	10

## ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.°

Wound Management  
Smith & Nephew AB  
Kråketorpsgatan 20  
431 22 Mölndal  
Sverige

www.smith-nephew.com

\*Varumärke från Smith & Nephew  
™All trademarks acknowledged  
© Smith & Nephew October 2013  
14-01870-SE

T +46 (0) 31 746 58 00  
F +46 (0) 31 87 05 31



Licensed by Eucomed