


## Physiotulle® Ag

### Beskrivelse

Beskrivelse Physiotulle® Ag er et sårkontaktag uden klæber med sølv som den aktive komponent. Bandagen består af et tætvet polyester-lag imprægneret med hydrokolloidfibre (CMC) og en vaseline-gel, som opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø og sikrer atraumatiske bandageskift. Sulfadiazin sølv er jævnt fordelt i vaselinen, som frigives til sårbunden, når bandagen absorberer såreksudatet. Ved kontakt med sårekssudat absorberer bandagen væsken, og sølvet frigives til sårbunden. Frigivelsen af sølv varer ved i hele bæretiden (op til 3 dage).

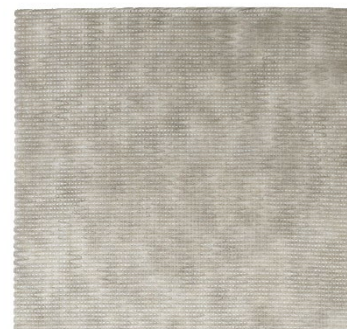

### Anvendelse

Anvendes til lavt til kraftigt væskende sår, sår med forsinket sårheling på grund af bakterier eller til sår, hvor der er infektionsrisiko. Bandagen kan anvendes til kroniske sår (bensår, tryksår og diabetiske fodsår) samt ved akutte sår (brandsår, donorsteder, post-operative sår samt hudafskrabninger). Physiotulle® Ag tørrer ikke ud eller hænger fast i sårbunden og kan således fjernes på atraumatisk vis. Physiotulle® Ag kan anvendes sammen med en række absorberende sekundærbandager.

### Produktfakta

Steril

### Sikkerhed

Physiotulle® Ag er indiceret til lavt til kraftigt væskende kroniske og akutte sår. Physiotulle® Ag kan bruges til at forbedre behandlingen af sår med forsinket heling pga. kritisk kolonisering eller sår med risiko for infektion. Er sikker til brug ved MR-scanning.

### Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
8078195	Physiotulle Ag 10x10	10	CR4494
8078196	Physiotulle Ag 15x15	10	CR4495

Der tages forbehold for trykfejl - Opdateret d.27-06-2022