

Beskrivelse

Reference

98460-02 (12 ml Luer Slip-sprøjte inkluderet)

Mål

Samlet længde: 18 cm

Dobbeltlumen slange: 0,4 cm udvendig diameter

Krave: 1,8 cm udvendig diameter

Egenskaber

Udstyret består af en sonde med dobbeltlumen fyldt med bariumsulfat for at opnå røntgenfaste egenskaber. En silikoneballon med forsænket spids er svejset på den ene ende, med trykte mærker, der viser et område på 1-5 cm i trin på 0,25 cm. Den modsatte ende har et svejset silikonehoved med to åbninger/porte. Den ene port er en ballonventil til oppustning af ballonen med 3 ml indhold, og den anden åbning er til OTW-funktion (Over-The-Wire).

Indikation

Bruges til at måle længden af stomikanalen. Længden af stomaen, eller afstanden mellem den indvendige væg af kropshulrummet og patientens yderste hudlag, varierer fra person til person, som den varierer mellem en voksen og et barn. Målingen giver mulighed for at vælge den rigtige længde af MIC-KEY*-ernæringssonde med lav profil (MIC-KEY* G-, J- eller GJ-sonde).

Se brugsvejledningen.

Kontraindikation

Dette medicinske udstyr må ikke bruges flere gange, genprocesseres eller gensteriliseres.

Må ikke bruges til andre formål end måling af stomikanalens længde.

Hovedmaterialer

Grundmaterialer: Silikone, polyesterimid, polycarbonat, bariumsulfat


Sprøjte: Polypropylen

Indeholder ikke naturlig gummilatex.

Indeholder ikke DEHP/DBP/BBP.

Sterilisation

Produktet er steriliseret med ethylenoxid (ETO).

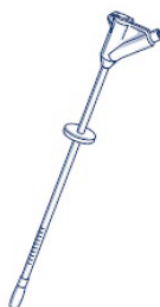

Emballage

Hver enhed er pakket i en Tyvek-pose.

10 poser er pakket i papæske (forsendelsesæske).

Æskens størrelse: (LxBxD) 31,8 x 24,1 x 8,9 cm

Æskens vægt: 485 g (1,07lbs)

Stregkodning: GTIN-symbolologi, lineær, på forsendelsesæske og enhedsemballage.

Varenummer	Enkeltenhed	Papæske
98460	00350770984605	10350770984602

Produktion

Fremstillet i Mexico.

Produktionsstedets kvalitetssystem opfylder ISO 13485.

Lovgivningsmæssige oplysninger

CE-mærket produkt i henhold til direktiv 93/42/EEC om lægeudstyr.

Udstyrsklasse: IM, steril og måling

Bemyndiget organ: BSI (2797)

Opbevaring

Opbevares et tørt og køligt sted, væk fra intense varmekilder. Lad produktet blive i forsendelsesæsken, så længe det er praktisk muligt.

Holdbarhed

3 år fra produktionsdato.