

OPLEV NYE SYNERGIER TIL STERILCENTRALEN 5 ENZYMER I ET UNIKT PRODUKT

Aniosyme Synergy 5

UNIKT 5-ENZYMATISK DETERGENT TIL MANUEL OG AUTOMATISK GENBEHANDLING

Aniosyme Synergy 5 er det første detergent med 5 enzymer til flere processer. Giver fremragende resultater i manuel og automatiske genbehandlingsprocesser, Aniosyme Synergy 5 giver mulighed for bare et enkelt produkt til sterilcentralen.

Aniosyme Synergy 5:

- **UNIKT** - 5-enzymatisk detergent med bredspektret virkning
- **EFFEKTIVT** - Virker efter 5 minutter i instrumentvasker uanset vandkvalitet
- **SYNERGIEN** - Vores første produkt for både manuel og automatisk genbehandling på sterilcentraler



Aniosyme Synergy 5

UNIKT 5-enzymatisk detergent til manuel og automatisk genbehandling



Aniosyme Synergy 5
5 L dunk

EFFEKTIVT

Dokumenteret virkning, effektivt efter 5 minutter kombineret med fremragende materiale kompatibilitet.

ENZYMATISK

Fjerner alle former for forurening ved fleksibel dosering på grund af produktets specielt udviklede 5 enzymatiske formel.

EFFEKTIVT

Den laveste koncentrationseffektivitet påvist fra 0,1 til 0,5 giver fremragende rengøringsydelse.

PRODUKTEGENSKABER

- | | | |
|--|------|---------------------|
| • Densitet | 20°C | 1,1 g / ml |
| • pH værdi* (koncentrat) | 20°C | 7,89 |
| • pH område* (opløsning, 1 - 5 ml/l) | 20°C | 6,89 - 7,29 |
| • Konduktivitet (opløsning, 1 - 5 ml i demineraliseret vand) | 20°C | 0,08 - 0,33 mS / cm |

*Måling af pH-værdien under driftsbetingelser - altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMATION

PRODUKT	FORPAKNING	VARENUMMER
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 liter	3104340
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 Liter dunk	3104360
Aniosyme Synergy 5	200 liter fad	3104390



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark

INSTRUMENT GENBEHANDLING

ANVENDELSESOMRÅDE

Detergent med 5 enzymer til rengøring af kirurgisk og medicinsk udstyr, endoskoper og medicinsk udstyr, i blødlægning, ultralydstanke, automatiske vaskedekontaminatorer og vasketunnel.

BRUGSVEJLEDNING

Manuel brug

- Koncentreret opløsning til professionel brug
- Anvend ved en brugsopløsning fra 0,5% til 2%
- Effektiv efter 5 minutter
- Tilpas kontakttiden og temperaturen i brugsopløsningen i henhold til smudsgraden. Børst om nødvendigt. Skyl grundigt
- Maksimal temperatur: 35°C

Automatisk brug

- Koncentreret opløsning til professionel brug
- Anvend ved en brugsopløsning fra 0,1% til 0,5%
- Effektiv efter 5 minutter
- Tilpas koncentrationen, kontakttiden og temperaturen på brugsopløsningen efter graden af tilsmudsning og den anvendte rengøringsmetode. Skyl grundigt -programindstillinger
- Maksimal temperatur: 60°C

INDEHOLDER

Non-ioniske og kationiske overfladeaktive stoffer, stabiliseringsmiddel, enzymatiske kompleksdannere.

OPBEVARING


Farligt - respekter de anvendte forholdsregler (udarbejdet i henhold til de gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: mellem +5°C og +25°C.

CERTIFIKATER

Certifikater kan rekvireres.

MEDICINSK UDSTYR - ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs label og produkt information grundigt.

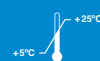

UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL
ANVENDELSE

ECOLAB®

www.ecolab.dk