

# Cutimed® Siltec®

Closing wounds. Together.

Håndtering af  
ekssudat  
kræver den  
bedste støtte

Perfekt  
balance til  
forskellige  
mængder

Med  
Cutimed Siltec



**THERAPIES. HAND IN HAND.**

**BSN** medical


an SCA company

# CUTIMED®

## SKÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL DEN ENKELTE PATIENT

Der er mange forhold, der skal tages i betragtning ved sårheling, og effektiv væskehåndtering er en afgørende faktor.

Væskeniveauet varierer i løbet af sårhelingsprocessen, og for at opnå det bedste resultat er det derfor vigtigt at anvende en forbinding, som er tilpasset til sårets væskeniveau.

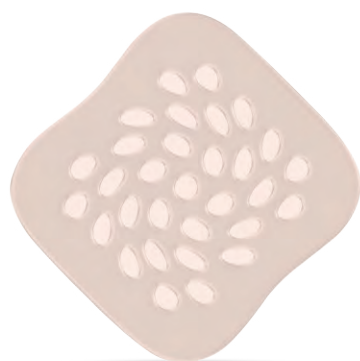

Cutimed® HydroControl®  
Hydropolymerforbinding



Cutimed® Siltec® Forbinding  
af polyuretanskum



Cutimed® Sorbion®  
Superabsorberende forbinding

### HÅNDTERING AF SÅRVÆSKE

LAV MÆNGDE

HØJ MÆNGDE



# CUTIMED® SILTEC®

## PERFEKT SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE KOMPONENTER

Den velafvejede kombination af forskellige materialer gør Cutimed® Siltec® til en polyuretanskumforbinding med høj sugeevne, som du kan stole på.

Forbindingen er udformet til at give en fremragende væskehåndtering, og det innovative design tilbyder patienterne nogle klare fordele, som giver dem øget livskvalitet og får dem til at overholde behandlingen.



Effektiv håndtering af sårveske takket være den lodrette absorption af forskellige typer og mængder af sårveske.



Pålidelig vedhæftning takket være den fuldt dækkende silikonebelægning.



Anatomisk form, der tilpasser sig til kroppens konturer og giver den bedste komfort.

## INDIKATIONER\*

Cutimed® Siltec® er udformet til at tilpasse sig til sår med en lav, moderat eller høj mængde sårveske med varierende viskositetsgrad, herunder meget høj viskositet.



Venøse eller arterielle  
bensår



Tryksår



Fodsår hos en  
diabetiker



Hudtransplantat



Donorsted til  
hudtransplantation

\* Du kan læse om yderligere indikationer i brugsanvisningen.

# POLYURETANFILM

## HØJ ÅNDBARHED




Cutimed® Siltec® giver pålidelige resultater uafhængigt af mængden af sårveske eller graden af viskositet. Polyuretanfilmen tilpasser sig til fordampningen i takt med mætningsgraden. Dermed beskyttes sårbunden mod overskydende fugt, og der skabes et optimalt helingsmiljø, også når væskenniveauet ændres, eller hvis væsken er meget viskøs.

Forbindingen sikrer en relevant fordampning uafhængigt af forbindens mætningsgrad.

- Tilpasser MVTR\*, efterhånden som væskemængden skifter
- Forhindrer lækage
- Mætningsgraden kan nemt ses
- Unødvendige forbindingsskift undgås
- Tåler brusebad<sup>1</sup> og er vandafvisende<sup>1,2</sup>


<sup>1</sup> Cutimed® Siltec® med hæftkant

<sup>2</sup> Cutimed® Siltec® uden hæftkant

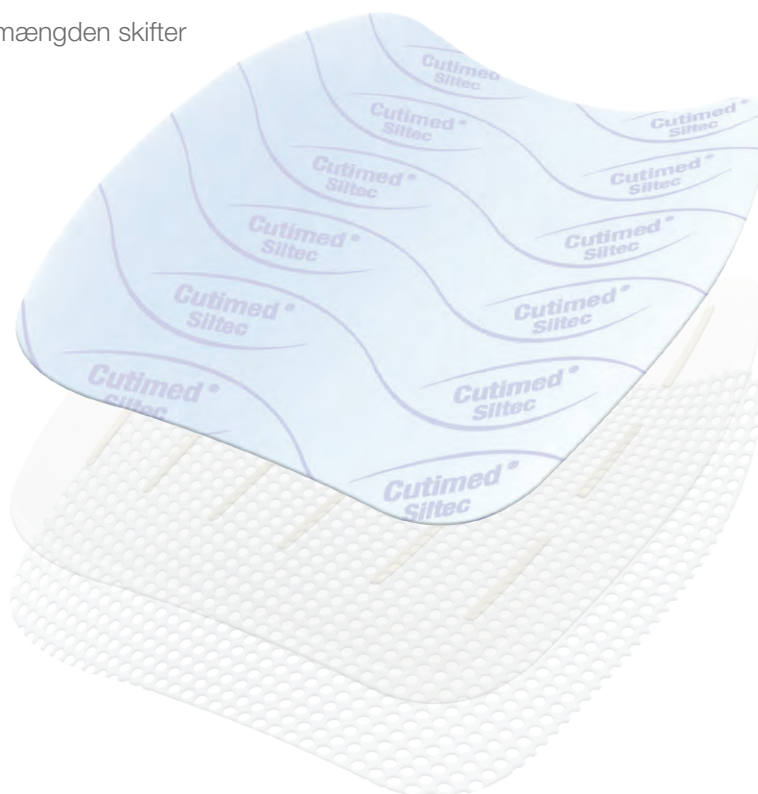


Høj mængde sårveske

Lav til moderat mængde sårveske

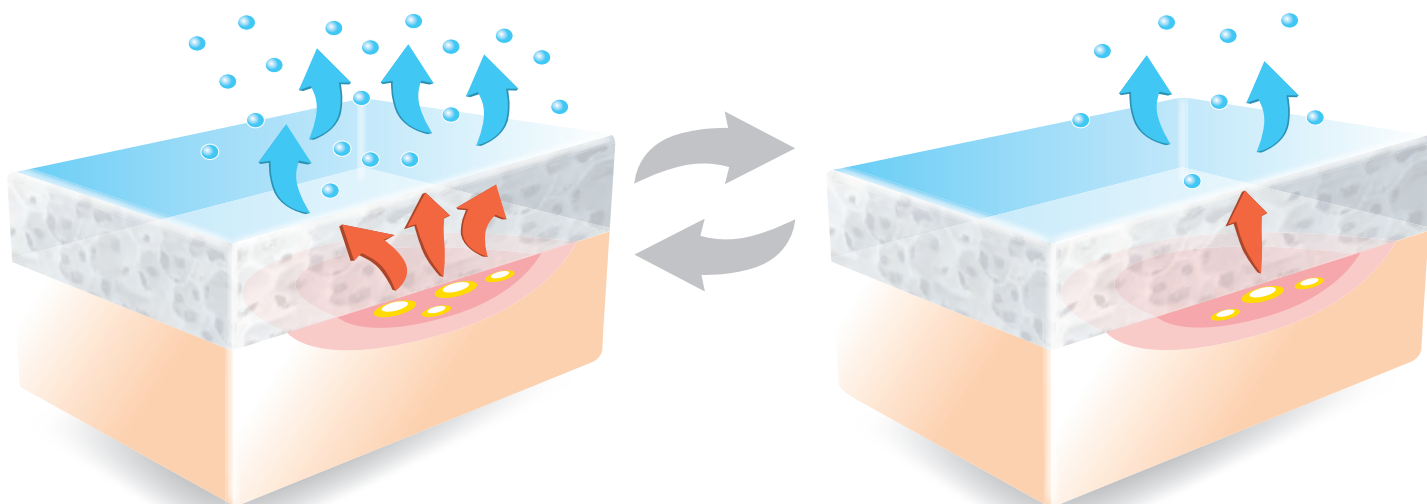



# SUPERABSORBENTER

## ABSORBERER OG BINDER SÅRVÆSKEN

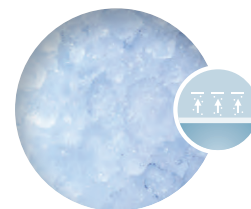


Takket være teknologien med superabsorbenter bindes sårvesken på en sikker måde, også under kompression, hvilket mindsker risikoen for lækage og maceration.

- Pålidelig absorption ved små, moderate og store mængder sårveske.
- Binder sårvesken effektivt, også under kompression
- Tilpasser sig til skiftende væskemængder
- Superabsorbenterne er smeltet sammen med polyuretanskummet, hvilket betyder, at forbindingen kan klippes til
- Færre forbindingsskift

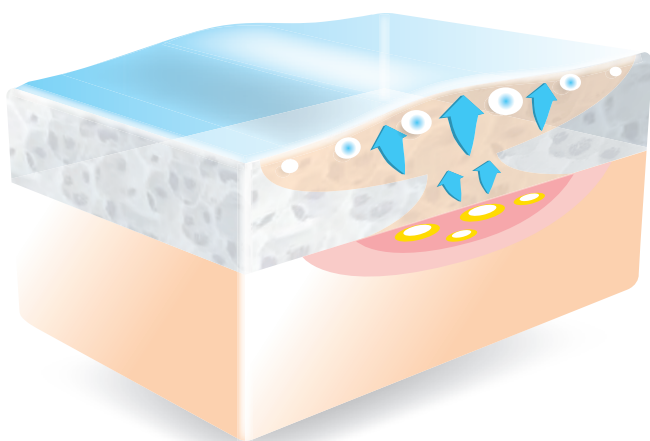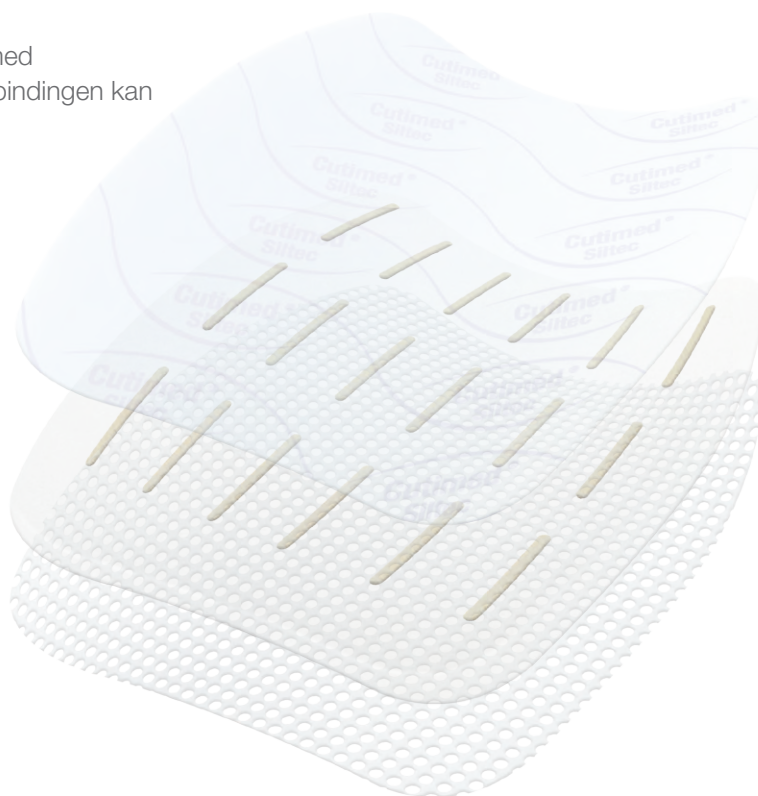



# INTELLIGENT SKUM

## TRÆKKER HURTIGT VÆSKEN OP TIL SKUMKERNENS ØVERSTE DEL

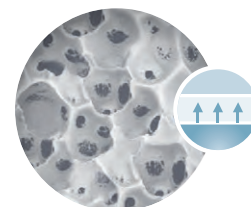


Skumstrukturen i Cutimed® Siltec® sikrer en effektiv, lodret absorption, uden at såret tørrer ud, hvilket resulterer i en sikker behandling. Forbindingen har en rigtig god evne til at absorbere meget viskøs sårveske. Det skyldes det perforerede silikonelag og skumkernens store porer.

- Sikrer effektiv, lodret absorption og beskytter huden mod maceration
- Absorberer væske med lav til meget høj viskositet

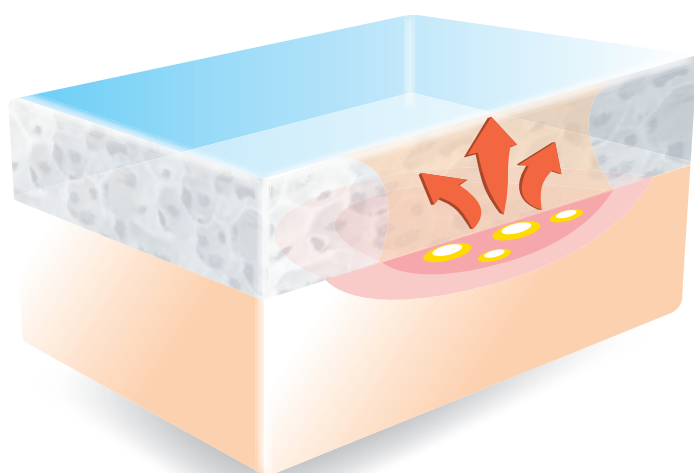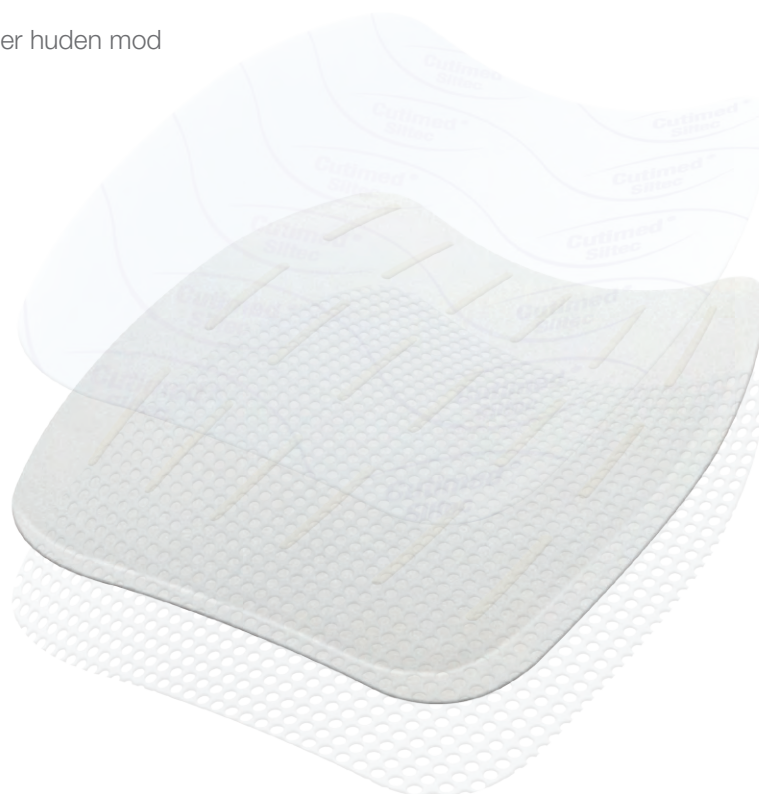

Cutimed® Siltec® med lodret absorption



# PERFORERET SÅRKONTAKTLAG AF SILIKONE

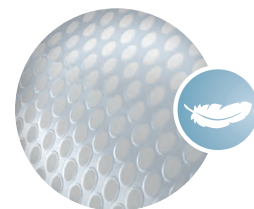

## SKÅNSOM VEDHÆFTNING

Det perforerede, vedhæftende silikone lag tillader væskeoverførsel, samtidig med at det fungerer som en effektiv barriere, der gør, at vævet ikke gror fast til skumkernen. Dermed beskyttes det nydannede, epiteliserede væv.


- Sår væsken passerer nemt igennem, uafhængigt af viskositetsgraden
- Skånsom vedhæftning
- Atraumatiske og mindre smertefulde forbindingskift for patienten

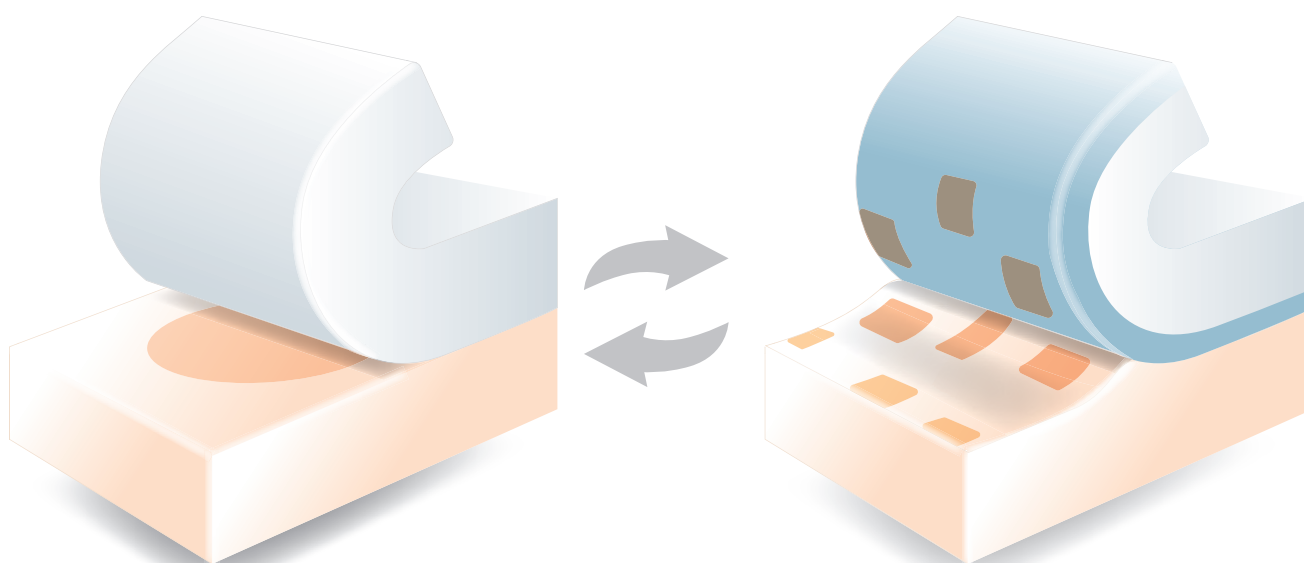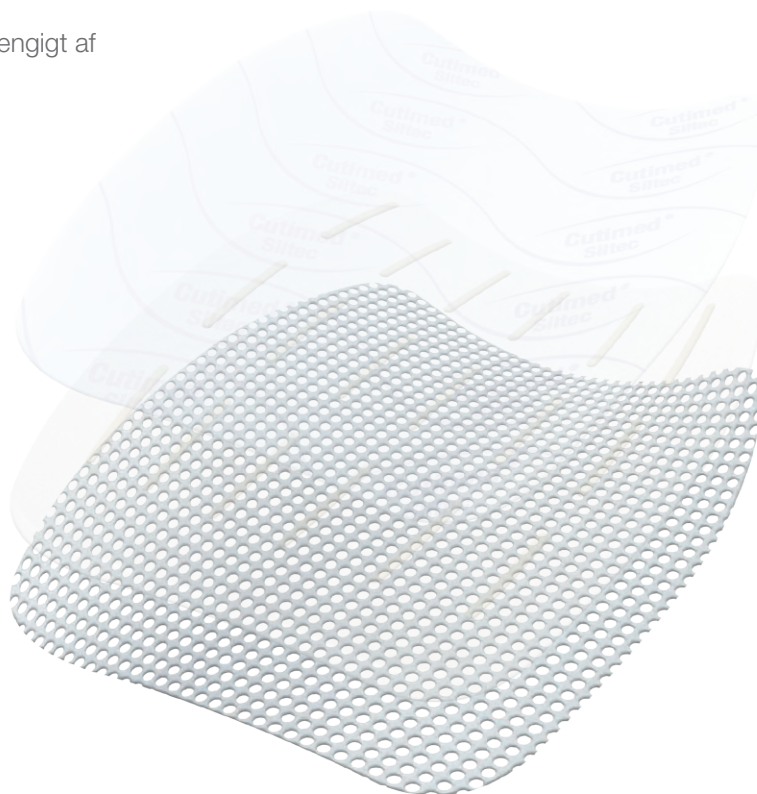

Silikonevedhæftning

Akrylvedhæftning

# PERFEKT SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE KOMPONENTER

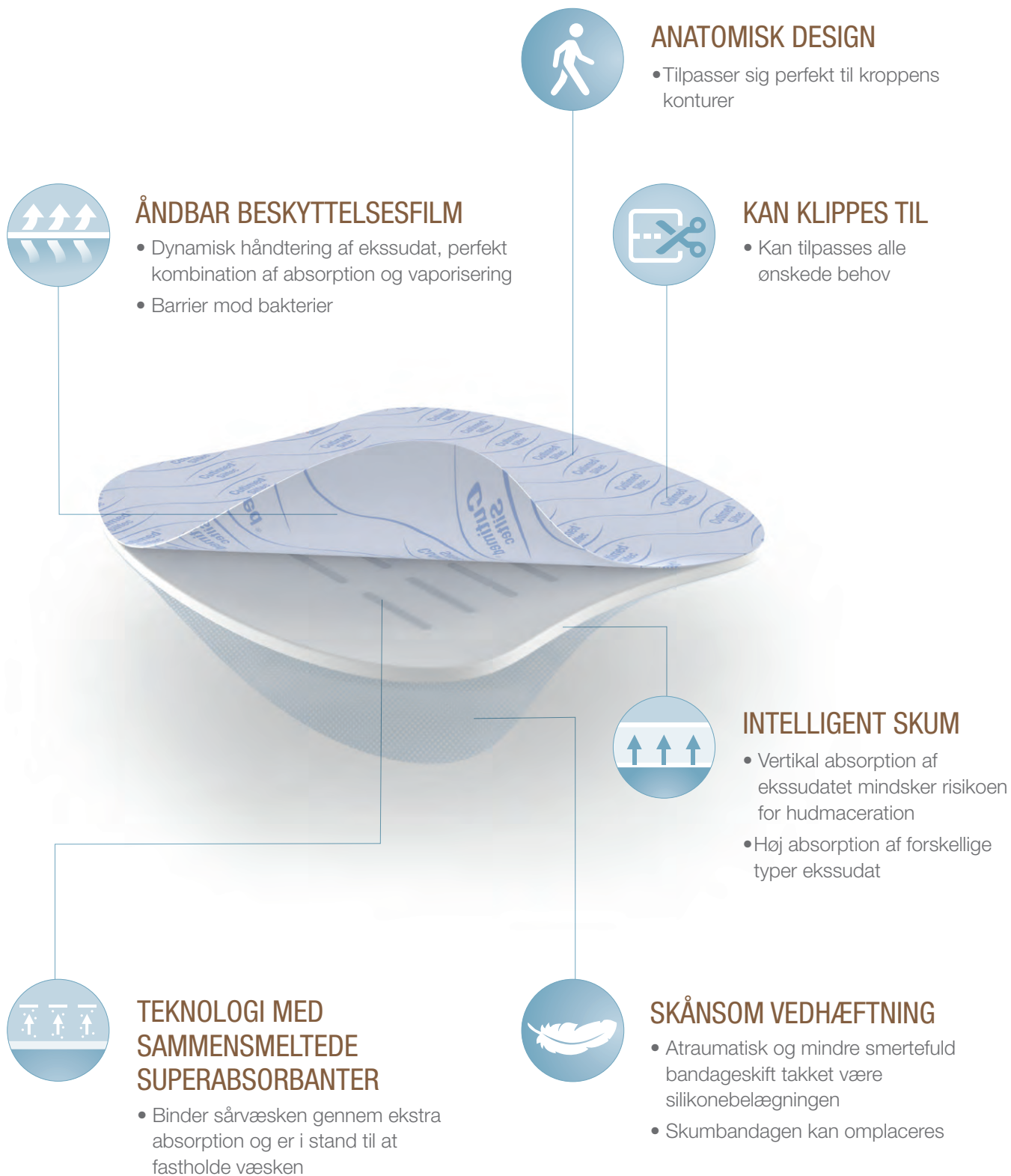



# FLEKSIBEL PÅFØRING

## ANATOMISK TILPASSEDE FORMER


Forbindingen skal passe til de særlige, uregelmæssige sårformer, følge kroppens konturer og tillade en vis grad af kropsbevægelse. Samtidig skal forbindingen være i tæt kontakt med sårbunden for at skabe et optimalt helingsmiljø.

Den bløde og smidige formbarhed sikrer, at forbindingen tilpasser sig til forskellige kropskonturer. Den anatomiske form og de afrundede hjørner gør, at forbindingen sidder godt, uanset hvor den påføres.



# CUTIMED® SILTEC®

FORSKELLIGE SÅR KRÆVER FORSKELLIGE LØSNINGER

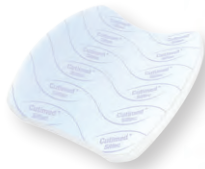


## CUTIMED® SILTEC®

### DEN BLIDE

Superabsorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning.

- Ideel til sart hud, f.eks. kortison belastet hud eller pergamenthud

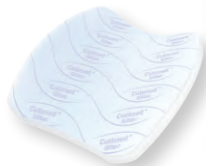


## CUTIMED® SILTEC® PLUS

### HJÆLPEREN

Superabsorberende silikone skumbandage med forstærket klæb, om sikrer en bedre vedhæftning.

- Pålidelig vedhæftning sikrer nem applicering
- Særligt velegnet til svært tilgængelige sår

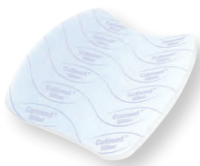


## CUTIMED® SILTEC® L

### DEN LETTE

Tynd, absorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning.

- Velegnet til sår med lav til moderat ekssudatmængde på svært tilgængelige steder på kroppen, f.eks. mellem tærne eller i hudfolder under brystet eller i lyske-regionen

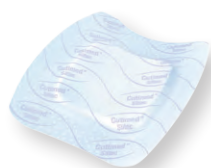

## CUTIMED® SILTEC® B

### DET SIKRE VALG

Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant.

- Pålidelig og veltolereret vedhæftning
- Kan nemt omplaceres samt atraumatisk ved brug
- Kan anvendes under bruseren



## SPECIALFORMER



### CUTIMED® SILTEC® B OVAL

Superabsorberende oval silikone skumbandage med silikone klæbekant.

- Pålidelig og veltolereret vedhæftning
- Den ovale form tilpasser sig perfekt til kroppens konturer
- Kan anvendes under bruseren



### CUTIMED® SILTEC® PLUS HEEL 2D

Superabsorberende silikone skumbandage til hælen med forstærket klæb, som sikrer en bedre vedhæftning.

- Pålidelig vedhæftning sikrer nem applicering
- Særligt velegnet til svært tilgængelige sår
- Det ekstra tykke skum (7 mm) polstrer såret og virker trykafastende



### CUTIMED® SILTEC® HEEL 3D

Superabsorberende silikone skumbandage med blid vedhæftning, som passer til hælen.

- Anatomisk formet til hurtig og nem påsætning
- Det ekstra tykke skum (7 mm) polstrer såret og virker trykafastende



### CUTIMED® SILTEC® SACRUM

Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant, som passer til området omkring sacrum.

- Anatomisk formet bandage med ekstra bred silikone klæbekant
- Polstrer såret og virker trykafastende
- Kan anvendes under bruseren






# CUTIMED® SILTEC®

## BESTILLINGSOVERSIGT

	Sårpude størrelse	Størrelse	Varenr.	Antal	PZN	
<b>Cutimed® Siltec®</b> Superabsorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning 		5 x 6 cm	73285-00	10	100	
		10 x 10 cm	73285-01	10	100	
		10 x 20 cm	73285-02	10	100	
		15 x 15 cm	73285-03	10	100	
		20 x 20 cm	73285-04	5	50	
<b>Cutimed® Siltec® Plus</b> Superabsorberende silikone skumbandage med SoftTack teknologi, som giver en forstærket vedhæftning 		5 x 6 cm	73288-00	10	100	
		10 x 10 cm	73288-01	10	100	
		10 x 20 cm	73288-02	10	100	
		15 x 15 cm	73288-03	10	100	
		20 x 20 cm	73288-04	5	50	
<b>Cutimed® Siltec® L (Light)</b> Tynd, absorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning 		5 x 6 cm	73283-00	10	100	
		10 x 10 cm	73283-01	10	100	
		15 x 15 cm	73283-02	10	100	
<b>Cutimed® Siltec® B (Border)</b> Superabsorberende silikone skumbandage med silikone klæbekant 		4 x 4 cm	7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	100
		6 x 6 cm	10 x 10 cm	73284-05	10	100
		5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	73284-06	10	100
		8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	100
		10 x 10 cm	15 x 15 cm	73284-02	10	100
		12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	50
		16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	50
<b>Specialformer</b>						
<b>Cutimed® Siltec® B Oval</b> Superabsorberende, oval silikone skumbandage med silikoneklæbekant 		6,0 x 3,0 cm	10 x 7 cm	73284-14	12	12
<b>Cutimed® Siltec® Plus Heel 2D</b> Superabsorberende silikone skumbandage med Soft-Tack teknologi, som giver en forstærket vedhæftning 			16 x 24 cm	73288-05	5	50
<b>Cutimed® Siltec® Heel 3D</b> Superabsorberende silikone skumbandage med blid vedhæftning, som passer til hælen 			16 x 24 cm	73286-01	5	50
<b>Cutimed® Siltec® Sacrum</b> Superabsorberende silikone skumbandage med silikonekant, som passer til området omkring sacrum 		11,6 x 9,7 cm	17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	50
		16,6 x 14 cm	23 x 23 cm	73287-01	5	50

Cutimed® Siltec®  
er velegnet til::

**Sårfase**  
 Fibrinbelægning  
 Granulation  
 Epitelisering

**Eksudatmængde**  
 Lav til moderat  
 Moderat til høj

**Sårddybde**  
 Overfladisk

Du kan finde komplette anvisninger i sikker brug af disse produkter på indlægssedlen.

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal  
Tlf: 33 36 35 34 · Fax: 33 36 35 31

kundeservice.dk@bsnmedical.com  
www.bsnmedical.dk

**BSN**medical

an SCA company