



Katetri, jonka he tarvitsevat  
Hoito, jonka haluat antaa

## BD Neoflon™ Pro -IV-katetri

IV-katetri, joka on suunniteltu  
vastaamaan vastasyntyneiden ja  
lapsipotilaiden erityistarpeisiin.



# BD Neoflon™ Pro -IV-katetri

## Huomaavainen hoito vaatii harkittuja innovaatioita

He ovat ehkä pieniä, mutta vastasyntyneet ja lapsipotilaat vaativat ainutlaatuisia klinisiä taitoja ja erikoisvälineitä. BD kehitti BD Neoflon™ Pro -IV-katetriin innovaatioita, jotka tukevat pienimpien potilaidesi tarvitsemaa hoidon tasoa.

### Paranna asetuksen onnistumista Neoflon™ Pro -katetrilla

Sujuva IV-katetrin asetus on tärkeää kaikille potilaille, mutta se voi olla erityisen vaativaa vastasyntyneille. Heidän pienien laskimoidensa takia asetus voi olla haastavaa. Painetta lisää vierellä seisovat huolestuneet vanhemmat, jolloin onnistunut asetus tuntuu vielä tärkeämmältä.

BD Neoflon™ Pro -katetrin patentoitu muotoilu ja innovatiivinen materiaali on suunniteltu sujuvampaan ja kivuttomampaan asetukseen lapsen herkkiin laskimoihin. BD Neoflon™ Pro -katetreissa on lyhyempi neula ja pehmeämpi kanyyli, jossa on kapeneva kärki ja patentoitu liukaste järjestelmä asetuksen epämukavuuden vähentämiseksi\*.

BD Instaflash™ -neulateknologia sisältää lovellisen neulan, joka on suunniteltu parantamaan asetuksen onnistumista. Nopean veren visualisoinnin avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat vahvistaa välittömästi pääsyn suoneen. Tämä voi parantaa asetuksen onnistumista, mikä puolestaan vähentää asetusyritysten lukumäärää.



### Suojele pieniä laskimoita pidemmillä käyttöajoilla

BD Neoflon™ Pro -katetri on valmistettu patentoidusta BD Vialon™ -katetrimateriaalista. BD Vialon™ -materiaalin ainutlaatuiset ominaisuudet pehmentävät sitä jopa 70 %1 suonessa, mikä mahdollistaa pidemmät käyttöajat ja vähentää mekaanisen laskimotulehduksen mahdollisuutta jopa 50 %:lla<sup>2</sup>.


Ensimmäisellä kerralla onnistunut IV-katetrin asetus voi olla erityisen tärkeää vastasyntyneille potilaille, joiden verisuonia voi olla vaikea löytää. Helppo asetus ja pidemmät käyttöajat tarkoittavat sitä, että nämä potilaat kokevat todennäköisemmin vain yhden kanyloinnin yhden sairaalajakson aikana.

### Tuttu tekniikka, jonka terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat ennestään


BD Neoflon™ Pro -katetri hyödyntää asetustekniikkaa, jota terveydenhuollon ammattilaiset ovat jo tottuneet käyttämään. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet antavat lisätarkkuutta ja hallinnan tunteen, joita arvostetaan haastavassa vastasyntyneiden ja lasten hoidossa.

*Tukemalla terveydenhuollon ammattilaisten taitoa vähentää potilaan kipua ja epämukavuutta BD Neoflon™ Pro -IV-katetri on suunniteltu auttamaan organisaatioita osoittamaan sitoutumisensa potilaan hoitoon.*


BD Instaflash™  
-neulateknologia, joka  
vahvistaa välittömästi  
pääsyn suoneen

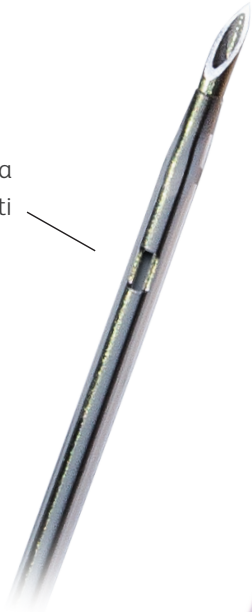

Irrotettava  
siivekeklipsi tuttua  
asetustekniikkaa  
varten

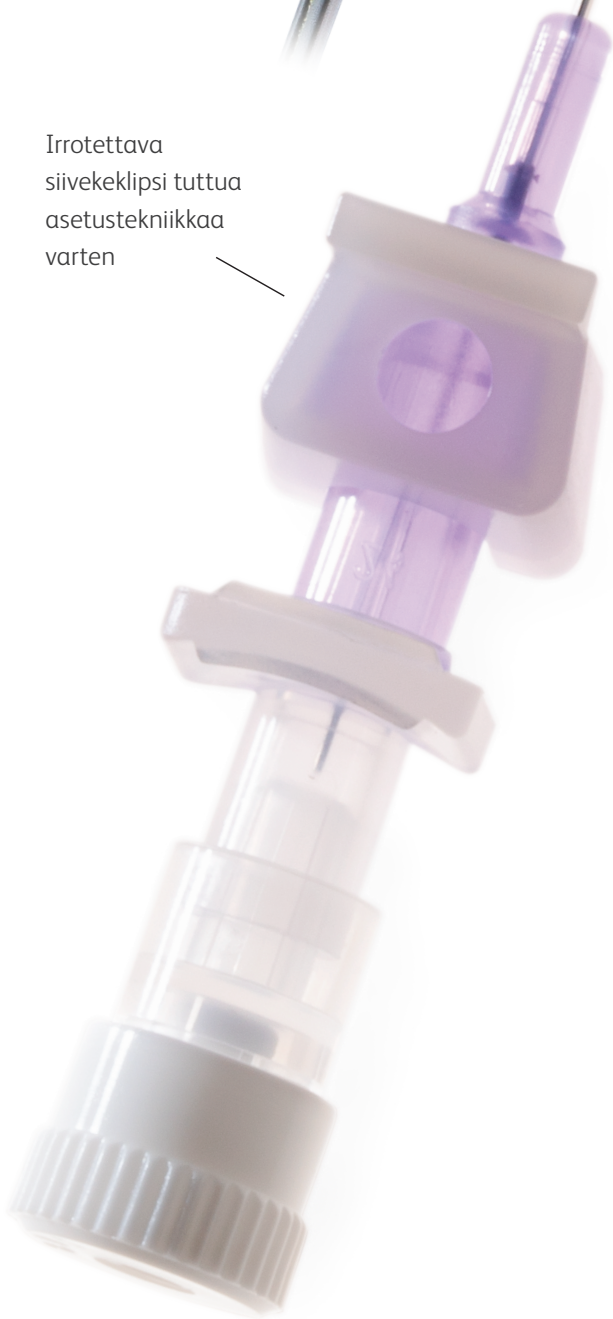

BD Vialon™  
-katetrimateriaali

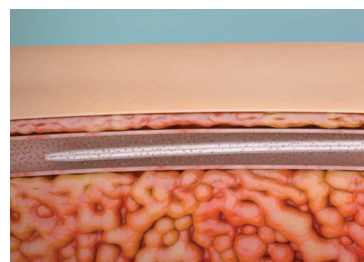

BD Vialon™ -katetrimateriaali  
pehmenee jopa 70 % suoneissa.



# BD Neoflon™ Pro -IV-katetri



BD Neoflon™ Pro -IV-katetri, G-koko 24



BD Neoflon™ Pro -IV-katetri, G-koko 2

Viitteet	G-koko	Väri	Katetrin pituus (mm)	Ulkohalkaisija (mm) <sup>3</sup>	Sisähalkaisija (mm) <sup>3</sup>	Virtausnopeus (ml/min)	Yksikköä rasiassa/laatikossa
391380	24 G	Keltainen	19	0.72	0.56	19	50/500
391379	26 G	Violetti	19	0.62	0.47	14	50/500

## Laitteet korkeatasoisinta hoitoa varten

BD Neoflon™ Pro - IV-katetri kuuluu BD:n katetrivalikoimaan. Tuotteet on suunniteltu huolellisesti tehokkaiksi välineiksi, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarjota parempaa hoitoa. Jokaiseen ratkaisuun on suunniteltu edistyneitä ominaisuuksia, mikä auttaa organisaatiotasi tarjoamaan korkeatasoisimman hoidon vähentäen samalla asetusten lukumäärää ja tarpeettomia IV-aloituksia potilasta kohden.

\* Verrattuna ei-kapenevaan kärkeen

1 Data on file at BD.

2 Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114:845-854.

BD Oy • Äyritie 18 • 01510 Vantaa • bdsuomi@bd.com

[bd.com/fi](https://bd.com/fi)

© 2021 BD. BD, BD-logo ja kaikki muut tavaramerkit ovat Becton, Dickinson and Company -yrityksen omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. 0000CF04060 Versio 1. Helmikuu 2019.