

evercare[®] inLine Painovoimatoiminen infuusiolaite, ilmausläppä, FilterStop, PVC-vapaa

REF: 10700, 10701, 10702

evercare[®] inLine Painovoimasetit ovat steriilejä kertakäyttötuotteita, joilla nesteitä annetaan suonensisäisesti potilaan verisuonistoon. Niiden toinen pää yhdistetään infuusiolähteeseen ja toinen infuusiolaitteeseen, josta on verisuoniyhteys. Neste siirretään painovoiman avulla ja virtausnopeutta säädetään rullapuristimella. Sopii lasipulloille ja muovipusseille tai -pulloille.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pyörivä luer lock-liitin




Tuotenumero	Kuvaus	Koko letku sisä/ulko läpimitta P(pituus)	Täyttövolyymi (ml)	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
10700	Painovoimatoiminen infuusiolaite, ilmausläppä, FilterStop, PVC-vapaa	Ø 3/4,1 mm, L 180cm	0,065	20 / 80
10701	Painovoimatoiminen infuusiolaite, ilmausläppä, FilterStop, PVC-vapaa	Ø 3/4,1 mm, L 220cm	0,065	20 / 80
10702	Painovoimatoiminen infuusiolaite, ilmausläppä, FilterStop, PVC-vapaa	Ø 3/4,1 mm, L 320cm	0,065	15 / 60

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.

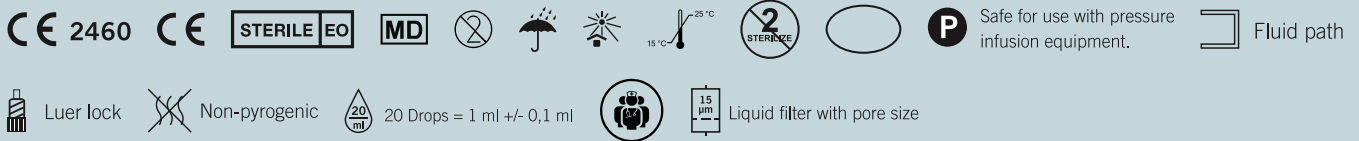

REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Biologinen arviointi:	EN ISO 10993-01
Lakisäätteiset vaatimukset:	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
Tuotestandardien vaatimukset:	EN 8536-8, EN ISO 80369-7
Laatustandardit:	EN ISO 13485
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kärkisuoja	PP, Läpinäkyvä
Ilmastoitu piikki	ABS, Läpinäkyvä, Sininen
Ilmastoitu sulkukorkki	LDPE/HDPE, Sininen
Ilmanvaihtosuodatin	PP + hydrofobinen suodatin
Tippakammio	Polyolefiiniseos, PVC-vapaa
Levy suodattimella	ABS+PTFE, valkoinen
Letku	Polyolefiiniseos (PVC-vapaa)
Rullasulkija	ABS, rullarunko Sininen, rullapyörä valkoinen
Pyörivä luer lock	ABS & PC, Läpinäkyvä
irrota täyttökorkki	HDPE, vaaleansivaaleansininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset

Tämän tuotteen käyttö on rajoitettu laillistetuille lääkäreille tai hoitajille. Lue ohjeet ennen käyttöä. Laitetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ei saa käyttää veren tai verituotteiden siirtämiseen. Tuote on steriili ja pyrogeeni-vapaa, mikäli yksittäispakkausta ei ole avattu tai se on vahingoittumaton. Älä käytä, mikäli pakkaus/tuote on vahingoittunut tai korkki on löystynyt/irronnut. Älä kiristä Luer-liitintä kitkakohtaan yli, sillä se voi vaurioittaa sekä liitintä että yhdistäjää. Älä käytä mitään instrumentteja letkun tai Luer-kiristimen kiinnittämiseen. Tuotteen käyttäminen uudelleen voi johtaa infektiin tai muuhun sairauteen/vaurioon.

Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

Käyttöikä

5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	235 x 100
Rasia	PP	305 x 460
Kuljetuspakkaus	TCF laatu, Kartonki	400 x 295 x 287
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
10700	06438129124378	N/A	06438129524376
10701	06438129124385	N/A	06438129524383
10702	06438129124392	N/A	06438129524390

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.