


# DESIGNED AROUND YOUR HANDS

OPERATIONSHANDSKAR

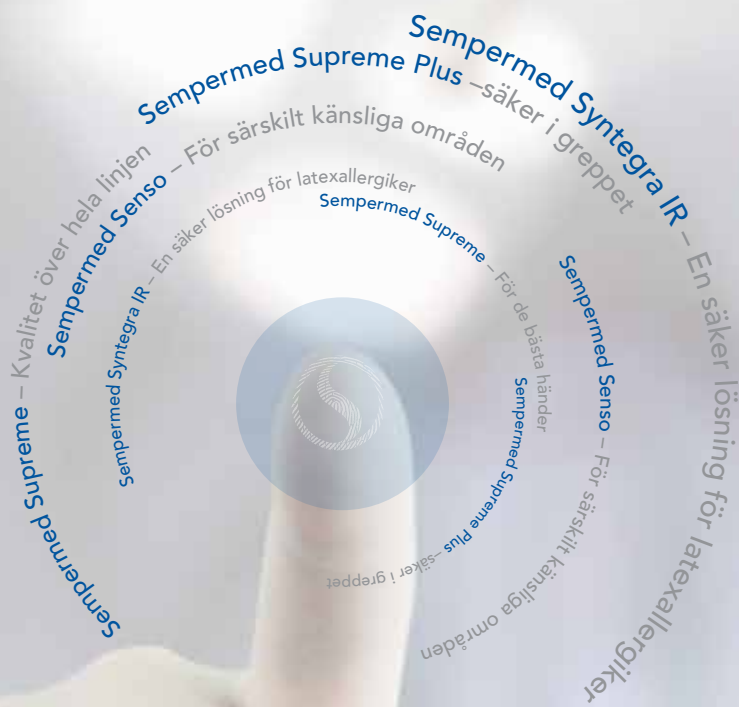

# DINA HÄNDER I DE BÄSTA HÄNDER

Operationshandskarna från Sempermed står med över 90 år forsknings- och produktionskunskap, för säkerhet och professionalism på högsta nivå.

Framför allt utmärker sig Sempermeds operationshandskar genom den unika kombinationen av perfekt grepp, optimal fingerkänsl och högsta bärbekvämhet. Den breda produktportföljen som sträcker sig från traditionella operationshandskar till specialhandskar med specifika produkt- och materialegenskaper ger rätt lösning för alla behov.

En europeisk tillverkares kompetens och personlig service på plats gör Sempermed till din problemlösare när det gäller operationshandskar.

## OPTIMAL SÄKERHET

Med känslighet för topprestationer



Du arbetar i ett mycket känsligt område som kräver exakt finmotorik och optimal fingerkänsl. Den avgörande faktorn för maximal säkerhet med enastående känsla är väggjockleken. På grund av stabiliteten i latexfilmen hos alla operationshandskar från Sempermed har handskens väggjocklek minskats så mycket att din känsl förblir oinskränkt samtidigt som maximal säkerhet garanteras.

## SÄKERT ARBETE UTAN ANSTRÄNGNING

Mycket bekväma att ha på sig



Operationskraven på helt anatomiskt utformade handskar för arbete utan trötthet har legat till grund för många års utveckling av handsckformen. Handsckformen motsvarar handens i avslappnad position med böjda fingrar och gör naturligtvis att du kan arbeta med Sempermeds operationshandskar utan att bli trött. Andra viktiga egenskaper hos Sempermedhandskens form är den extra breda handryggen för att minska tecken på trötthet och det koniska skaftet som utformats efter förebild av handledens anatomi och som tillsammans med den valsade kanten utgör en säker avslutning på operationsrocken.

## PERFEKT INSTRUMENTSTYRNING

Säkert handtag för säker känsla



Den perfekta operationshandsken är inte hal och på samma gång kan formligen inte instrumenten fastna på den. För det ska bli optimalt är ytan på Sempermedhandskarnas porslinsmönster mikrogrova så att handskens grepp blir perfekt. Genom ytterligare kemisk ytbehandling optimeras greppet ännu mer. Sempermed Supreme Plus ger det bästa greppet av alla Sempermeds operationshandskar och kombinerar maximal säkerhet, idealisk känslighet och perfekt instrumentstyrning!

## PATENTERAD TEKNIK – ENKLA ATT TA PÅ SIG

Fodrets nätstruktur:  
reducerad friktion > lätta att ta på sig



## DET INTRAOPERATIVA HANDSKBYTET



## DUBBLA HANDSKAR – DUBBELT SKYDD



## UTMÄRKT HUDVÄNLIGHET

För hudens bästa



## ANSVAR FÖR GENERATIONER



## KVALITET FRÅN EUROPAS HJÄRTA



Det patenterade, syntetiska fodret bildar inte någon slät yta på puderfria operationshandskar, men reducerar genom friktionsmotståndet avsevärt den nätliknande strukturen under pådragningen. Strukturen gör att handsken sitter åt bättre på huden och gör det därigenom bekvämare att ha den på sig.

Studier visar att 10-45 % av operationshandskarna, beroende på aktuellt användningsområde, uppvisar perforeringar, varav upp 50,5 % inom de första 30 minuternas användning (Jfr. PubMed publikationer: "The risk of surgical glove perforation" Norge mars 2007 och "Glove perforation rate in open lung surgery" Wien 1999). För längre ingrepp tillkommer också svettbildning mellan hud och handske. Av dessa skäl rekommenderar Sempermed regelbundet handskebyte under operationen. Det speciella fodret hos Sempermed operationshandskar gör det betydligt lättare att ta på sig dem.

Vid särskilt hög påverkan eller vid operation av högriskpatienter är det två handskar som ger maximal säkerhet. Sempermeds operationshandskar garanterar problemfri pådragning av två handskar över varandra.

Rekommendation: Den inre handsken ska vara ett halvt nummer större än din standardstorlek. För din egen säkerhet och för enkel pådragning ska du använda Sempermed Supreme som inre handske och Sempermed Supreme Plus som yttre handske.

Vid speciellt utvecklad, automatisk Semperit efterbehandlingsprocess tvättas Sempermed-handskarna flera gånger. Därigenom reduceras produktionsrelaterade hudirriterande ämnen och proteinhalten av naturlatex till ett tekniskt möjligt minimum. Risken för delbelastning på grund av puderpartiklar i operationssalen och granulombildning hos patienter reduceras således signifikant. Det breda utbudet av pulverfria operationshandskar för de mest skilda behov, utgör en självklar standard när det gäller medicinska, mänskliga och hälsoekonomiska faktorer.

Sempermed tar i och med produktionen av operationshandskar inte över ansvaret bara för din säkerhet utan också för följande generationers väl. Produktionen med miljömedvetna, högteknologiska metoder och utrustning liksom reduktionen av aggressiva kemikalier vid efterbehandling genom innovativa metoder och kontinuerlig optimering av miljövänliga produktionsprocesser, är en självklarhet för oss.

Förutom forskning och utveckling, är särskilt säkerhet och kvalitet mycket viktigt på Sempermed. Den genomgående höga produktkvaliteten och den ständiga strävan efter perfektion underskrider lagstadgade AQL-värden (godtagbar kvalitetsnivå - ett av de viktigaste kvalitetskriterierna i produktionen). Den europeiska produktionsplatsens centrala läge med högsta tänkbara normer för kvalitetskontroll samt forskning och utvecklingsarbete på europeisk toppnivå är vårt bidrag till din säkerhet.

## sempermed® syntegra IR

**PROFYLAX MOT LATEXALLERGI** – Innovationen inom operationshandskar: syntetiskt polyisopren (IR). Glänser med samma fysikaliska egenskaper som naturlatex: högsta elasticitet och dragkraft, vid ringa spänning.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Syntetiskt polyisopren skonar läkare och patient
- Puderfri, naturlatexfri, fri från allergena proteiner
- Optimal säkerhet
- Perfekt grepp med mikrogrov ytstruktur även i våt miljö
- Beröringskänsl som för naturlatex
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	827056521	Storlek 7,5	827056721
Storlek 6,0	827056601	Storlek 8,0	827056801
Storlek 6,5	827056621	Storlek 8,5	827056821
Storlek 7,0	827056701	Storlek 9,0	827056901

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder		
<b>MATERIAL</b>	Syntetiskt polyisopren		
<b>FÄRG</b>	Kräm		
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant		
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½ 7, 7 ½ och 8 8 ½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm	
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enligt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,24 mm		
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0		
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 9 N		
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år		
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STERILE R</span>		
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 40 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 240 par		



## sempermed® syntegra green

**FÖR FÖRHÖJD SÄKERHET** – Den idealiska undersökningshandsken: Den gröna färgen gör det lättare att detektera perforering av handske under kirurgi. Denna polyisoprenhandske är i kombination med Sempermed Syntegra IR den optimala handsklösningen när det gäller hudvänlighet och komfort.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Syntetiskt polyisopren skonar läkare och patient
- Puderfri, naturlatexfri, fri från allergena proteiner
- Optimal säkerhet
- Beröringskänsl som för naturlatex
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform
- För maximal säkerhet i särskilt kritiska situationer rekommenderar Sempermed att två par handskar används

### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5	827053521	Storlek 7,5	827053721
Storlek 6,0	827053601	Storlek 8,0	827053801
Storlek 6,5	827053621	Storlek 8,5	827053821
Storlek 7,0	827053701	Storlek 9,0	827053901

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder		
<b>MATERIAL</b>	Syntetiskt polyisopren		
<b>FÄRG</b>	Grön		
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant		
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½ 7, 7 ½ och 8 8 ½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm	
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enligt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,24 mm		
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0		
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 9 N		
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år		
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STERILE R</span>		
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 40 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 240 par		



**KVALITET ÖVER HELA LINJEN** – Sempermed Supreme står för kvalitet och tillförlitlighet, inte för inte är det en av de mest använda, puderfria operationshandskarna i Europa.



## PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Patenterat syntetiskt foder för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Har en mycket bra hudtolerans
- Ingen delbelastning för operationssalen och för patienten genom pulverpartiklarna, ingen granulombildning
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

## ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 822751521      Storlek 7,5 822751721  
 Storlek 6,0 822751601      Storlek 8,0 822751801  
 Storlek 6,5 822751621      Storlek 8,5 822751821  
 Storlek 7,0 822751701      Storlek 9,0 822751901

## TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Naturvit	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant	
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkelt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,23 mm	
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">R</span>	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	

**SÄKER I GREPPET** – Säkert grepp i alla situationer med maximal säkerhet, idealisk fingerkänsla och perfekt instrumentstyrning.



## PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Högsta grepp i Sempermed-intervallet
- Patenterat syntetiskt foder för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Ingen delbelastning för operationssalen och för patienten genom pulverpartiklarna, ingen granulombildning
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

## ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 822851521      Storlek 7,5 822851721  
 Storlek 6,0 822851601      Storlek 8,0 822851801  
 Storlek 6,5 822851621      Storlek 8,5 822851821  
 Storlek 7,0 822851701      Storlek 9,0 822851901

## TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Naturvit	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant	
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkelt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,23 mm	
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">R</span>	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	



## sempermed® supreme green

**DEN IDEALISKA UNDERSÖKNINGSHANDSKEN** – Den gröna färgen gör det lättare att detektera perforering av handske under operation. I kombination med Sempermed Supreme eller Sempermed Supreme Plus erbjuder Sempermed operationshandskar den optimala handsklösningen när det gäller säkerhet och komfort. Den optimerade Sempermed Supreme Green ger en ännu bättre fit&feel.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Slätare ytstruktur - ännu lättare att ta på
- Tunnare vägg tjocklek - mer fingerkänsla
- Hög säkerhet - lätt identifiering av perforeringar
- För maximal säkerhet i särskilt kritiska situationer rekommenderar Sempermed att två par handskar används
- Puderfri naturlatexhandske
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Grön	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant	
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½ 7, 7 ½ och 8 8 ½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkel uppmätt i handflatsområdet	min. 0,17 mm	
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE R</span>	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	

### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 823756521    Storlek 7,5 823756721  
Storlek 6,0 823756601    Storlek 8,0 823756801  
Storlek 6,5 823756621    Storlek 8,5 823756821  
Storlek 7,0 823756701    Storlek 9,0 823756901

## sempermed® senso

**FÖR SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN** – Den extra tunna operationshandsken Sempermed Senso möjliggör exakt finmotorik också i känsliga områden, idealisk beröringskänslighet och ett säkert grepp för maximal säkerhet. Utvecklad speciellt för mikrokirurgiska krav, särskilt lämplig för användningar t.ex. inom neurologi, endoskopi, ögon- och vaskulärkirurgi.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Maximal säkerhet tack vare jämn fördelning av väggstyrka
- Perfekt grepp tack vare mikrogrov ytstruktur
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsanvändning	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Brun	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant	
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5 ½ 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½ och 9	min. 250 mm min. 280 mm
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkel uppmätt i handflatsområdet	0,14 - 0,18 mm	
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE R</span>	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	

### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 821751521    Storlek 7,5 821751721  
Storlek 6,0 821751601    Storlek 8,0 821751801  
Storlek 6,5 821751621    Storlek 8,5 821751821  
Storlek 7,0 821751701    Storlek 9,0 821751901

## sempermed® derma PF

**FÖR KÄNSLIGA HÄNDER** – Det ekonomiska alternativet för känsliga händer ger ökat grepp kombinerat med optimerad känsla och säker hantering av instrument.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Puderfria och mycket hudkompatibla
- Enkla att ta på sig
- Säker instrumentstyrning genom optimalt grepp
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder		
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)		
<b>FÄRG</b>	Naturvit		
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant		
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	min. 265 mm min. 275 mm min. 280 mm	
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkelt uppmätt i handflatsområdet	0,16 - 0,20 mm		
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,5		
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N		
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år		
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE</span>		
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack. I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par		

### ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 822751522	Storlek 7,5 822751722
Storlek 6,0 822751602	Storlek 8,0 822751802
Storlek 6,5 822751622	Storlek 8,5 822751822
Storlek 7,0 822751702	Storlek 9,0 822751902

## sempermed® derma plus

**PRODUCERAD FÖR SÄKERHET** – Den med den speciellt utvecklade dubbeldopningsproceduren övertygar genom att vara lätta att ta på sig och ett AQL-värde på 1,0.



### PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Hög draghållfasthet och tillförlitlig täthet tack vare produktionsprocessen med dubbeldopning
- Perfekt grepp med mikrogrov ytstruktur även i våt miljö
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

### TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsanvändning, lätt pudrad		
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)		
<b>PUDER</b>	Ren majstärkelse		
<b>FÄRG</b>	Naturvit		
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant		
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	6 och 6½ 7 och 7½ 8, 8½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm	
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enkelt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,24 mm		
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0		
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N		
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	5 år		
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE</span>		
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel-pack I dispenserkartong med sterilisationsindikator 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par		

### ARTIKELNUMMER

Storlek 6,0 823152609	Storlek 8,0 823152809
Storlek 6,5 823152629	Storlek 8,5 823152829
Storlek 7,0 823152709	Storlek 9,0 823152909
Storlek 7,5 823152729	

# OPERATIONSHANDSKAR FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING FRÅN SEMPERMED



	sempermed syntegra IR	sempermed syntegra green	sempermed supreme	sempermed supreme plus
TYP	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder
MATERIAL	Syntetiskt polyisopren	Syntetiskt polyisopren	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)
FÄRG	Kräm	Grön	Naturvit	Naturvit
VÄGGTJOCKLEK enkelt uppmätt i handflatsområdet	0,19 - 0,24 mm	0,19 - 0,24 mm	0,19 - 0,23 mm	0,19 - 0,23 mm
DRAGKRAFT enligt EN 455-2	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 12 N	≥ 12 N



	sempermed supreme green	sempermed senso	sempermed derma PF	sempermed derma plus
TYP	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	Steril operationshandske för engångsanvändning, puderfri	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	Steril operationshandske för engångsanvändning, lätt pudrad
MATERIAL	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)	Naturlatex (NR)
FÄRG	Grön	Brun	Naturvit	Naturvit
VÄGGTJOCKLEK enkelt uppmätt i handflatsområdet	min. 0,17 mm	0,14 - 0,18 mm	0,16 - 0,20 mm	0,19 - 0,24 mm
DRAGKRAFT enligt EN 455-2	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N

**VIKTIGT MEDDELANDE:** Den senaste produktinformationen finns på [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com). Om inte denna information följs, särskilt beträffande handskarnas (kemiska) stabilitet, användningsfrekvens och kompatibilitet kan det leda till person- och/eller materialskador. Semperit tar inget ansvar för felaktig användning av handskarna. Skaffa i tveksamma fall professionell rådgivning innan du använder dem! Informationen och klassifikationerna i detta dokument avser sista dagen för tryckning. Med förbehåll för fel, tryckfel och övriga ändringar. OBS: Naturlatex kan orsaka allergiska reaktioner inklusive en anafylaktisk chock.

## KONTAKTA OSS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H. Segment Sempermed  
Österrike · 1030 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: [sempermed@semperitgroup.com](mailto:sempermed@semperitgroup.com) · [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)