



SÅRBEHANDLING  
INTENSIV PLEIE  
STOMIPLEIE  
UROLOGI  
OPERASJON  
FIKSASJONER

**DuoDERM**  
*Signal*<sup>®</sup>

Bandasjen som sier fra når den må skiftes




DuoDERM<sup>®</sup> Signal<sup>™</sup> bandasje er en okklusiv, absorberende bandasje som kan benyttes i behandlingen av lett til moderat væskende sår. Ved kontakt med sårsekret dannes en fuktig gel som opprettholder et fuktig sårmiljø som er gunstig for sårtilhelingen. DuoDERM<sup>®</sup> Signal<sup>™</sup> har en visuell skifteindikator som gir en indikasjon på når det er behov for å skifte. Resultatet blir en lavere skiftefrekvens og en kostnadseffektiv sårbehandling.




**ConvaTec**

## SKAPER ET FUKTIG SÅRMILJØ


I kontakt med sårsekret dannes en gel som fremmer sårtilheling og autolytisk debridering av devitalisert vev, for eksempel fibrin og nekroser.

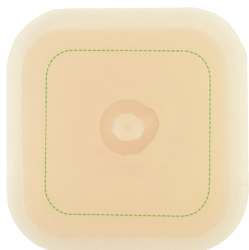

**GUNSTIG SÅRTILHELINGSMILJØ**  
Gel som skaper et fuktig sårtilhelingsmiljø. DuoDERM® Signal bevarer et fuktig sårtilhelingsmiljø og er enkel å fjerne fra såret

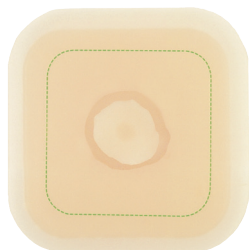

**OVERFLATE MED LAV FRIKSJON**  
Reduserer muligheten for at bandasjen krøller eller ruller seg opp før det er tid for å skifte

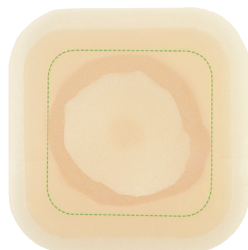


**VISUELL SKIFTEINDIKATOR**  
Indikerer når det er behov for å skifte, og minimerer muligheten for at bandasjen skiftes for tidlig

## BEHAGELIG FOR PASIENTEN

DuoDERM® Signal danner en gel ved kontakt med sårsekret, og er derfor lett å fjerne uten å forårsake ubehag for pasienten.

## ENKEL Å BRUKE

DuoDERM® Signal legges på slik at bandasjen strekker seg minst 3 cm utenfor sårkantene. Bandasjen er gjennomskinnlig, slik at det er mulig å inspisere sårets utvikling. DuoDERM® Signal finnes i flere forskjellige størrelser og varianter, også som spesialvarianter for hæl og sacrum. Ved tørre sår kan DuoDERM® Hydrogel benyttes i såret med DuoDERM® Signal som dekkende bandasje. Ved dypere sår kan sårhulen fylles med AQUACEL® Hydrofiber® bandasje.

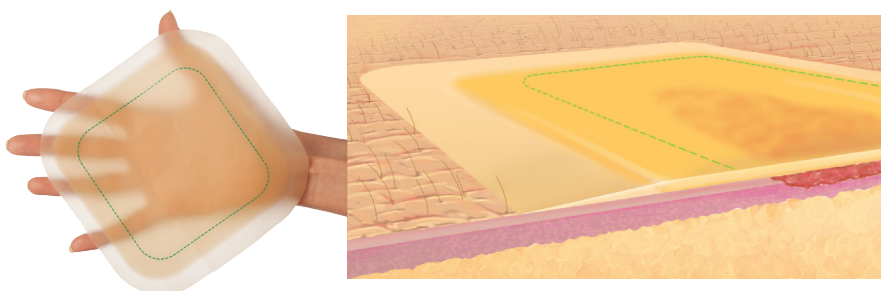

### DuoDERM® Signal™ bandasje

Størrelse	Stk./Pk.	ConvaTec kode	Varenummer
10 x 10 cm	5	403326	901685
14 x 14 cm	5	403327	921431
20 x 20 cm	5	403328	913576
18,5 x 19,5 cm (hæl)	5	410500	936479
20 x 22,5 cm (sacral)	5	410501	816394



## FAKTA

DuoDERM® Signal™ bandasje er en tynn, selvklebende plate som består av gelatin, pektin, natriumcarboxymethylcellulose (CMC) og syntetiske elastomerer.

## INDIKASJONER

DuoDERM® Signal™ benyttes til behandling av lett til moderat væskende sår, f.eks. trykksår (stadium I-II), bensår, diabetessår, kirurgiske sår, delhudsbrannskader, donorflater, skrubbsår og gnagsår.

## SKIFTINTERVALL

Opp til syv dager eller når bandasjen er mettet slik at fargeendringen når helt ut til skifteindikatoren.

## OPPBEVARING

Oppbevares tørt i romtemperatur.

## STERILISERINGSMETODE

Gammasterilisert.


## KLASSIFISERING

DuoDERM® Signal™ er CE-merket (klasse III) og tilfredsstillende relevante miljø- og sikkerhetskrav.

## HOLDBARHET

5 år.

For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen i pakningsvedlegget.

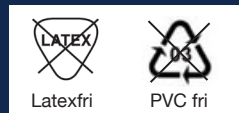

# ConvaTec

ConvaTec Norway AS  
Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo  
Kundeservice: 800 30 995  
convatec.kundeservice@convatec.com  
www.convatec.no