


Utvecklad med 5 lager
för att skydda huden
från nedbrytning

1 Skyddande topplager
Mjuk, duschsäker film som andas minskar risken
för skjuv och friktion**4, t.ex. mellan lakan och förband.

2 3 & 4 Förbandets kärna
Flerlayersskumförbandet som består av Hydrofiber Teknologi
hjälpes till att ge ett bra mikroklimat på huden genom att
absorbera och låsa in fukt från huden.**4,5

5 Perforerad mjuk kontaktyta av silikon
Den perforerade mjuka kontaktytan av silikon gör
det lätt att applicera och ta bort förbandet.*4

AQUACEL® Foam Pro förbandet är utvecklat för
att skydda huden från nedbrytning orsakat av
fukt, friktion och skjuvkraft när det används
som en del av ett vårdprotokoll.**4

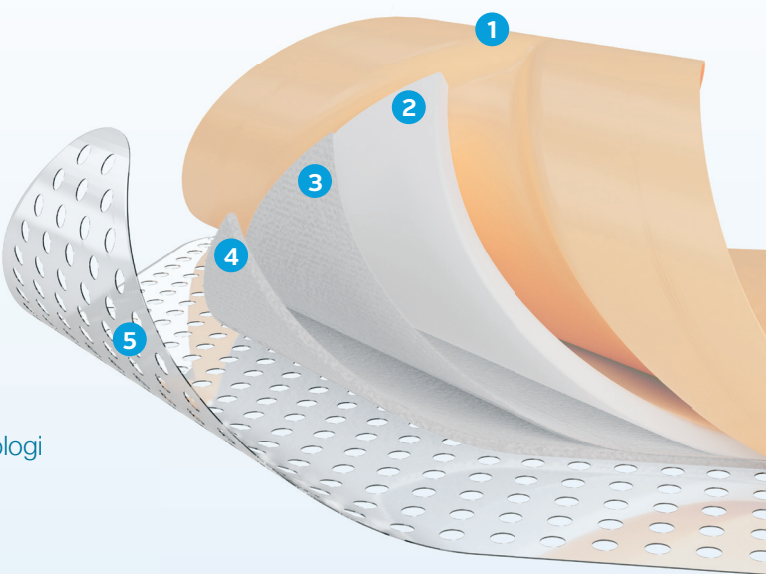

AQUACEL® Foam Pro ger följande fördelar:



Utvecklad för att hjälpa
till att skydda huden
från nedbrytning°



Häftan fastnar inte på
handskar eller i sig själv†



Lätt att applicera
och ta bort†



Vatten/duschsäker



Barriär mot bakterier
och virus**



Kan sitta kvar upp
till 7 dagar



Mjuk, skonsam, flexibel
och formbar†*

°Som visats *in vitro*
†När det används som en del av ett vårdprotokoll.
**Var god se bruksanvisningen som medföljer Aquacel Foam Pro
förpackningen för att läsa mer om hur det ska användas.


Beställningsinformation

Artikel nr	Förbandets stl	Sårdynans stl	per/pk
422359	8 x 8 cm	5 x 5 cm	10
422357	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	10
422358	15 x 15 cm	11 x 11 cm	10
422356	19,8 x 14 cm, hål	14 x 8,7 cm	10
421579	20 x 16,9 cm, sacrum	11,4 x 13,5 cm	5
421580	24 x 21,5 cm, sacrum stor	24 x 21,5 cm	5

AQUACEL®
Foam Pro

Skin's Guardians

Skydda. Försvara. Vårda

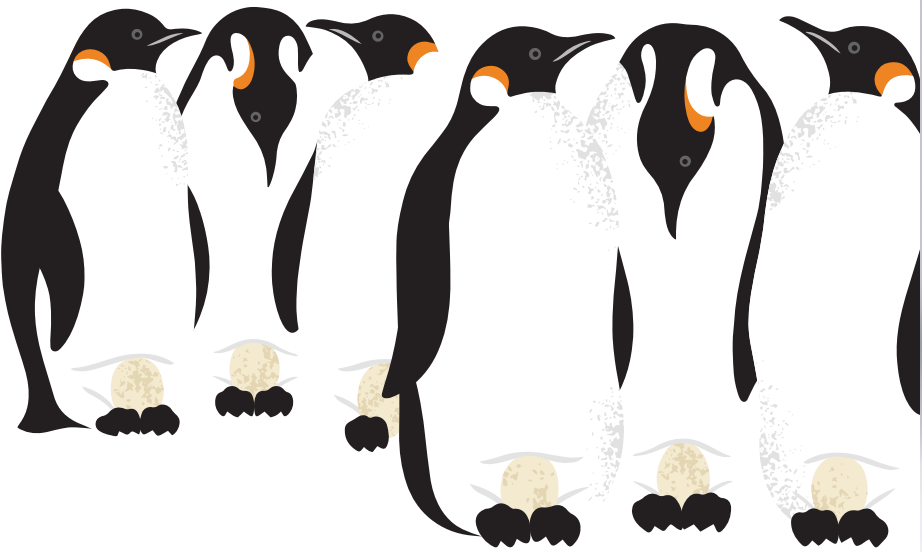

Kontakta oss för att lära dig mer om ConvaTecs produkter inom avancerad Sårbehandling.

Kundservice: 020-21 22 22 www.convatec.se



®/TM Indicates a trademark of ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd is an authorised user. ©2018 ConvaTec Inc. AP-019599-MM
1. The Etiology of Pressure Ulcers. In National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed). 2. Defloor T, Grypdonck MH. Sitting posture and prevention of pressure ulcers. Applied Nursing Research. 1999;12(3):136. (As cited in Skin and Tissue Assessment. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.). 3. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016. 4. In-vitro Performance Characteristics of AQUACEL® Foam Pro WHRI4536MS129. 2015. Data on File. ConvaTec 5. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890.

AQUACEL®
Foam Pro
Skin's Guardian



Skin's Guardians



Det enda skumförbandet i flera lager som
kombinerar en kontaktyta av silikon med
Hydrofiber® Teknologi.

AQUACEL® Foam Pro förbanden är utvecklade för att skydda huden
från nedbrytning orsakat av fukt, friktion och skjuvkraft.

Nyhet!



Utmaningen


När exponering leder till nedbrytning



Lösningen

Skydda. Försvara. Vårda.




AQUACEL®
Foam **Pro**

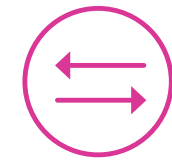

Friktion och skjuvkrafter orsakar skador på hud och vävnad

- Friktion kan leda till rodnad, inflammation och ibland blåsbildning och kan orsakas av en patients rörelse över ytor som kläder och lakan.¹
- Skjuvkrafter kan resultera i deformation av hud och vävnad, tilltäppning av blodkärl och ischemi inducerad skada.¹

Vanliga tryckpunkter

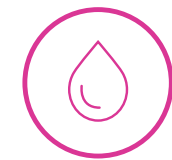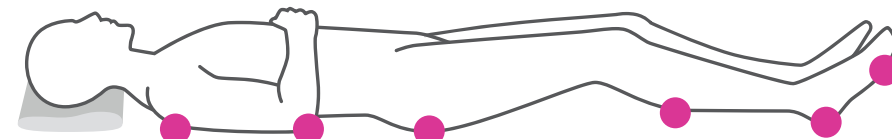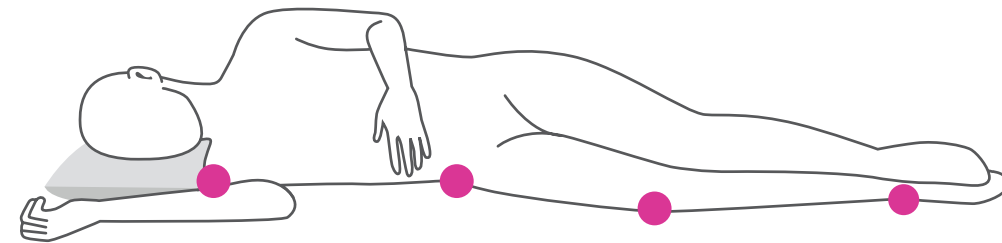



För mycket fukt gör huden mer känslig för skjuvkrafter och därmed har lättare att skadas

- Vanliga orsaker till ökad fukt är svett, avföring och urin.²



Ett försämrat mikroklimat kan öka risken för att trycksår utvecklas och att vävnad skadas

- En ökad temperatur och fuktnivå på huden bidrar till en högre risk för hudskador orsakade av yttre påverkan och ökar effekten av friktion och skjuvkrafter.³

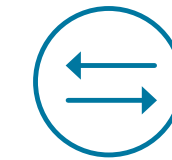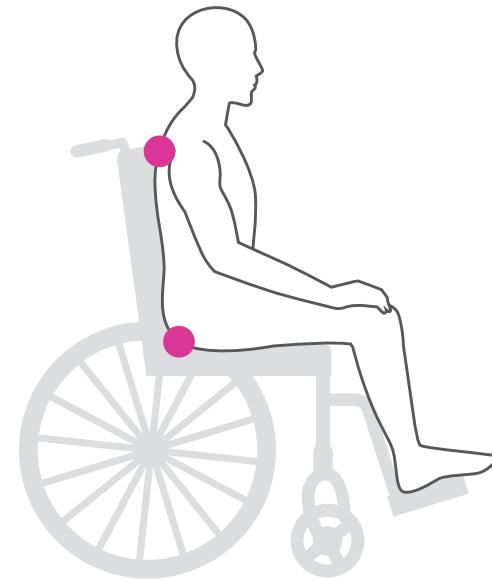

Hjälper till att skydda mot friktion och skjuv

- AQUACEL® Foam Pro är ett flerskiktat förband utvecklat för att minska effekterna av skjuv och friktion.^{*4}



Lätt att applicera

- En perforerad skonsam silikonhäfta ger en säker och hudvänlig vidhäftning.^{*4}
- Förbandet går att återapplicera efter hudinspektion.^{*4}

POWERED BY

Hydrofiber
TECHNOLOGY



Hjälper till att skydda mot fukt


- AQUACEL® Foam Pro förbandets film ger en barriär mot bakterier och virus och skyddar såret mot yttre föroreningar.^{*4,5}
- Det är vatten/duschsäkert.^{*4}



Hjälper till att bibehålla ett bra mikroklimat på huden

- AQUACEL® lagret hjälper till att ge ett bra mikroklimat på huden genom att absorbera och låsa in överflödigt fukt från huden.^{*4,5}


AQUACEL® Foam Pro finns i 6 storlekar

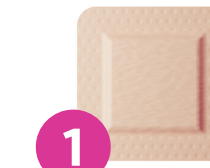

8 x 8 cm



10 x 10 cm

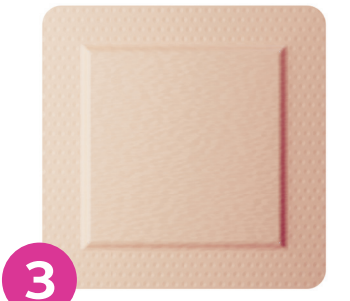

15 x 15 cm



Häl
19,8 x 14 cm



Sacrum standard
20 x 16,9 cm



Sacrum stor
24 x 21,5 cm

*Som visats in vitro
* När de används som en del av ett vårdprotokoll