

Former seg perfekt. Hver gang.

Biatain® Silicone med 3DFit Technology former seg etter sårbunnen, fyller hulrommet mellom sårbunn og bandasje og reduserer opphopingen av eksudat, hvilket gir optimale vilkår for sårtilheling.

- Former seg etter sårbunnen
- Absorberer vertikalt
- Stenger eksudatet inne

Biatain® Silicone



3DFit Technology fyller hulrommet og reduserer opphopingen av eksudat



Former seg etter sårbunnen

Ved kontakt med såreksudat utvider og former skummet seg etter sårbunnen og reduserer opphopingen av eksudat.




Absorberer vertikalt

Mikrokapillærene i skumstrukturen absorberer eksudatet vertikalt.

Stenger eksudatet inne

Eksudatet stenges inne og retineres under kompresjon, slik at risikoen for lekkasje og maserasjon av sårkanten og huden rundt såret reduseres.

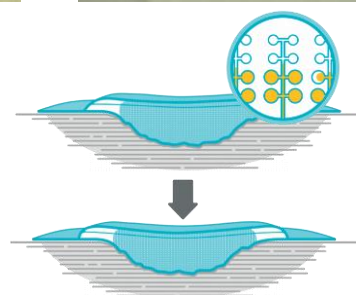

Produktsammensetning

Biatain® Silicone er en myk og formbar skumbandasje i polyuretan som består av en semipermeabel bakterie- og vanntett toppfilm, et "lock-away"-lag, et skumlag med 3DFit Technology, et mykt silikonkontaktlag på skumputen og en silikonklebekant samt 3-delt berøringsfri film for påføring.

Bruksområde

Biatain Silicone brukes på en lang rekke lett til kraftig væskende kroniske og akutte sår. Dette omfatter bensår, trykksår, ikke-infiserte diabetiske fotsår, donorsteder, postoperative sår og skrubbsår.

Biatain Silicone kan brukes under kompresjon og kan sitte på i opptil 7 dager.

Biatain Silicone



Artikkelnr.	Str. i cm	Putestr. i cm	Antall i eske
33434	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	10
33435	10 x 10	6,5 x 6,5	10
33436	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	10
33437	15 x 15	10 x 10	5
33438	17,5 x 17,5	13 x 13	5
33400	10 x 20	5,5 x 15,5	5
33401	10 x 30	5,5 x 25,5	5

Biatain Silicone Multishape



reddot award 2017
winner

Artikkelnr.	Str. i cm	Putestr. i cm	Antall i eske
33408	14 x 19,5	7,5 x 12,1	5

Biatain Silicone Sakral



Artikkelnr.	Str. i cm	Putestr. i cm	Antall i eske
33404	15 x 19	10,9 x 14	5
33405	25 x 25	17 x 17,2	5

Biatain Silicone Hæl



Artikkelnr.	Str. i cm	Putestr. i cm	Antall i eske
33406	18 x 18	14 x 13,2	5