
Sage Untreated Oral Swab

REF 6070-X

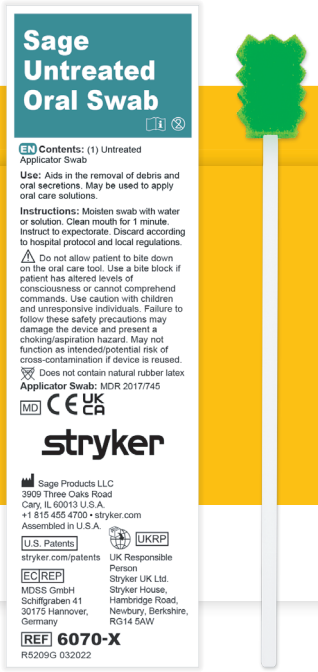

Informasjon om pakningen

Innhold:

• (1) ubehandlet applikatorpensel

Bruk:
Bidrar til å fjerne rester og oralsekreter. Kan brukes til å påføre munnpleieprodukter.

Instruksjoner:
Fukt pensel med vann eller produkt. Rengjør munnen i ett minutt. Be pasienten spytte ut. Kasseres i samsvar med sykehusets retningslinjer og lokale forskrifter.

Forsiktig:
Pasienten må ikke få bite på munnpleieutstyret. Bruk en biteblokk hvis pasienten har endret bevissthetsnivå eller ikke kan forstå kommandoer. Vær forsiktig med barn og personer som ikke reagerer. Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan utstyret bli skadet og utgjøre en kvelnings-/aspirasjonsfare. Hvis utstyret brukes på nytt, er det ikke sikkert det fungerer som tiltenkt, eller det kan foreligge en potensiell risiko for krysskontaminering.

Bare til engangsbruk.

Ikke fremstilt med naturlig gummilateks.

Spesifikasjoner

Produktnavn	Sage Untreated Oral Swab
Produktkode	6070-X
Beskrivelse	Applikatorpensel som brukes til å fjerne rester og oralsekreter og påføre munnpleieprodukter
Produsentakkreditering	ISO 13485:2016
Lengde på pensel	15,9 cm
Antall per eske	800

Egenskaper og fordeler

Pensel	Bidrar til å fjerne rester og oralsekreter mellom tannpuss[1]
Myke skumhoder	Skånsomme mot følsomt munnvev[1]

Referanse: 1. Interne data. Sage Products LLC. 2024

Dette dokumentet er utelukkende beregnet på helsepersonell.

Helsepersonell må alltid stole på sin egen profesjonelle kliniske dømmekraft når det skal vurderes om et konkret produkt skal velges for behandling av en pasient. Stryker gir ikke medisinske råd og anbefaler at helsepersonell gis opplæring i bruken av konkrete produkter før de skal brukes.

Den informasjonen som presenteres her, er ment å vise bredden i Strykers produkttilbud. Helsepersonell må alltid se pakningsvedlegget, produktmerkingen og/eller bruksanvisningen før Stryker-produkter tas i bruk.

Produkter er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle markeder, ettersom produkttilgjengelighet avhenger av regelverk og/eller medisinsk praksis på individuelle markeder. Ta kontakt med Strykers lokale representant ved eventuelle spørsmål om hvorvidt Strykers produkter er tilgjengelige i et aktuelt område.

Stryker Corporation eller Strykers avdelinger eller andre tilknyttede selskaper eier, bruker eller har søkt om følgende vare- eller tjenestemerker: Sage, Stryker. Alle andre varemerker tilhører respektive innehavere.

11/2025
SAGE-SUSS-FACT-2338650_REV-0_no_no | Copyright © 2025 Stryker

Produsert av:
Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 U.S.A.
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.com