


PolyMem®

PolyMem – ett Multifunktionellt Förband

PolyMems unika egenskaper hjälper till att optimera sårbehandlingen genom att reducera inflammation, svullnad, smärta vilket främjar sårhäkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och en Superabsorbent som gör att förbandet effektivt rensar, absorberar, tar bort smärta och håller såret fuktigt.

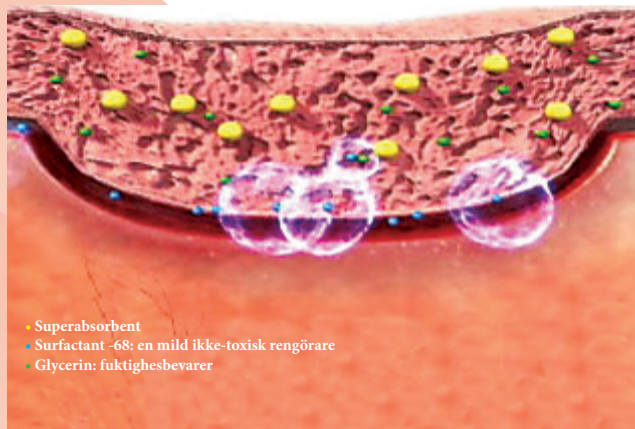

När förbandet kommer i kontakt med sårytan frigörs Surfactant och Glycerin till såret. Dessa ingredienser arbetar var för sig men även tillsammans för att stödja läkning och smärtlindring

SURFACTANT F-68, icke-toxisk rengörare

Det reducerar spänning mellan friskt och död vävnad. Löser upp fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad för effektiv autolytisk debridering

GLYCERIN en fuktighetsbevarare

Håller såret fuktigt och löser upp nekrotisk vävnad. Hindrar att förbandet fastnar i såret vilket reducerar smärta vid förbandsbyte. Glycerin drar till sig näringsämnen och tillväxtfaktorer till såret och stimulerar läkningsprocessen.

SUPERBSORBENT tar upp och binder specifikt vatten molekyler i förbandet vilket ger ökad koncentration av naturliga tillväxtfaktorer och näringsämnen till såret.


PolyMem: Vad gör det annorlunda?

RENSAR

- Stimulerar aktivt sårhäkning
- Skonsam debridering
- Reducerar bioburden
- Stödjer den autolytiska rensningen till att reducera spänningen mellan friskt och död vävnad
- Såret rensas kontinuerligt

ABSORBERAR

- Kraftfull superabsorbent drar upp den döda vävnaden från såret och upp in i förbandet

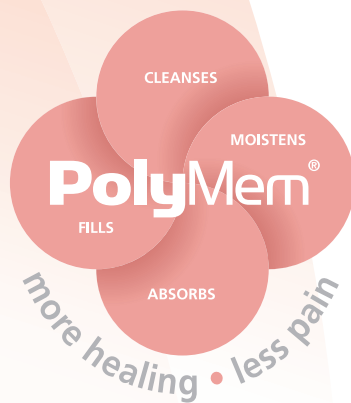

REDUSERAR SMÄRTA OCH INFLAMMATION

- Reducerar smärta i såret
- Reducerar inflammation i och runt såret vilket reducerar risken för infektion
- Glycerin, tillsammans med de andra komponenterna, gör att förbandet inte fastnar i såret

ENKEL ATT ANVÄNDA

- Enkelt och snabbt förbandsbyte
- Kan användas på flera olika typer av sår

När skall PolyMem användas ?

PolyMem är lämplig att användas på ett stort antal olika akuta och svårläkta sår, inklusive - men inte begränsat till:

- trycksår
- bensår
- fotsår hos diabetiker
- tagställen
- kirurgiska sår
- skintears (hudflikar)
- första och andra gradens brännskador
- strålscadad hud
- dermatologiska sjukdomar (t.ex. epidermolysis bullosa)
- exponerade senor
- runt trakeostomier



Hur väljer man rätt förband i PolyMem Sortimentet?

Innan applicering, görs en helhetsbedömning för att bestämma vilka förband som bäst uppfyller behoven för patienten och såret. Tvätta såret enligt gällande riktlinjer.

- För måttligt vätskade sår välj PolyMem Standard
- För måttligt till kraftigt vätskande sår, välj PolyMem MAX som kan användas en längre tid pga extra absorptionskapacitet
- För sår med symtom och tecken på infektion välj PolyMem Silver förbanden som innehåller nanokristallina silverpartiklar som verkar på bakterier
- PolyMem WIC (standard och silver) kan användas i sårhåler/kaviteter. PolyMem Wic har ingen skyddande film och bör därför täckas med passande sekundärförband
- PolyMem finger och tå förbanden är utformade (rörformiga) till att användas för skador på fingrar och tår.



Viktigt att veta om PolyMem

PolyMem Multifunktionellt förband stimulerar den autolytiska debrideringen, ökar vätsketillströmmning och sätter igång en kraftig aktivitet i såret. Detta kan ge ökad sekretion i startfasen av behandlingen, något som är helt normalt. Sekretionen avtar gradvis och såret visar snabb framgång.

Vill ni veta mer om PolyMem vänligen besöka vår hemsida: WWW.partnermed.se eller kontakta:
Åsa Norgren telenr: 0046- 721 50 49 80, asa@partnermed.se