

Transafix[®]

OPTIMALA FIXERINGSLÖSNINGAR

ENKEL ATT ANVÄNDA ● SÄKER FIXERING ● BEKVÄM

Transafix[®]

- ENKEL ATT ANVÄNDA
- SÄKER FIXERING
- BEKVÄM

Transafix

En skonsam, effektiv och flexibel lösning för fixering av alla typer av slangar, där man önskar en säker och justerbar långtidsfixering.

- Bekväm - fixeringstapen Transpore är andningsbar, mjuk och formbar
- Säker och justerbar fixering
- Reducerar risken för oavsiktligt drag eller avlägsnande
- Enkel att använda
- Hudvänlig vidhäftning
- Minimerar risken för "stripping" av huden
- Latex och PVC-fri
- Kostnadseffektiv

Specifikationer

Partnermed varurnr	Beskrivning	Antal per fp
8210100	Nasalplåster - hydrokolloid, osteril	50 stk.
8210200	Nasalplåster - fleece, osteril	50 stk.
8210300	Nasal fixeringstape, osteril	20 stk.



Partnermed varurnr	Beskrivning	Antal per fp
8700150	Fixeringstape nr 1, osteril	100 stk.
8700250	Fixeringstape nr 2, osteril	50 stk.
8700350	Fixeringstape nr 3, osteril	25 stk.



Partnermed varurnr	Beskrivning	Antal per fp
8700600	Trachealtubset: 2 kindplåster + 1 tubband	50 stk.
8700700	Kindplåster, parvis	50 stk.
8700800	Tubband	50 stk.



Transafix Trachealtubset

Fixeringssystem till endotrachealtuber



Transafix trachealtubset är en effektiv lösning, när det önskas en säker och justerbar långtidsfixering av endotrachealtuber.

Reducerar risken för oavsiktligt drag eller seponering av tuben och är därför kostnadseffektiv att använda.


Setet består av 2 kindplåster med velcro, samt ett tubband med en vidhäftande yta.

Kindplåstren är framställda av en mjuk och flexibel ovansida i nonwoven med velcroyta. Tubbandet är 16mm brett och 40cm långt och har en vidhäftande yta på mitten.

Kan sitta upp till 7 dagar - kan användas till barn och vuxna.

Transafix Fixeringstape

Fixering till sonder, katetrar och dränage

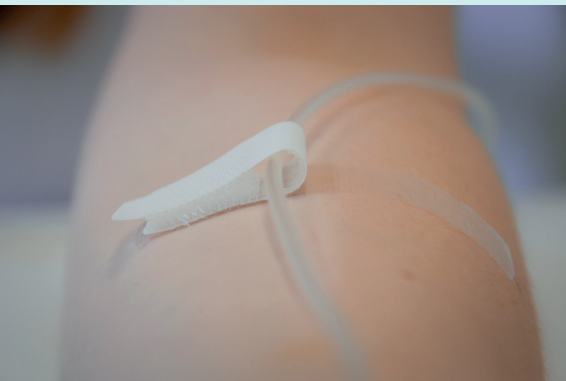

Fixeringstapen är en skonsam, effektiv och flexibel lösning för fixering av alla typer av slangar, där det efterfrågas en säker och justerbar långtidsfixering.

En lösning till alla slangstorlekar - finns i 3 storlekar.

Fixeringstapen placeras på huden, slangen fixeras på den vidhäftande ytan på ovansidan och velcro-vingarna stängs runt slangen. Velcron kan enkelt öppnas igen och slangen omplaceras/bytes.

Minimerar risken för "stripping" av huden.

Kan sitta upp till 7 dagar - kan användas till barn och vuxna.

Transafix Nasal fixering

Fixering till nasala och gastriska sonder



Transafix Nasal fixeringssystem erbjuder en perfekt lösning, när sonden ska fixeras säkert på patientens näsrygg.

Ett set består av två delar, det nasala plåstret - kommer i hudfärgad fleece eller hydrokolloid - och den nasala fixeringstapen.

Sonden fixeras med den nasala fixeringstapen så att det endast är fixeringstapen som ska bytas när sonden byts. Detta reducerar hudirritationer och infektioner och förebygger en eventuell uppföljande behandling.

Kan sitta mellan 3 - 5 dagar; Fleece i 3 dagar, hydrokolloid i 5 dagar. Fixeringstape efter behov.



Kontaktpersoner:

Sårbehandling, operation, hygien och desinfektion

Norra Sverige:

Birgitta Thorin

Produktspecialist

Tlf: 070-6596602

Mail: biggan@partnermed.se

Mellan Sverige:

Camilla Bergenheim

Produktchef / Leg. Sjuksköterska

Tlf: 072-1504980

Mail: camilla@partnermed.se

Södra Sverige:

Irene Faager

Leg. Sårbehandlingsansvarig Sjuksköterska

Tlf: 073-8487300

Mail: irene@partnermed.se

Adress: Box 25, 452 21 Strömstad | Tlf.: +47 69 10 94 60 | E-post: info@partnermed.se

www.partnermed.se