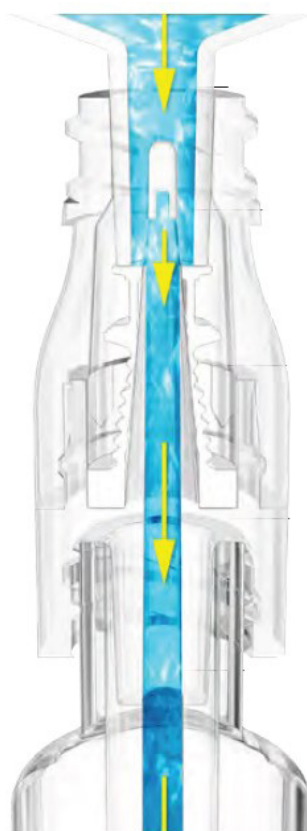


NanoClave®

ICU Medical har en lang og velrenommert historie med utvikling av innovative koblingsstykker som øker sikkerheten for både pasienter og pleiere, og samtidig bidrar til bedre resultater. Alt fra den opprinnelige **Clave®**-koblingen til den revolusjonerende **Neutron™**-kateterpatentenheten, koblingsstykker med den grunnleggende delt septum- og den interne butt kanyle-teknologien fra **ICU Medical**.

Egenskaper:

- Kan brukes på alle perifere og sentrale venekatetre og alle arteriekatetre til intravenøs administrering av væsker eller medikamenter, og kan brukes med blodprodukter.
- Gennemsiktig hylse gjør det mulig å se den interne væskebanen ved spyling av koblingsstykket.
- Fjerner effektivt blod og blodrester ved lavt spylevolum.
- Minimal blodrefluks i kateterspissen ved til- eller frakobling av en Luer-ventil.
- Klemmestykke kreves ikke, noe som forenkler opplæringen og reduserer risikoen for feil.
- Tillater saltspyling, noe som kan eliminere risikoen for heparinindusert trombocytopeni (HIT).
- Godkjent for bruk med strøminjektorer.
- Danner en dokumentert mikrobiell barriere mot bakterieoverføring og kontaminering
- Kjemisk kompatibel med desinfeksjonsmidler som isopropylalkohol, betadin og klorheksidin, og kan også brukes med desinfeksjonshetter.



Flat

glatt overflate som kan tørkes av.

Split Septum

en foretrukket design for koblinger.

Rett væskebane

for å fjerne blod og blodrester ved lavt spylevolum.

Minimalt restvolum

(også kalt grunningsvolum) åpner for lavere spylevolumer.

Klar hylse

muliggjør visuell bekreftelse av spyling etter bruk med medikamenter eller blod.

Teknisk spesifikasjon		Medikamenter kompatibel		Materiale	
Restvolum	0.02 ml	Kjemoterapi	Ja	Sterilization	Gamma
Flowhastighet	145 ml/min	Alkohol	Ja	Latex	Nei
Aktiveringer	600	Lipider	Ja	Pvc	Nei
Brukstid døgn	7	Klorheksidin	Ja	Polyester	Ja
Blod kompatibel	Ja	Passer til desinfeksjonshetter	Ja	Silicone	Ja
MR kompatibel	Ja	IPA and CHG Caps	Ja	ABS	Ja
Høyt trykk kompatibel	400 psi				

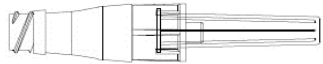
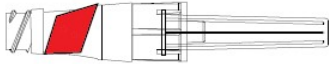
NanoClave

Godkänd för 7 dygn/600 aktiveringar, fett, blod och cytostatika kompatibel, PVC-fri

Hyväksytty käytettäväksi 7 vuorokautta/600 aktivointikertaa, sopii lipidien, veren ja sytostaattien annosteluun, PVC-vapaa

Godkendt til 7 døgns anvendelse eller 600 aktiveringer, fedt, blod og cytostatika kompatibel, PVC-fri

Godkjent for 7 døgns bruk/600 aktiveringer, fett, blod og cytostatika kompatibel, PVC-fri

Artikkel nr.	Fyllnadsvolym; Flödes hastighet; Aktiveringar; psi	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Tyhjättila; Virtausnopeus; Aktivointikertaa; psi	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Deadspace; Flowvolum; Aktivointikertaa; psi	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Deadspace; Flowhastighed; Aktiveringer; psi	Antal/pakke	Produktbilde
011-A1000	0.02 ml; 145 ml/min; 600; 400 psi	50	
011-A1000RR	0.02 ml; 145 ml/min; 600; 400 psi	50	

NanoClave

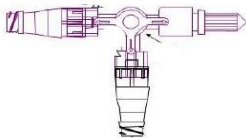
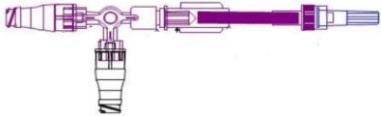
3-way stopcock, Macro tubing & Rotating Luer Lock

Förlängningsslang Macro och Roterande luer lock

Jatkoletkulla Macro ja Pyörivä luer lock

Forlængelse-slangeMacro og Roterende luer lock

Forlængerslange Macro og Roterende luer lock

Artikkel nr.	Total/slanglängd; Fyllnadsvolym	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Kokonais/Slanin pituus; Tyhjättila	Numero/pakkaus	Tuotokuva
Varenummer	Total/slangelengde; Deadspace	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Total/slangelængde; Deadspace	Antal/pakke	Produktbilde
011-A119	5.5/0 cm; 0.34 ml; pvc-free	50	
011-A1016	14/9 cm; 0.74 ml; dehp-free	50	

NanoClave

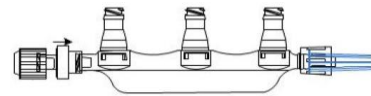
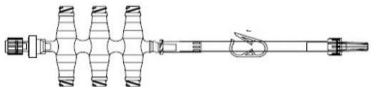
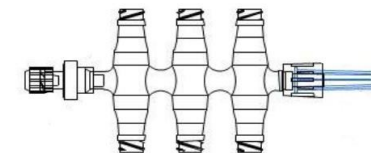
Manifold with BCV

Förlängningsslang Macro och Roterande luer lock

Jatkoletkulla Macro ja Pyörivä luer lock

Forlængelse-slange Macro og Roterende luer lock

Forlængerslange Macro og Roterende luer lock

Artikkel nr.	Total/slanglängd; Fyllnadsvolym	Antal/förpackning	Produktbild
Tuotenro	Kokonais/Slani pituus; Tyhjättila	Numero/pakkaus	Tuotekuva
Varenummer	Total/slangelengde; Deadspace	Antal/pakke	Produkt billede
Artikkel nr.	Total/slangelængde; Deadspace	Antal/pakke	Produktbilde
011-AM3090	25 cm; 1.6 ml; dehp-free	50	
011-AM3099	0 cm; 0.88 ml; pvc-free	50	
011-AM6090	0 cm; 1.5 ml; dehp-free	50	
011-AM6099	25 cm; 0.75 ml; pvc-free	50	

T-Connector

Jatkoletkulla Micro, Sulkija ja Pyörivä luer lock, dehp-vapaa

Forlængerslange Micro, Skydeklemme og Roterende luer lock, dehp-fri

A diagram of a cable assembly. On the left is a rectangular connector with a latch. In the middle is a rectangular label with a vertical slot. On the right is a three-prong electrical plug with a latch.