


Mepilex® Up

En ny og innovativ skumbandasje designet for å minimere risikoen for lekkasje¹. Inspirert av pasienters behov og klinikers perspektiv.

En patentert skumstruktur med små fordypninger

Det innovative skummet med små fordypninger forbedrer kapillærkreftene, noe som gjør at sårveske kan spre seg i alle retninger, selv mot tyngdekraften.¹

Den unike evnen til å spre væsken i bandasjen minimerer risikoen for lekkasje og håndterer sårveske over flere dager, noe som kan bidra til lengre brukstid.¹

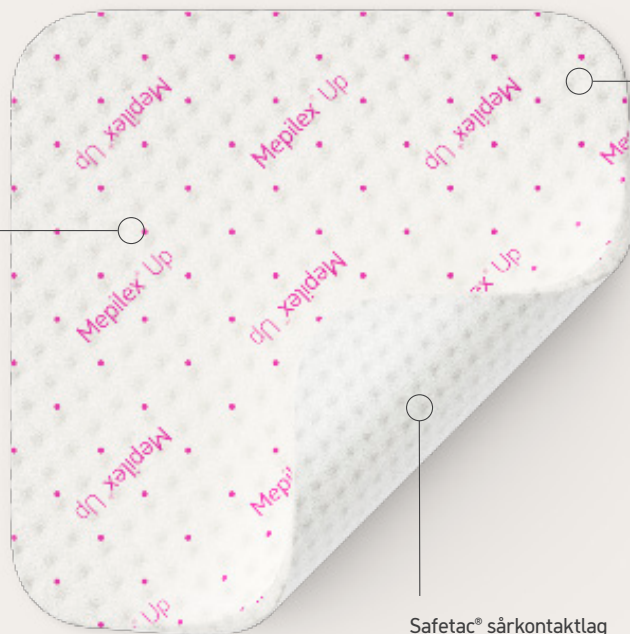

Pustende, vannresistent baksiddefilm

Sikrer at sårvesken blir værende i bandasjen, mens overflødig fuktighet fordamper.

Safetac® sårkontaktlag

Vår produsenteide Safetac-teknologi gir skånsom heft og minimerer smerte og skade på sårsengen og omkringliggende hud²⁻⁴.

Til tross for at den er tynn kan Mepilex Up håndtere store mengder væske¹

Unik evne til å spre sårveske jevnt i alle retninger, noe som gir bedre væskehåndtering enn andre skumbandasjer^{1*}. Dette kan bidra til:

Passer rett inn i din sårbehandlingsprosedyre

- former seg lett og er enkel å håndtere¹
- i stand til å håndtere sårveske fra lite til svært væskende sår¹
- lengre brukstid og færre bandasjeskift¹
- minimert risiko for lekkasje¹, selv under kompresjon
- potensielt forbedret livskvalitet for pasienter
- lavere kostnader grunnet færre bandasjeskift

Mepilex Up kan brukes på et bredt spekter av væskende sår i alle deler av helingsprosessen. Den er svært anvendbar og kan enkelt integreres i eksisterende sårbehandlingsprosedyrer, uten behov for å endre valg av kompresjonsbandasjer eller avlastningsutstyr.

* Ved sammenligning av laboratorieresultater med tilsvarende produkter fra andre produsenter i følge EN13726:2023 Annex E.

Hvordan bruke Mepilex® Up



1. Rengjør såret i henhold til klinisk praksis. Tørk den omkringliggende huden godt. Velg en egnet bandasjestørrelse med tanke på følgende: For lite væskende sår bør bandasjen overlape omkringliggende hud med minst 1 cm for små sår og 3 cm for større sår. For moderat til svært væskende sår, uavhengig av størrelse på såret, bør bandasjen overlape med minimum 5 cm. Bandasjen kan klippes for å tilpasses ulike sårstørrelser og -plasseringer.



2. Fjern den første releasefilmen. Legg den heftende siden ned mot såret. Fjern den gjenværende releasefilmen og glatt forsiktig over med hånden. Ikke strekk bandasjen.



3. Om nødvendig, sikre Mepilex Up med en fikserende bandasje eller lignende.

Produktbeskrivelse

Mepilex Up er en svært føyelig bandasje som absorberer sårveske med både lav og høy viskositet, opprettholder et fuktig sårmiljø og minimerer risiko for maserasjon. Det myke silikonlaget (Safetac®) hefter ikke til det fuktige såret, men hefter skånsomt til den tørre omkringliggende huden. Den beskytter såret og huden, og minimerer smerte hos pasienten og skade på såret og omkringliggende hud ved fjerning av bandasjen.

Fordeler med Mepilex Up

- Det innovative skummet med små fordypninger forbedrer kapillærkreftene, noe som gjør at sårveske kan spre seg i alle retninger, selv mot tyngdekraften¹
- Absorberer og sprer sårveske med både lav og høy viskositet
- Designet for å minimere lekkasje¹
- Minimerer risiko for maserasjon
- Tynn, svært føyelig og enkel å håndtere¹



Mepilex Up sortiment (sterile enhetspakninger)

Artikkelnummer	Størrelse i cm	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
212015	5 x 5 cm	5	40
212100	10 x 10 cm	5	70
212300	15 x 15 cm	5	25
212200	10 x 20 cm	5	25
212400	20 x 20 cm	5	25
212500	20 x 50 cm	2	12

Safetac®-teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

Safetac® hefter skånsomt til intakt hud, men ikke til selve såret, og forhindrer dermed skade på omkringliggende hud (som hudstripping) og sårsegen, i tillegg til å minimere smerte ved fjerning av bandasjen⁵⁻¹⁰. Safetac forseglar sårkantene og forhindrer at sårveske lekker ut til omkringliggende hud, slik at risiko for maserasjon minimeres^{5,7,8,10,11,12}.

Bruksområder

For håndtering av sårveske, fra lite til svært væskende sår, med og uten kompresjon.

Forholdsregler

- Mepilex Up skal ikke brukes av personer med kjent sensitivitet for materialet/komponentene i produktet.
- Skal ikke brukes sammen med oksiderende midler slik som hypoklorittløsninger eller hydrogenperoksid. Imidlertid har Granudacyn® blitt testet og vurdert trygg for bruk med Mepilex Up.
- Ved tegn på klinisk infeksjon som feber, eller hvis såret eller huden rundt blir rød, varm eller hoven, kontakt helsepersonell for behandling.
- Skal ikke gjenbrukes. Ved gjenbruk kan produktets yttelse være nedsatt og krysskontaminering kan forekomme.
- Steril. Skal ikke brukes dersom den sterile barrieren er skadet eller åpnet før bruk. Ikke resteriliser.

1. Mölnlycke Health Care. Data on File. 2024. 2. Zillmer R, et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on peri-ulcer skin. J Wound Care 2006;15(5):187-191. 3. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care 2011;20(9):412-422. 4. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK. 4(1). 2008. 5. Strohal R, Mittböck M, Müller W, Hämmeler G. Management of hard-to-heal leg ulcers with an acidoxidising solution versus standard of care: The MACAN study. Journal of Wound Care. 2021;30(9):694-704. 6. Mölnlycke Health Care. Data on File. 7. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 8. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing two foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 9. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. Journal of Wound Care 2012; 21 (8): 359-368. 10. Upton D, Solowiej K. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and stress. Journal of wound care. 2012;21(5):209-15. 11. Van Overschelde, P, et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 12. Bredow J, et al. Randomised clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at WUWHS Congress, Italy, 2016.

Les mer på molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mepilex og Safetac er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2024 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC5272407

