

Sår

UNDERTRYKKSBEHANDLING

Sårbehandlingsprodukter



3M

100 år med medisinsk utstyr

UNDERTRYKKSBEHANDLING MED TILBEHØR

ACTI V.A.C.®

Acti V.A.C.® terapienhet for sårbehandling med negativt trykk, V.A.C.® terapi. Undertrykk justerbart fra -25 mmHg - 200 mmHg, alarmfunksjoner, batteritid minimum 14 timer. Beholderstørrelse 300 ml. En portabel terapienhet med praktisk bæreseske for mobile pasienter.



Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736820	340008.S-A	Acti V.A.C. terapienhet	1
736902	416030-A	Acti V.A.C. bæreseske	5
744052	413708	Ladeadapter Acti V.A.C. gen 3 - rund plugg	1

V.A.C. ULTA™ 4 terapienhet

V.A.C. ULTA™ 4 terapienhet for sårbehandling med negativt trykk. Alternativt kan V.A.C.® terapi kombineres med automatisk skylling av såret - V.A.C. VeraFlo™-terapi, hvor en kan tilsette ønsket væskeoppløsning i såret. Forenklet meny med hurtigvalg til anbefalte standardinnstillinger for de 4 terapiområdene: V.A.C., V.A.C. VERAFL0, PREVENA og ABTHERA.

Standardinnstillingene kan endres. Undertrykket kan justeres for hver -25mmHg mellom -25 til -200 mmHg. Alarm for avvikelser i behandlingen. Batteritid minimum 6 timer. Beholderstørrelser: 300, 500 eller 1000 ml.



Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736821	ULTDEV01-NO-A	V.A.C. ULTA™ 4 terapienhet	1
744053	4103730	Ladeadapter V.A.C. Ulta	1

BEHOLDER/CANISTER

Engangsbeholder for sårvæske inklusive slange, kobling og klemme. Alle beholdere passer til V.A.C. Ulta™ og Info V.A.C.®. Til Acti V.A.C.® passer kun 300 ml beholderen.



Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736712	M8275058-5-A	Beholder med gel - 300 ml	5
736742	M8275058-10-A	Beholder med gel - 300 ml	10
736717	M8275063-5-A	Beholder med gel - 500 ml	5
736743	M8275063-10-A	Beholder med gel - 500 ml	10
736720	M8275093-5-A	Beholder med gel - 1000 ml	5

V.A.C.® SIMPLACE™ EX DRESSING KIT

2 spiralformede, svarte skumbandasjer av polyuretan for enkel applikasjon. V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett.



Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736725	M8275046-5-A	Small Dressing Kit 7,7x11,2x1,75 cm	5
736716	M8275045-5-A	Medium Dressing Kit 14,7x17,4x1,75 cm	5

V.A.C.® TERAPI - BANDASJER OG TILBEHØR

V.A.C.® DERMATAC™ DRESSING KIT

Svart skumbandasje av polyuretan, V.A.C.® Dermatac sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744987	DTGF05PKSV002	Small Dermatac Dressing Kit 10x7,5x3,2 cm	5
744989	DTGF05PKMV002	Medium Dressing Kit 18x12,5x3,2 cm m/Dermatac	5
744991	DTGF05PKLV002	Large Dressing Kit 26x15x3,2 cm m/Dermatac	5



V.A.C.® GRANUFOAM™ DRESSING KIT

Svart skumbandasje av polyuretan, V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744039	M8275051-5-A	Small Dressing Kit 10x7,5x3,2 cm	5
736737	M8275051-10-A	Small Dressing Kit 10x7,5x3,2 cm	10
744040	M8275052-5-A	Medium Dressing Kit 18x12,5x3,2 cm	5
736738	M8275052-10-A	Medium Dressing Kit 18x12,5x3,2 cm	10
744041	M8275053-5-A	Large Dressing Kit 26x15x3,2 cm	5
736739	M8275053-10-A	Large Dressing Kit 26x15x3,2 cm	10
736723	M8275065-5-A	X-Large Dressing Kit 60x30x1,5 cm	5



V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ DRESSING KIT

Sølvskumbandasje av polyuretan med "micro-bonded" metallisk sølv, V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736721	M8275098-5-A	Small Dressing Kit 10x7,5x3,2 cm	5
736722	M8275096-5-A	Medium Dressing Kit 18x12,5x3,2 cm	5
736719	M8275099-5-A	Large Dressing Kit 26x15x3,2 cm	5



V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING

Hvit skumbandasje av polyvinylalkohol, V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736729	M6275033-10-A	Small Dressing 10x7,5x1 cm	10
736730	M6275034-10-A	Large Dressing 10x15x1 cm	10



V.A.C.® Gauze kit

Kerlix gas uten PHMB. V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744714	418313	Gauze Kit Large	10



V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING

Hvit skumbandasje av polyvinylalkohol, V.A.C.® Drape sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ Pad, engangslinjal med dokumentasjonsetikett. Passer til alle 3M s VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736745	M8275068-10-A	Small Dressing 10x7,5x1 cm	10
736744	M8275067-10-A	Large Dressing 10x15x1 cm	10



V.A.C.® GRANUFOAM™ BRIDGE DRESSING KIT

Ferdig innplastret bridge av svart skumbandasje i polyuretan med integrert Sensa T.R.A.C.™ Pad (67 cm), svart skumbandasje, V.A.C.® Drape sårfilm og engangslinjal. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.


Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736715	M8275042-5-A	Bridge Dressing Kit 6x17x1,9 cm	5



SENSA T.R.A.C.™ PAD

Sensa T.R.A.C.™ Pad med slange, kobling og klemme. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736741	M8275057-10-A	Sensa T.R.A.C.™ Pad	10

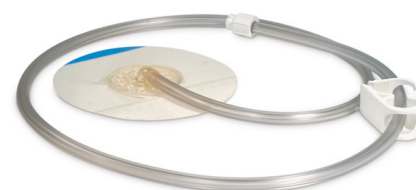

V.A.C.® DRAPE

V.A.C.® Drape sårfilm. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.


Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736727	M6275009-10-A	V.A.C.® Drape	10



V.A.C.® DERMATAC

V.A.C.® DERMATAC sårfilm. Hybrid med acryl/silikon, hudvennlig og gir en tett forbindelse. Passer til alle 3Ms VAC-pumper. 24,9x21 cm med håndtak. 19,7x21 uten håndtak.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744985	DTAC10LDPV002	V.A.C. Dermatac Drape only	10

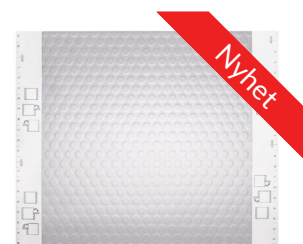

V.A.C.® TERAPI - BANDASJER OG TILBEHØR

V.A.C.® GEL

Dobbelklebende hydrogelremse for å sikre tetning ved vanskelige områder. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736728	M6275026-10-A	V.A.C.® Gel 14x3 cm	10



V.A.C.® Y KOBLING

Muliggjør kobling av to bandasjer/sår til en V.A.C.® terapienhet. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736733	M6275066-10-A	V.A.C.® Y kobling	10



V.A.C.® TUBING CAP

Brukes til forsegling av beholderens slangeende samt for feilsøking. Passer til alle 3Ms VAC-pumper.


Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736735	M6275069-10-A	V.A.C.® Tubing Cap	10



PRODUKTER FOR HÅNDTERING AV TARMFISTEL

Tre ulike produkter for å isolere og håndtere utsondring fra tarmfistler. Mykt, biokompatibelt materiale. Usteril.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
738521	860013000363-A	Wound Crown® for fistelhåndtering	1
738522	860013000370-A	Fistula Funnel® for fistelhåndtering	1
738523	860013000387-A	Isolator Strip® for fistelhåndtering	1

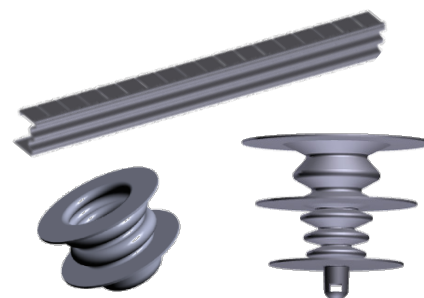

ABTHERA™

ABThera-systemet for behandling med negativt trykk av åpen buk er tiltenkt for midlertidig lukking av bukveggen der primær lukking ikke er mulig. Ved å klippe til den indre beskyttelsesduken kan størrelsen tilpasses. Settet inneholder to blå perforerte bandasjer, visceral beskyttelse, fire sårfilmer og Sensa T.R.A.C.™ slangesett.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
739763	ABT1055	ABThera™ advance	5



INNSNITTSBEHANDLING MED UNDERTRYKK

PREVENA™

Prevena™ for innsnittsbehandling. Bandasjer i ulike størrelser. Engangspumpen -125 mmHG finnes i to varianter - en liten batteridreven med 45 ml beholder samt en større oppladbar Prevena Plus™ med 150 ml beholder. Driftstid: 7 dager (uke). Bandasjene kan også brukes sammen med de store flergangspumpene. Beholderne på 45 ml og 150 ml er utbyttbare.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736697	PRE1101S-A	Prevena™ Peel & Place™-kit. 1 stk Prevena™-pumpe med beholder 45 ml, 1 stk. 13 cm Prevena™ alt-i-ett bandasje og 1 stk. bæreveske	1
736693	PRE1001S-A	Prevena™ Peel & Place™-kit. 1 stk Prevena™-pumpe med beholder 45 ml, 1 stk. 20 cm Prevena™ alt-i-ett bandasje og 1 stk. bæreveske	1
744046	PRE3201-A	Prevena™ Peel & Place™-kit. 1 stk Prevena™ Plus-pumpe med beholder 150 ml, 1 stk. 35 cm Prevena™ alt-i-ett bandasje, 1 stk. bæreveske og 1 stk. batterilader.	1
737640	PRE4001S-A	Prevena™ Customizable™-kit. 1 stk Prevena™ Plus-pumpe med beholder 150 ml, 1 stk. klippbar 90 cm Prevena™ bandasje, sårfilm, hydrokolloidremser, 1 stk. bæreveske og 1 stk. batterilader.	1
744043	PRE1121-A	Prevena Duo™-system med Peel & Place™-kit. 1 stk Prevena™-pumpe med beholder 45 ml, 2 stk. 13 cm Prevena™ alt-i-ett bandasje og 1 stk. bæreveske	1
744044	PRE1155-A	Prevena™ Peel & Place™-bandasje 13 cm	5
736695	PRE1055S-A	Prevena™ Peel & Place™-bandasje 20 cm	5
744047	PRE3255-A	Prevena™ Peel & Place™-bandasje 35 cm	5
737641	PRE4055S-A	1 stk. klippbar 90 cm Prevena™ bandasje, sårfilm, Sensa T.R.A.C.™ og hydrokolloidremser	5
736696	PRE1095S-A	Beholder 45 ml for Prevena™-pumpe	5
737642	PRE4095-A	Beholder 150 ml for Prevena™ Plus-pumpe	5



V.A.C.® PREVENA PLUS 14-DAGER

14-dagers oppladbar engangspumpe -125 mmHg, med utbyttbart 150ml canister, bæreveske og lader.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744601	PRE4010	V.A.C.® Prevena Plus 14-dagers pumpe	1
737642	PRE4095-A	Beholder 150 ml for Prevena™ Plus-pumpe	5



PREVENA™ RESTOR BELLA-FORM

Prevena™ Restor Bella-Form for innsnittsbehandling på bryst. Bandasjer i ulike størrelser. System-kit kommer med 2 bandasjer og oppladbar Prevena Plus™ med 150 ml utbyttbar beholder. Driftstid: 14 dager. Bandasjene kan også brukes sammen med de store flergangspumpene.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
744039	PRE5255	Prevena restor bella-form dressing 21x19 cm	5
736737	PRE5355	Prevena restor bella-form dressing 24x22 cm	5
744040	PRE5455	Prevena restor bella-form dressing 29x27 cm	5
736738	PRE5221	Prevena restor bella-form system kit 21x19 cm	1
744041	PRE5321	Prevena restor bella-form system kit 24x22 cm	1
736739	PRE5421	Prevena restor bella-form system kit 29x27 cm	1



TILBEHØR TIL V.A.C. ULTA™ TERAPIENHET

V.A.C. VERAFLU™ DRESSING

To spiralformede skumbandasjer, V.A.C.® Drape sårfilm, V.A.C. Vera T.R.A.C.™ Pad med slange og engangslinjal med dokumentasjonsetikett.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736705	ULTVFLO5SM-NSP-A	V.A.C. VeraFlo™ Dressing Small 11x8x1,8 cm	5
736704	ULTVFLO5MD-NSP-A	V.A.C. VeraFlo™ Dressing Medium 17x15x1,8 cm	5
736703	ULTVFLO5LG-NSP-A	V.A.C. VeraFlo™ Dressing Large 25x15x1,6 cm	5



V.A.C. VERAFLU CLEANSE™ DRESSING

Skumbandasje, to V.A.C.® Drape sårfilm, V.A.C. Vera T.R.A.C.™ Pad med slange og engangslinjal med dokumentasjonsetikett.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736702	ULTVCLO5MD-NSP-A	V.A.C. VeraFlo Cleanse™ Dressing M 61x3,2 cm Ø	5



V.A.C. VERAFLU CLEANSE CHOICE™ DRESSING

Bandasjen består av tre lag, kontaktlaget tilfører en "mekanisk" bevegelse i såret som gir en bedre rengjøring. To lag gjør det mulig å bruke bandasjen i sår med ulik dybde. Kittet inneholder også en V.A.C. Vera T.R.A.C.™ kobling, fire V.A.C.® sårfilm og engangslinjal.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
739666	ULTVCCO5MD-NSP-A	V.A.C. VeraFlo Cleanse Choice™ Dressing M 12,5x18 cm (2 stk m/0,8 cm tykkelse, 1 stk m/1,6 cm tykkelse)	5
739764	ULTVCCO5LG-NSP-A	V.A.C. VeraFlo Cleanse Choice™ Dressing L 25,6x15 cm (2 stk m/0,8 cm tykkelse, 1 stk m/1,6 cm tykkelse)	5



KASSETT OG SLANGESETT

V.A.C. VeraLink™ regulerer tilførselen av sårløsninger. Kassetts med kobling for installasjon. V.A.C. Vera T.R.A.C. Duo™ slangesett.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
736701	ULTLNK0500-A	V.A.C. VeraLink™ kassett	5
736700	ULTLDUO0500-A	V.A.C. Vera T.R.A.C. Duo™ slangesett	5



UNDERTRYKKSBEHANDLING AV MINDRE SÅR

SNAP™

Ultraportabelt dNPWT-system med integrert beholder. SNAP™ er stillegående og hindrer ikke daglige aktiviteter. Enheten er diskret og kan lett skjules under klærne. 60 ml Snap™ finnes med -75, -100 og -125 mmHg undertrykk. 150 ml Snap™ finnes med -125 mmHg undertrykk. SNAP™ behøver ingen strømkilde eller batteri.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
737660	SNPA125	Snap™ terapienhet -125mmHg 60 ml grønn	1
739760	SNPA100	Snap™ terapienhet -100mmHg 60 ml blå	1
739761	SNPA75	Snap™ terapienhet -75mmHg 60 ml oransje	1
739646	SNPA125P	Snap™ terapienhet -125mmHg 150 ml grønn	1

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
737661	SKTF10X10-A	Snap™ skumbandasje med tynn hydrokolloid og slangetilkobling 10x10 cm	1
737662	SKTF15X15-A	Snap™ skumbandasje med tynn hydrokolloid og slangetilkobling 15x15 cm	1
739762	SKTF20X20-A	Snap™ skumbandasje med tynn hydrokolloid og slangetilkobling 20x20 cm	1
737878	BKTF14X11S-A	Snap™ Bridge bandasje med Snap™ SecurRing™ hydrokolloid 14x11 cm	1
700612		Snap™ SecurRing™, stomipasta 5 cm Ø	30
737663	STPAS-A	Snap™ festebånd til 60 ml 46 cm (liten)	1
737664	STPAM-A	Snap™ festebånd til 60 ml 53 cm (medium)	1
737665	STPAL-A	Snap™ festebånd til 60 ml 61 cm (stor)	1
739647	STPASP-A	Snap™ festebånd til 150 ml 46 cm (liten)	1
739648	STPAMP-A	Snap™ festebånd til 150 ml 53 cm (medium)	1
739649	STPALP-A	Snap™ festebånd til 150 ml 61 cm (stor)	1



NANOVA™


NANOVA™ er en absorberende bandasje som er forsterket med -125 mmHg undertrykk. Bandasjen har et silikonlag for ikke å feste seg i sårbunnen, og et absorberende lag som inneslutter såreksudat. Nanova™ terapienhet behøver ingen strømkilde eller batteri, er stille og lett og kan bæres i lommen.

Varenr.	Art. nr.	Tekst	Enhet
737282	NANTU-R3-A	Nanova™ terapienhet -125mmHg Holdbarhet: 30 dager	1
737283	NANGFS-R3-A	Nanova™ bandasje 14x18 cm, sårdyne 6x10 cm + GranuFoam®	3
737284	NANGFM-R3-A	Nanova™ bandasje 18x18 cm, sårdyne 10x10 cm + GranuFoam®	3
737285	NANGFL-R3-A	Nanova™ bandasje 18x28 cm, sårdyne 10x20 cm + GranuFoam®	3




Kun V.A.C.® Therapy fungerer som V.A.C.® Therapy

V.A.C.® Therapy er det eneste systemet for sårbehandling med negativt trykk som har SENSAT.R.A.C.™ Technology. En patentert teknikk som beholder og tilpasser innstilt negativt trykk i sårområdet.

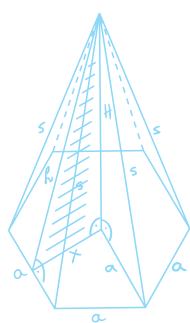

$$y = 1/2 x + 2$$

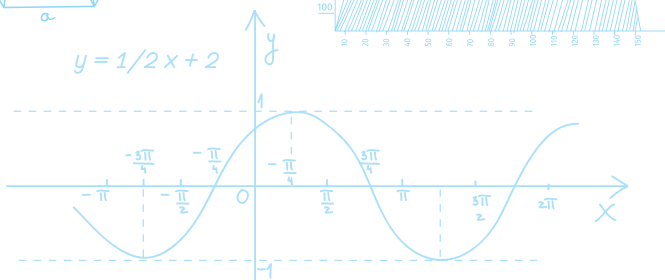

SENSAT.R.A.C.™ Technology med programvare som overvåker, tilpasser og gir kontinuerlig overvåkning av innstilt negativt trykk. Det skjer med hjelp av komplekse algoritmer, tilpasning av pumpens uteffekt og kompensasjon for høydeforskjeller og sårvæskens viskositet.



SENSAT.R.A.C.™ -slangen fjerner effektivt sårveske fra såret og overvåker måltrykket.



Behandlingsenhetene V.A.C.ULTA™, og INFOV.A.C.™ bruker samme SENSAT.R.A.C.™ Technology som behandlingsenheten ACTIV.A.C.™ brukte ved vitrotesten.

SENSAT.R.A.C.™ - pad i kombinasjon med SENSAT.R.A.C.™ -programvaren hjelper til å tilpasse og beholde trykket.

Flerlumenslange sammenlignet med enkellumenslange

Vår patenterte teknikk gjør V.A.C.® Therapy til den eneste enheten med NPWT for overvåking av trykkforandringer i sårområdet.

- Konstruert med SENSAT.R.A.C.™ Technology et system som gir kontinuerlig tilbakemelding av det negative trykket
- Tilpasser og overvåker trykket i sårområdet
- Alarm ved avvikelser f.eks. blokkering
- Utløser positiv luftstrøm gjennom de yttre lumen ca. hvert 5. minutt for å bidra med å minske blokkeringer
- Hjelper til med å opprettholde et konstant væskefjerningsmiljø



Eneste NPWT-system med flerlumenslange som kan:

- Oppdage trykkforandringer, blokkeringer og alarmere når måltrykket ikke oppnås
- Tvinge inn luft i systemet for å bidra med å minske blokkeringer (dvs. EASYCLEAR PURGE™ Technology)
- Registrere om det blir trykkendringer i sårområdet
- Regulere og vedlikeholde trykk under endrede forhold

Har ditt NPWT-system en slange med flere lumen?

SENSAT.R.A.C.™ med EASYCLEAR PURGE™ Technology

Andre NPWT-enheter er utformet med enkellumen for å fjerne sårveske.

Dette kan vise seg å være problematisk hvis lumen blir blokkert.

Utformingen av SENSAT.R.A.C.™ Technology med flere lumen:

- Er konstruert for å opprettholde trykkinnstillingene (identifisert som 125 mmHg)
- Har en separat lumen for å fjerne sårveske
- Opprettholder og overvåker trykk gjennom fire ytre lumen

SENSAT.R.A.C.™ med EASYCLEAR PURGE™ Technology:

- Tvinger regelmessig luft inn gjennom de ytre lumen for å bidra til å forebygge og fjerne blokkeringer
 - Hjelper til med å fjerne væske fra de ytre lumen for å opprettholde evnen til å registrere undertrykket
 - Hjelper til med å fjerne væske i indre lumen som ikke føres opp (vanligvis pga. en blokkering)



Ønsker du mer informasjon?



Lars Tveit
Salgssjef Hospital
Tlf. 412 16 700
lars.tveit@mediq.com



Mina Husby
Produktspesialist
Tlf. 954 95 970
mina.husby@mediq.com



Inger Lise Blindheim
Produktspesialist
Tlf. 911 84 810
ingerlise.blindheim@mediq.com

Mediq Norge AS
P.b. 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf. **67 02 43 00**
kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no



100 år med medisinsk utstyr