

PRODUKTFAKTABLAD

TENA PANTS NIGHT



Användningsområde

TENA Pants Night i Super absorption är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora till mycket stora urinläckage och är speciellt utformat för nattanvändning. Skyddet finns i storlekarna Medium och Large och i en absorptionsnivå. Skyddet tas enkelt på och av som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.




Sidosömmar som går att riva

Mjuka, andningsbara, textilliknande material i hela produkten för god hudhälsa och komfort för användaren

Mer absorption där bak
Håller huden torrare och skyddad under längre tid

Mjuka, höga läckagebarriärer för optimalt skydd under natten oberoende sovställning

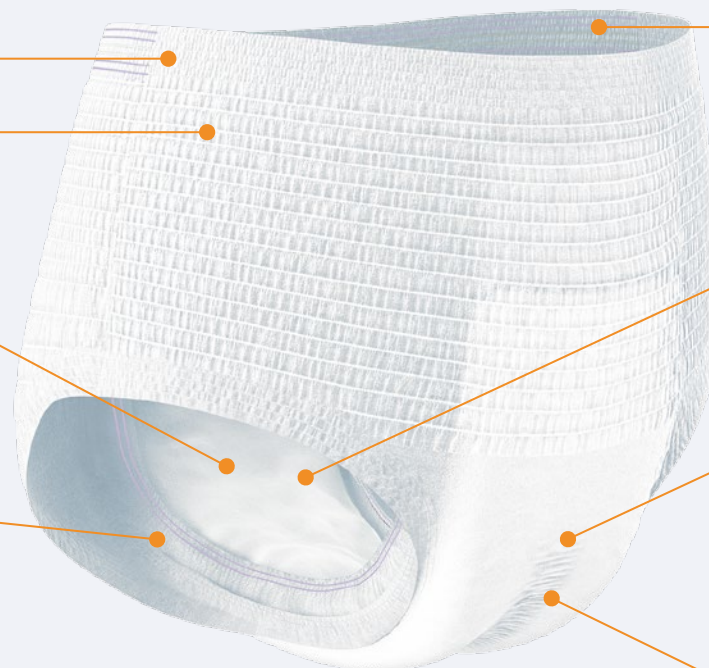

Färgad midjeelastik visar absorptionsnivå

Unik dubbel absorptionszon

Dubbla kanaler som sprider vätska effektivt och möjliggör en tunnare produkt med bibehållen kapacitet.

Innovativ resår under kärnan ger kroppsnära passform och smidighet i grenen. Produkten sjunker inte ner i vått tillstånd.

Diskret våtindikator

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS NIGHT

Produktegenskaper

TENA Pants Night är speciellt utformad för nattanvändning och erbjuder ökad läckagesäkerhet och torrhet under hela natten. Den unika nattkärnan har högre absorptionsförmåga baktill* där det har störst betydelse under natten då man ligger ner. Kanalerna i kärnan leder vätskan bakåt oavsett sovställning.

Benelastik tillsammans med mjuka, höga läckagebarriärer som sluter tätt mot huden gör skyddet både bekvämt och läckagesäkert. Läckagebarriärerna ger ett optimalt skydd under natten oberoende vilken sovställning, men speciellt när man sover på sidan.

Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr, vilket främjar en god hudhälsa. TENA Pants Night är gjorda av mjuka, andningsbara och prasselfria material vilket ger ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Midjeresårerna (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Färgad trådelastik i midjan visar skyddets baksida.

*Jämfört med TENA Pants Super



TENA Pants Night								
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/höft cm	Vikt g	Benöppning cm	Antal/påse st	Antal/kart st	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Essity Art.nr
Super								
Medium	✓	80-110	83	45-70	10	80	1926	79 35 79
Large	✓	100-135	86	55-80	10	80	1950	79 36 78

Användarinstruktion



PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS NIGHT

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt neutralisera oönskad lukt

HÖFT-, GREN- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

BEN- OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige

 **essity** TENA,
an Essity brand

