


UTVIKLET FOR DINE HENDER

OPERASJONSHANSKER

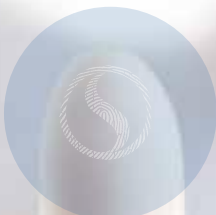

Sempermed Supreme – Quality all along the line
Sempermed Syntegra IR – A safe solution for people allergic to latex
Sempermed Supreme Plus – Sure grip
Sempermed Syntegra UV – A new dimension of skin-friendliness and wearing comfort
Sempermed Syntegra Green – For particularly sensitive areas
Sempermed Supreme Green – For the best hands
Sempermed Dextra Plus – For sensitive hands
Sempermed Senso – A perfect combination for your protection

DINE HENDER – I DE BESTE HENDER

Med mer enn 90 års forskning, utvikling og produksjonskunnskap, står Sempermeds operasjonshansker for overlegen sikkerhet og profesjonalitet.

Fremfor alt utmerker Sempermeds operasjonshansker seg med sin unike kombinasjon av perfekt grep, optimale taktile egenskaper og maksimal komfort. Det brede produktspekteret fra klassiske operasjonshansker til spesialhansker med spesifikke produkt- og materialegenskaper tilbyr den rette løsningen for ethvert behov.

Kompetansen til en Europeisk produsent kombinert med lokal produktkunnskap- og service gjør Sempermed til din problemløser for alle utfordringer med operasjonshansker.

OPTIMAL SIKKERHET

Overlegen yteevne



Du jobber i et høysensitivt område som krever presis motorikk og optimal taktil følelse. Den avgjørende faktoren for maksimal sikkerhet med utmerket taktil følelse er hansketykkelsen. Takket være motstanden i latex-filmen i alle Sempermeds operasjonshansker, har tykkelsen i hanskematerialet kunnet reduseres til et nivå som gir deg ubegrensede taktile egenskaper og samtidig garanterer deg maksimal sikkerhet.

UTRETTELIG OG SIKKERT ARBEID

Maksimal komfort



De kirurgiske kravene til en full-anatomisk hanske som gjør det mulig å arbeide utrettelig var grunnlaget for flere års utvikling av hanskeformen. Hansken er formet som en avslappet hånd med naturlig bøyde fingre, og formen garanterer at du kan jobbe utrettelig med Sempermed operasjonshansker.

Andre særtrekk ved Sempermed-formen er den ekstra brede baksiden av hånden, som reduserer tretthetstegn og den koniske mansjetten som formes etter håndleddets anatomi, samt rullekanten som utgjør en sikker barriere mot operasjonsfrakken.

PERFEKT INSTRUMENT-FØRING

Sikkert grep for en sikker følelse




Den perfekte operasjonshansken er aldri glatt, men samtidig må ikke instrumentene klebre seg til den heller. For å skape den perfekte hansken, er overflaten på porselensformene til Sempermed-hansker mikroru og sikrer dermed at hanskene har det ideelle grepet. Dette grepet er også optimalisert videre gjennom kjemisk overflatebehandling. Innenfor det brede utvalget av Sempermed operasjonshansker, tilbyr Sempermed Supreme Plus maksimalt grep og kombinerer samtidig optimal sikkerhet, ideell taktil følsomhet og perfekt instrumentføring!

PATENTERT TEKNOLOGI

– ENKEL Å DRA PÅ

Nettlignende struktur på coating reduserer friksjon > enkel påføring

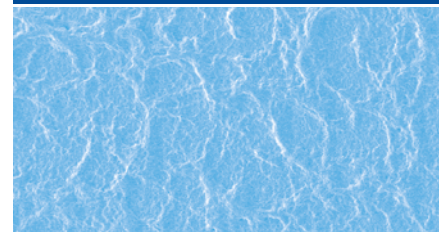

INTRA-OPERATIVT

HANSKE-BYTTET



DOBLE HANSKER DOBBEL BESKYTTELSE



OVERLEGEN HUDVENNLIGHET

Til fordel for din hud



ANSVAR FOR GENERASJONER



KVALITET FRA HJERTET AV EUROPA



Den patenterte syntetiske coatingen til våre pudderfrie operasjonshansker har ikke en jevn overflate, dens nettlignende struktur reduserer friksjonsmotstand betydelig når man drar på hanskene. Strukturen gjør det enkelt for hansken å gli over hudoverflaten og forbedrer således også brukskomforten.

Ifølge studier får mellom 10-45% av alle operasjonshansker perforasjoner avhengig av det respektive inngrep. Opptil 50,5% av disse perforasjonene oppstår i løpet av de første 30 minuttene av inngrepet (se PubMed: «The risk of surgical glove perforation» Norge mars 2007 og «Glove perforation rate in open lung surgery» Wien 1999). Under lengre inngrep oppstår også perspirasjon mellom hudoverflaten og hansken. Den unike coatingen til Sempermed operasjonshansker gjør de svært enkle å bytte ut og ta på nye.

I særdeles krevende situasjoner eller med høyrisiko-pasienter, gir to lag hansker ovenpå hverandre maksimal beskyttelse. Sempermed operasjonshansker garanterer at to hansker kan benyttes oppå hverandre uten problemer. Anbefalt: Den indre hansken bør være en halv størrelse større enn din standard-størrelse.

I de spesielt utviklede helautomatiske avslutningsprosessene, blir Sempermed hanskene vasket flere ganger. Som et resultat av dette blir hudirriterende substanser fra produksjonen samt proteininnholdet av naturgummi-latex redusert til det teknisk mulig laveste nivå. Dette bidrar også til å redusere risikoen for partikler i operasjonsrommet og formasjon av granulomer i pasienten signifikant. Det sier seg selv at det brede utvalget av pudderfrie operasjonshansker for ulike behov er basert på medisinske, menneskelige og miljømessige faktorer.

Under produksjon av operasjonshansker tar Sempermed ikke bare ansvar for din sikkerhet, men også velferden til fremtidige generasjoner. For oss er det selvsagt å produsere med miljøvennlige høyteknologiske prosesser og utstyr, samtidig som bruken av aggressive kjemikalier reduseres gjennom innovative metoder og konstant miljøvennlig optimalisering av produksjonsprosessen.

I tillegg til forskning og utvikling, har sikkerhet og kvalitet topp prioritet hos Sempermed. Som et resultat av konsistent høy produktkvalitet og konstant streben etter perfektjon, er våre AQL-verdier (Acceptable Quality Level – en av de viktigste kvalitetskriteriene innen produksjon) lavere enn den lovbestemte AQL. Den sentrale plasseringen av vårt Europeiske produksjonsanlegg med maksimale krav til kvalitetskontroll og forskning, og utvikling på høyeste Europeiske nivå er vårt bidrag til din sikkerhet.

sempermed®

syntegra IR

PROFYLAKSEN FOR LATEX-ALLERGI – Innvasjonen i operasjonsrommet: syntetisk polyisopren (IR) utmerker seg med samme fysiske egenskaper som naturgummi-latex: maksimal elastisitet og rivestyrke, med lavt strekk.



PRODUKTEGENSKAPER

- Kirurg, operasjonspersonale og pasient drar nytte av syntetisk polyisopren
- Pudderfri, uten naturgummi-latex, uten allergene proteiner
- Optimal sikkerhet
- Perfekt grep gjennom mikroru overflate-tekstur, også i fuktige omgivelser
- Taktil følsomhet som naturgummi-latex
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	827056521	Str 7.5	827056721
Str 6.0	827056601	Str 8.0	827056801
Str 6.5	827056621	Str 8.5	827056821
Str 7.0	827056701	Str 9.0	827056901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Pudderfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Syntetisk polyisopren		
FARGE	Kremfarget		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE	5½, 6 og 6 ½	min. 270 mm	
I henhold til EN 455-2	7, 7 ½ og 8	min. 280 mm	
	8½ og 9	min. 285 mm	
TYKKELSE	0.19 - 0.24 mm		
Målt i håndflaten, enkelt lag			
UGJENNOMTRENGELIGHET	AQL 1.0		
I henhold til EN 455-1			
STREKKSTYRKE	≥ 9 N		
I henhold til EN 455-2			
HOLDBARHET	3 år		
I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230			
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispensereseke med steriliserings-indikator: 40 par i transportkartong med steriliserings-indikator 240 par		

sempermed®

syntegra green

FOR ØKT SIKKERHET – Den ideelle innerhansken: Den grønne fargen forenkler påvisning av en hanskeperforasjon under det kirurgiske inngrepet. Denne polyisopren-hansken i kombinasjon med Sempermed Syntegra IR er den optimale hanskелøsningen med hensyn til hudvennlighet og komfort.



PRODUKTEGENSKAPER

- Kirurg, operasjonspersonale og pasient drar nytte av syntetisk polyisopren
- Pudderfri, uten naturgummi-latex, uten allergene proteiner
- Optimal sikkerhet
- Taktil følsomhet som naturgummi-latex
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre
- For maksimal sikkerhet i særlig kritiske situasjoner, anbefaler Sempermed å bruke to par hansker utenpå hverandre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	827053521	Str 7.5	827053721
Str 6.0	827053601	Str 8.0	827053801
Str 6.5	827053621	Str 8.5	827053821
Str 7.0	827053701	Str 9.0	827053901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Pudderfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Syntetisk polyisopren		
FARGE	Kremfarget		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE	5 ½, 6 og 6 ½	min. 270 mm	
I henhold til EN 455-2	7, 7 ½ og 8	min. 280 mm	
	8 ½ og 9	min. 285 mm	
TYKKELSE	0.15 mm		
Målt i håndflaten, enkelt lag			
UGJENNOMTRENGELIGHET	AQL 1.0		
I henhold til EN 455-1			
STREKKSTYRKE	≥ 9 N		
I henhold til EN 455-2			
HOLDBARHET	3 år		
I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230			
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispensereseke med steriliserings-indikator: 40 par i transportkartong med steriliserings-indikator 240 par		

sempermed®

supreme

KVALITET HELE VEIEN – Sempermed Supreme står for kvalitet og pålitelighet, ikke uten grunn til at det er en av de mest brukte pudderfrie operasjonshanskene i Europa.



PRODUKTEGENSKAPER

- Patentert syntetisk coating for enkel påføring og fjerning
- Gjentatte vaskeprosesser, absolutt pudderfri
- Utmerker seg med svært god hudvennlighet
- Tilfører ingen partikler til operasjonsrommet eller pasient da den er pudderfri, ingen formasjon av granulomer
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	822751521	Str 7.5	822751721
Str 6.0	822751601	Str 8.0	822751801
Str 6.5	822751621	Str 8.5	822751821
Str 7.0	822751701	Str 9.0	822751901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Pudderfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Naturgummi-latex		
FARGE	Naturlig hvit		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE	5 ½, 6 og 6 ½	min. 270 mm	
I henhold til EN 455-2	7, 7 ½ og 8	min. 280 mm	
	8 ½ og 9	min. 285 mm	
TYKKELSE	0.19 - 0.23 mm		
Målt i håndflaten, enkelt lag			
UGJENNOMTRENGELIGHET	AQL 1.0		
I henhold til EN 455-1			
STREKKSTYRKE	≥ 12 N		
I henhold til EN 455-2			
HOLDBARHET	3 år		
I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230			
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispensereseke med steriliserings-indikator: 50 par i transportkartong med steriliserings-indikator 300 par		

sempermed®

supreme plus

SIKKERT GREP– Fast grep i enhver situasjon med maksimal sikkerhet, ideell taktil følsomhet og perfekt instrumenthåndtering.



PRODUKTEGENSKAPER

- Beste grepet i Sempermeds produktsortiment
- Patentert syntetisk coating for enkel påføring og fjerning
- Gjentatte vaskeprosesser, absolutt pudderfri
- Tilfører ingen partikler til operasjonsrommet eller pasient da den er pudderfri, ingen formasjon av granulomer
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	822851521	Str 7.5	822851721
Str 6.0	822851601	Str 8.0	822851801
Str 6.5	822851621	Str 8.5	822851821
Str 7.0	822851701	Str 9.0	822851901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Puddorfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Naturgummi-latex		
FARGE	Hvit		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE	5 ½, 6 og 6 ½	min. 270 mm	
I henhold til EN 455-2	7, 7 ½ og 8	min. 280 mm	
	8 ½ og 9	min. 285 mm	
TYKKELSE	0.19 - 0.23 mm		
Målt i håndflaten, enkelt lag			
UGJENNOMTRENGELIGHET	AQL 1.0		
I henhold til EN 455-1			
STREKKSTYRKE	≥ 12 N		
I henhold til EN 455-2			
HOLDBARHET	3 år		
I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230			
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispensereseke med steriliserings-indikator: 50 par i transportkartong med steriliserings-indikator 300 par		

sempermed® supreme green

OPTIMALISERT INNERHANSKE – Den grønne fargen forenkler påvisning av en hanskeperforasjon under operasjonen. I kombinasjon med Sempermed Supreme eller Sempermed Supreme Plus, utgjør Sempermed operasjonshansker den optimale hanskeløsningen med hensyn til sikkerhet og komfort.

PRODUKTEGENSKAPER

- Glatt overflatestruktur – meget enkel å dra på
- Tynnere materialtykkelse – økt taktil følsomhet
- Høy sikkerhet – hurtig påvisning av perforasjoner
- For maksimal sikkerhet i særlig kritiske situasjoner, anbefaler Sempermed å bruke to par hansker utenpå hverandre
- Pudderfri naturgummi-latex
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	823756521	Str 7.5	823756721
Str 6.0	823756601	Str 8.0	823756801
Str 6.5	823756621	Str 8.5	823756821
Str 7.0	823756701	Str 9.0	823756901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Pudderfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Naturgummi-latex		
FARGE	Grønn		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE I henhold til EN 455-2	5 ½, 6 og 6 ½ 7, 7 ½ og 8 8 ½ og 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm	
TYKKELSE Målt i håndflaten, enkelt lag	min. 0.17 mm		
UGJENNOMTRENGELIGHET I henhold til EN 455-1	AQL 1.0		
STREKKSTYRKE I henhold til EN 455-2	≥ 12 N		
HOLDBARHET I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år		
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispenserenske med steriliserings-indikator: 50 par i transportkartong med steriliserings-indikator 300 par		

sempermed® senso

FOR SÆRLIG ØMFINTLIGE OMRÅDER – Den ekstra-tynne operasjonshansken Sempermed Senso legger til rette for aktiviteter som krever presis fin-motorikk, ideell taktil følsomhet med maksimal sikkerhet, selv i høy-sensitive områder. Utviklet spesielt for kravene innen mikrokirurgi, særlig velegnet for applikasjoner innen f eks nevrologi, endoskopi, øye- og karkirurgi.

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjentatte vaskeprosesser, absolutt pudderfri
- Maksimal sikkerhet, jevn tykkelse
- Høy sikkerhet – hurtig påvisning av perforasjoner
- Perfekt grep, mikroru overflate-tekstur
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	821751521	Str 7.5	821751721
Str 6.0	821751601	Str 8.0	821751801
Str 6.5	821751621	Str 8.5	821751821
Str 7.0	821751701	Str 9.0	821751901

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri		
MATERIALE	Naturgummi-latex		
FARGE	Brun		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE I henhold til EN 455-2	5½ 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½ og 9	min. 250 mm min. 280 mm	
TYKKELSE Målt i håndflaten, enkelt lag	0.14 - 0.18 mm		
UGJENNOMTRENGELIGHET I henhold til EN 455-1	AQL 1.0		
STREKKSTYRKE I henhold til EN 455-2	≥ 12 N		
HOLDBARHET I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år		
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispenserenske med steriliserings-indikator: 50 par i transportkartong med steriliserings-indikator 300 par		

sempermed® derma PF

FOR SENSITIVE HENDER – Det økonomiske alternativet for følsomme hender gir bedre grep kombinert med optimal taktil følsomhet og sikker instrumentføring.

PRODUKTEGENSKAPER

- Pudderfri og ekstremt hudvennlig
- Enkel å dra på
- Trygg føring av instrumenter med optimalt grep
- Anatomisk perfekt form med bredere og mer komfortabel bakside av hånden og naturlig bøyde fingre

ARTIKKELNUMMER

Str 5.5	822751522	Str 7.5	822751722
Str 6.0	822751602	Str 8.0	822751802
Str 6.5	822751622	Str 8.5	822751822
Str 7.0	822751702	Str 9.0	822751902

TEKNISKE DATA

TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, Pudderfri, med syntetisk coating		
MATERIALE	Naturgummi-latex		
FARGE	Hvit		
HANSKEFORM	Full anatomisk med rullekant		
LENGDE/STØRRELSE I henhold til EN 455-2	5 ½, 6 og 6 ½ 7, 7 ½ og 8 8 ½ og 9	min. 265 mm min. 275 mm min. 280 mm	
TYKKELSE Målt i håndflaten, enkelt lag	0.1 - 0.20 mm		
UGJENNOMTRENGELIGHET I henhold til EN 455-1	AQL 1.0		
STREKKSTYRKE I henhold til EN 455-2	≥ 12 N		
HOLDBARHET I original forpakning og lagret i henhold til DIN 7716, ISO 2230	3 år		
STERILISERING	Gammastråling med minst 2.5 Mrad (25 kGy)		
FORPAKNING	Venstre og høyre hanske med foldet mansjett, i fiberfri innerpose, ozon-tett, forseglet i flat medisinsk forpakning i dispenserenske med steriliserings-indikator: 50 par i transportkartong med steriliserings-indikator 300 par		

OPERASJONSHANSKER TIL ENGANGSBRUK FRA SEMPERMED



	sempermed syntegra IR	sempermed syntegra green	sempermed supreme	sempermed supreme plus
TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating
MATERIALE	Syntetisk polyisopren	Syntetisk polyisopren	Naturgummi-latex	Naturgummi-latex
FARGE	Kremfarget	Grønn	Naturlig hvit	Hvit
TYKKELSE Målt i enkelt lag i håndflaten	0.19 - 0.24 mm	0.15 mm	0.19 - 0.23 mm	0.19 - 0.23 mm
BRUDDSTYRKE I henhold til EN 455-2	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 12 N	≥ 12 N



	sempermed supreme green	sempermed senso	sempermed derma PF
TYPE	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri	Steril operasjonshanske til engangsbruk, pudderfri, med syntetisk coating
MATERIALE	Naturgummi-latex	Naturgummi-latex	Naturgummi-latex
FARGE	Grønn	Brun	Hvit
TYKKELSE Målt i enkelt lag i håndflaten	min. 0.17 mm	0.14 - 0.18 mm	0.16 - 0.20 mm
BRUDDSTYRKE I henhold til EN 455-2	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N

ONEMED

KONTAKT!

OneMed AS
Karihaugveien 89 · 1086 Oslo
Tlf 22 30 91 00 · Fax 22 30 91 01
www.onemed.no · post.no@onemed.com

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.
Segment Sempermed · Austria · 1030 Vienna · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com