

evercare[®] inLine Monosett 1-veis, PVC-fri

REF: 10515-01

evercare[®] inLine Monosett er et trygt system for å blande og fremstille legemidler. Ved hjelp av systemet minimerer brukeren søl og aerosoler fra farlige stoffer. Monosett er sterile engangsprodukter som brukes til å overføre intravenøse væsker til pasientens vaskulære system ved å koble en infusjonskilde i den ene enden og en infusjonsenhet med vaskulær tilgang i den andre. Væsken overføres ved hjelp av tyngdekraften, og flow rate justeres med en rulleklemme.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Gjennomsiktig, mykt dråpekammer for enkel klemming og fylling
- ▶ Partikkelfilter på 15 µm nederst i dråpekammeret
- ▶ Hydrofobt filter forhindrer lekkasje under grunning
- ▶ Sideslange
- ▶ 15 cm lang slange med sidenål
- ▶ Avstengningsklemme for å stoppe væskestrømmen i slangen
- ▶ Roterende luer lock




REF	Beskrivelse	Størrelse - Slange innvendig/utvendig, L(lengde)	Priming volume(ml) Ca.	Antall per dispenser/kartong
10515-01	Monosett 1-veis, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 180cm	11.7	15 / 60

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.

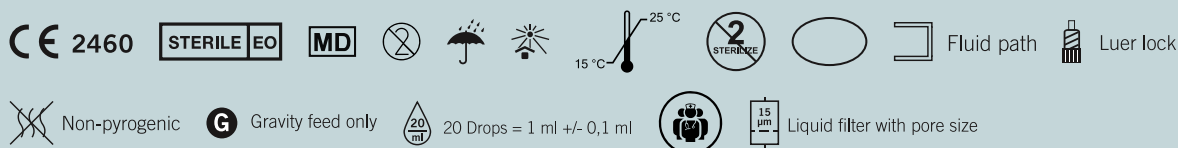

REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN 8536-4, EN ISO 80369-7

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt del

Råmateriale og egenskaper

Advarsler og anbefalinger

Advarsler

Produktet skal brukes av lege eller sykepleier.
Les bruksanvisningen før bruk. Enheten skal brukes i samsvar med instruksjonene.
Må ikke brukes til overføring av blod eller blodkomponenter.
Enheten er garantert steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er åpnet eller skadet. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet, eller hvis beskyttelseshettene er løse eller mangler.
Ikke stram koblingen for mye. Det kan skade både koblingsdelen og den andre koblingsenheten.
Ikke bruk instrumenter til å klemme på slangen eller koblingen.
Gjenbruk kan føre til infeksjon eller annen sykdom/skade.

Anbefalt oppbevaring

Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

Anbefalt kassering

Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

Holdbarhet

5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	235 x 100
Dispenserpakning	PP	305 x 460 x 0
Transportkartong	TCF kvalitet, Kartong	400 x 295 x 287
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
10515-01	06438129123579	N/A	06438129523577

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.