


evercare® inLine Gravitasjonssett, uten lufting, FilterStop, PVC-fri

REF: 10598, 10599

evercare® inLine Gravitasjonssett er sterile engangsprodukter som brukes til å overføre intravenøse væsker til pasientens vaskulære system ved å koble en infusjonskilde i den ene enden og en infusjonsenhet med vaskulær tilgang i den andre. Væsken overføres ved hjelp av tyngdekraften, og flow rate justeres med en rulleklemme. De ikke-ventilerte gravitasjonssettene er egnet for infusjon med plastposer eller flasker, og det er ikke behov for ventilerings, slik at man unngår risikoen for infusjon av luft.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Gjennomsiktig, mykt dråpekammer for enkel klemming og fylling
- ▶ Partikkelfilter nederst i dråpekammeret
- ▶ Hydrofobt filter forhindrer lekkasje under grunning
- ▶ Roterende luer lock

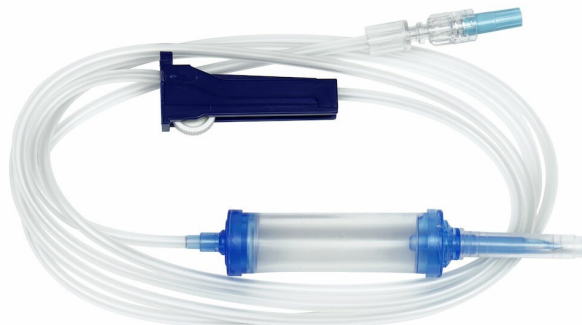

REF	Beskrivelse	Størrelse - Slange innvendig/utvendig, L(lengde)	Priming volume(ml) Ca.	Antall per dispenser/kartong
10598	Gravitasjonssett, uten lufting, FilterStop, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 180cm	11.7	20 / 80
10599	Gravitasjonssett, uten lufting, FilterStop, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 320cm	20.8	15 / 60

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.

























Luer lock



Non-pyrogenic



20 Drops = 1 ml +/- 0,1 ml





Liquid filter with pore size

REACH-forordningen:	Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-01
Etterlevelse av regelverk:	Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
Samsvar med produktstandarder:	EN 8536-8, EN ISO 80369-7
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etikettinformasjon og emballasje:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
-------------	---------------------------

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet skal brukes av lege eller sykepleier. Les bruksanvisningen før bruk. Enheten skal brukes i samsvar med instruksjonene. Må ikke brukes til overføring av blod eller blodkomponenter. Enheten er garantert steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er åpnet eller skadet. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet, eller hvis beskyttelseshettene er løse eller mangler. Ikke stram koblingen for mye. Det kan skade både koblingsdelen og den andre koblingsenheten. Ikke bruk instrumenter til å klemme på slangen eller koblingen. Gjenbruk kan føre til infeksjon eller annen sykdom/skade.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	235 x 100
Dispenserpakning	PP	305 x 460 x 0
Transportkartong	TCF kvalitet, Kartong	400 x 295 x 287
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekkode / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
10598	06438129124200	N/A	06438129524208
10599	06438129124217	N/A	06438129524215

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.