

TENA®

Produktdatablad TENA ProSkin Slip

Bruksområde

TENA Slip er et lekkasjesikkert og komfortabelt alt-i-ett-produkt for middels til tung inkontinens. Det finnes i fire absorpsjonsnivåer (Plus, Super, Maxi og Ultima) og tillater individuell tilpasning takket være flere størrelser.



Enkel å håndtere

Med kombinert teip og borrelås som forenkler fiksering, og gjør at produktet enkelt kan justeres og festes på nytt

Midjeelastikk for en sikker passform

Overflaten har FeelDry-teknologi som raskt kapsler inn urin og holder huden tørr

Stabil og myk benelastikk for god og sikker passform

Diskret våtindikator

Lekkasjesperrer for høy sikkerhet

Myke, tekstilliknende materialer som puster i hele produktet

Odour Neutralizer for nøytraliserende effekt på uønsket lukt



Produktdatablad TENA ProSkin Slip

Produktegenskaper

TENA Slip er et svært lekkasjesikkert produkt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med FeelDry™-overflaten gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for en sunn hud. Væskeavvisende lekkasjesperrer, midjeelastikk bak og høy elastisitet rundt bena hjelper til å motvirke lekkasje.

TENA Slip er både komfortabelt og hudvennlig. Tekstilliknende non-woven-materialer er benyttet rundt både selve produktet og sidepanelene.

Produktet har Odour Neutralizer, hvilket betyr at det inneholder superabsorbenter som kapsler inn urin og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt.


Enkel håndtering med kombinert teip og borrelås forenkler fiksering, og gjør produktet smidig å justere og feste på nytt. Våtindikator og tydelig fargemerking, som viser absorpsjonsnivå, gjør det lett å velge riktig produkt.



TENA ProSkin Slip

Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Livvidde cm	Lengde cm	Vekt g	Antall/pose stk	Antall/kart stk	Antall.kart pall	ISO 11948-1 Apsorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
Plus (blå)									
X-small	✓	50-75	62	66	30	90	20	1390	710430
Small	✓	55-85	71	71	30	90	16	1460	712131
Medium	✓	70-120	82	93	30	90	16	2026	712134
Large	✓	90-145	100	110	30	90	12	2487	712138
Super (grønn)									
Small	✓	55-85	71	75	30	90	16	1789	712132
Medium	✓	70-120	82	110	28	84	16	2475	712135
Large	✓	90-145	100	125	28	84	12	2711	712139
Bariatric XX-Large		163-178							61490
Bariatric 3XL		175-244							61391
Maxi (lilla)									
Small	✓	55-85	71	90	24	72	16	2036	712133
Medium	✓	70-120	82	133	24	72	16	3181	712136
Large	✓	90-145	100	164	24	72	12	3696	712140
Ultima (grå)									
Medium	✓	70-120	82	155	21	63	16	3472	712137
Large	✓	90-145	100	186	21	63	12	4353	712141
X-Large		120-160	98	194	18	54	12	4488	710622

Bruksanvisning

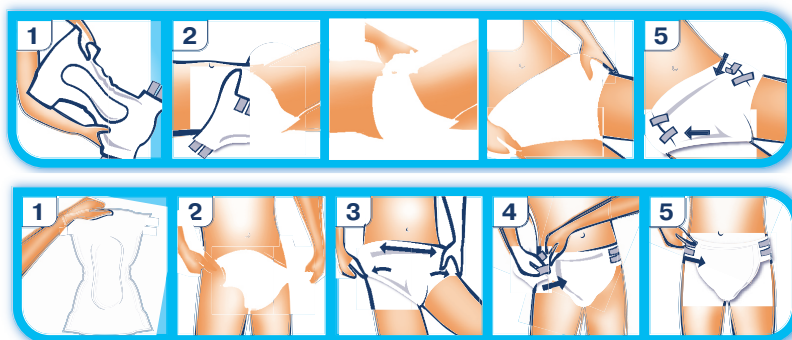

Produktdatablad TENA ProSkin Slip

Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, ØVRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, NEDRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting, tillate fuktig luft å ventilere ut fra produktet og således tilrettelegge for sunn hud og komfort

MIDJEELASTIKK

Materiale: Polyuretan

Funksjon: Passform, komfort, lekkasjesikkerhet

BENELASTIKK

Materiale: Polyeter og polyuretan

Funksjon: Passform og lekkasjesikkerhet

BARRIERE-ELASTIKK

Materiale: Polyeter og polyuretan

Funksjon: Bidra til lekkasjesikkerhet

TENA Slip-produkter inneholder ikke: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no



essity

TENA
an Essity brand

