

# WOUND CARE DryMax<sup>®</sup>

## NON STERILE


DryMax Non Sterile är ett följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Non Sterile absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhelingsmiljö bibehålls.

## DryMax Non Sterile


DryMax Non Sterile ska användas som ett sekundärt sårforband. Det har en enkel design med absorption från båda sidor vilket möjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.

Förbandet känns torrt och behagligt för patienten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhelingsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från primärförbandet. Vätskan fördelas jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core.


Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Non Sterile är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

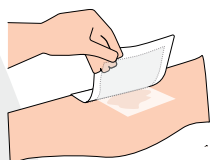

Förbandet placeras i nära kontakt med ett passande primärförband.

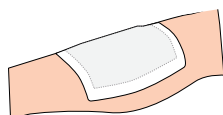

Fäst förbandet med bandage, film eller tape.

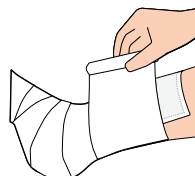

DryMax Non Sterile kan kombineras med kompressionsbehandling.



- Kostnadseffektiv
- Användarvänlig
- Ökad patientkomfort
- Bättre sårhelning



Artikel	REF	Ant./frp.	Produktstorlek (cm)	Absorptionskapacitet*
DryMax Non Sterile 10x10 cm	F20011/200	200	10x10	50 ml
DryMax Non Sterile 10x22 cm	F20021/100	100	10x22	130 ml
DryMax Non Sterile 20x22 cm	F20041/100	100	20x22	250 ml



\*) Enligt internationell standard EN 13726-1

**ABSORBEST**

Tillverkad av ABSORBEST AB  
www.absorbester.se | info@absorbester.se